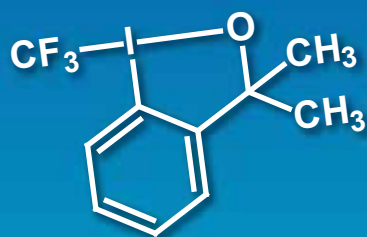
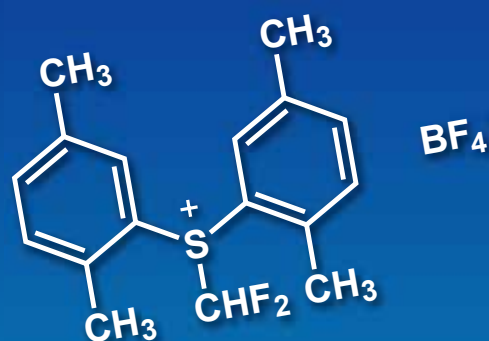
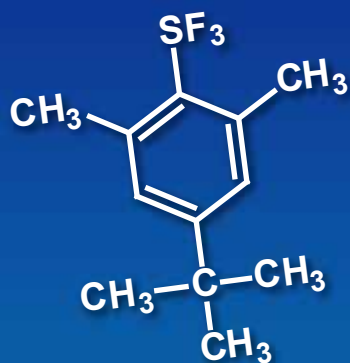


# 氟化试剂, 含氟结构砌块

## Fluorination Reagents, Fluorinated Building Blocks



# 产品列表

我们将根据应用和结构对产品进行介绍

氟化试剂	7	二氟芳烃	27
亲电氟化试剂	7	1,2-二氟苯	27
亲核氟化试剂	7	1,3-二氟苯	29
1,4-二氟苯		1,4-二氟苯	32
二氟甲基化试剂	7	三氟芳烃	32
1,2,3-三氟苯		1,2,3-三氟苯	32
1,2,4-三氟苯		1,2,4-三氟苯	33
1,3,5-三氟苯		1,3,5-三氟苯	34
三氟甲基化试剂	8	多氟芳烃	34
四氟苯		四氟苯	34
五氟苯		五氟苯	35
其它多氟芳烃		其它多氟芳烃	37
三氟甲磺基化试剂	9	二氟甲基/二氟甲氧基芳烃	37
全氟烷基化试剂	9	三氟甲基芳烃	38
单取代 ( <i>o</i> -) 三氟甲基苯		单取代 ( <i>o</i> -) 三氟甲基苯	38
单取代 ( <i>m</i> -) 三氟甲基苯		单取代 ( <i>m</i> -) 三氟甲基苯	39
单取代 ( <i>p</i> -) 三氟甲基苯		单取代 ( <i>p</i> -) 三氟甲基苯	40
二取代三氟甲基苯		二取代三氟甲基苯	41
其它三氟甲基芳烃		其它三氟甲基芳烃	44
其它含氟基团引入试剂	9	三氟甲氧基芳烃	44
含氟结构砌块	10	三氟甲磺基芳烃	46
单氟芳烃化合物	10	五氟硫烷基芳烃	46
单取代 ( <i>o</i> -) 单氟苯	10	杂单环化合物	46
单取代 ( <i>m</i> -) 单氟苯	11	稠杂环化合物	50
单取代 ( <i>p</i> -) 单氟苯	12	脂肪族化合物	52
二取代 (2,3-) 单氟苯	16		
二取代 (2,4-) 单氟苯	17		
二取代 (2,5-) 单氟苯	20		
二取代 (2,6-) 单氟苯	23		
二取代 (3,4-) 单氟苯	23		
二取代 (3,5-) 单氟苯	26		
三取代单氟苯	27		
其它单氟芳烃	27		

# 氟化试剂，含氟结构砌块

将氟引入到生物活性分子中通常能使这些分子的化学、物理和生物性质发生显著变化。由于氟原子在代谢转化具有阻断效应和酶底物方面具有模拟效应，因此能够独特地影响有机分子的性质。此外，它还能增强分子的亲脂性，从而提高生物利用度。将近有30%的农药和20%的药物中都含有氟<sup>1)</sup>。HMG-CoA还原酶抑制剂氟代他汀类(阿托伐他汀)，抗生素氟喹诺酮(左氧氟沙星)和抗肿瘤氟代核苷(替加氟)都是将氟引入到有机分子中的成功案例(图1)。因此，氟化剂对于药物和农用化合物的合成都是有用的工具。

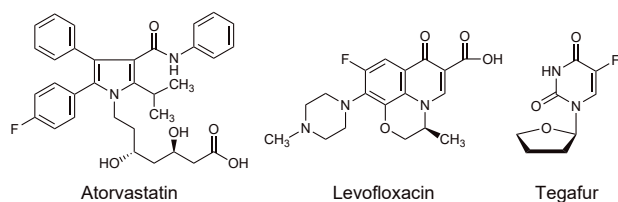
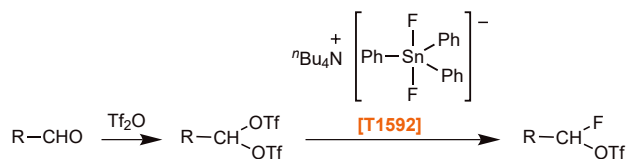


Fig. 1 Fluorinated bioactive compounds

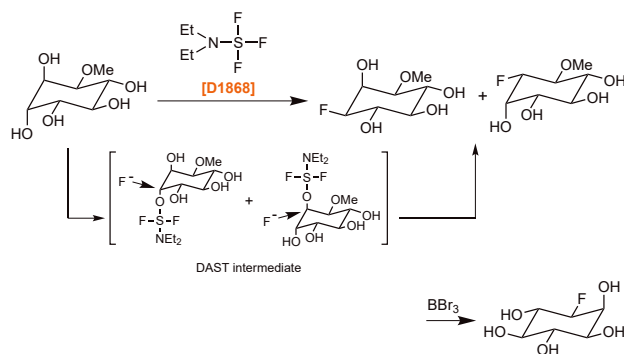
由于很少存在天然含氟化合物，因此有必要在合成中的特定阶段对有机化合物进行氟化。虽然氟气和氟化氢可以用作氟源，但是它们毒性很高且具有腐蚀性，在使用的过程中需要特殊的设备和技术。因此，替代氟化剂被开发出来，以便在化合物的选定位置上引入氟原子。氟化剂大致可以分为两类：亲核氟化试剂和亲电氟化试剂。亲核氟化试剂中，氟阴离子作为反应活性物。而亲电氟化试剂中，缺电子的氟原子作为反应活性物。此外，同时含有氟原子和可取代的官能团的结构砌块也可以用作氟源。

## 1. 亲核氟化试剂

最基础的亲核氟化试剂是氟化氢，它被用于含氟化合物的大批量工业生产。然而，由于氟化氢具有毒性和腐蚀性，而且H-F的高键能导致其反应活性低，它几乎不会用于实验室中。而KF、CsF[C2204]和Bu<sub>4</sub>N·F[T2754]等亲核氟化试剂，具有吸湿性，而且水分会和这些物质里的氟阴离子形成很强的氢键，从而导致它们的反应活性降低。鉴于此，一种完全摆脱氢键作用的“裸露”氟阴离子被开发出来。例如，由Gingrasas报道的作为Bu<sub>4</sub>N·F替代试剂的四丁基二氟三苯基锡酸铵[T1592]，不吸湿、热稳定，且在有机溶剂中溶解度高<sup>2)</sup>。Martines等以醛为原料，利用T1592合成出了偕取代的氟代三氟甲磺酸酯<sup>3)</sup>。

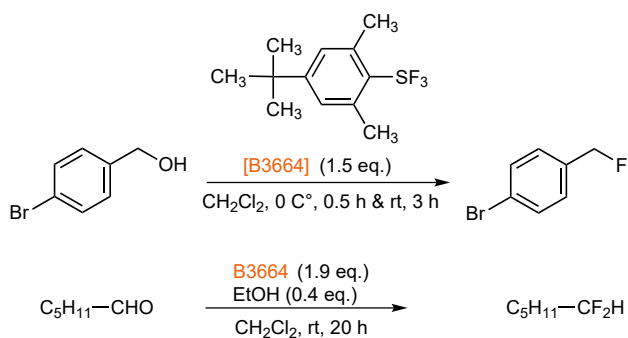


DAST [D1868]被广泛用于一系列用氟原子立体特异性取代羟基的合成过程中<sup>4)</sup>。Kozikowski等开发出一种由白坚木醇两步反应制备(-)-氟-肌醇的方法<sup>5)</sup>。据报道，该方法中D1868可以和白坚木醇的两个轴向羟基中的任意一个发生反应生成DAST中间体，该中间体大大增强了羟基的离去能力，从而使羟基很容易被氟阴离子亲核取代并伴随空间翻转。D1868对热不稳定，并且加热会使其完全分解。不过，D1868参与的反应通常在室温或者较低温度下短时间内即可完成。

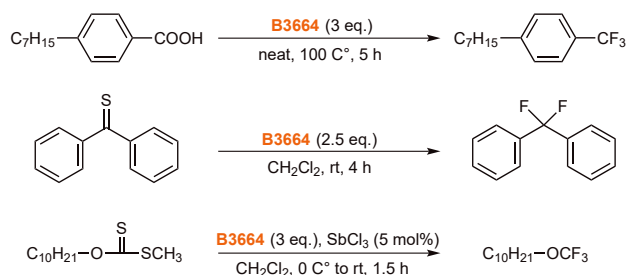


由Umamoto首次报道的4-叔丁基-2,6-二甲基苯基三氟化硫(FLUOLEAD™) [B3664]，是一种新型的亲核氟化试剂<sup>7)</sup>。B3664是一种热稳定性高的白色结晶固体，其热分解温度高达232°C(通过DSC分析法测得)。不同于DAST等其它现存的氟化剂，B3664的发烟特性不明显。并且B3664与水反应较慢，因此易于在空气中操作。

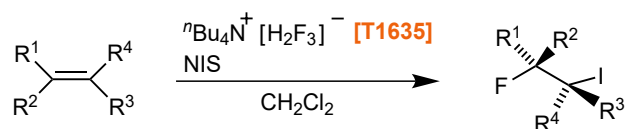
由B3664对羟基或者羰基进行氟化反应可以高产率地生成相应的含氟化合物，并且温度条件适用范围广(0-100°C)。



不同于其它氟化剂, **B3664**能够以良好产率将羧基 (-COOH)转变为三氟甲基 (-CF<sub>3</sub>)。此外, 硫酮或者硫酯也可以通过**B3664**氟化。由此可见, **B3664**是一种有用的氟化剂, 适用于多种底物, 并且可以用作其它氟化剂的替代物。



另一种促进氟阴离子进攻的方法是生成碳正离子。碳正离子可以通过有机化合物的氧化作用生成。因此, 氧化剂和氟化剂联合使用可以使氟化反应更易发生。此外, 通过选择合适的氧化剂, 可以进行选择性氟化。Kuroboshi等利用四正丁基二氢三氟化铵[T1635]和氧化剂NIS, 实现了由烯烃到氟代碘烷的合成反应<sup>8)</sup>。

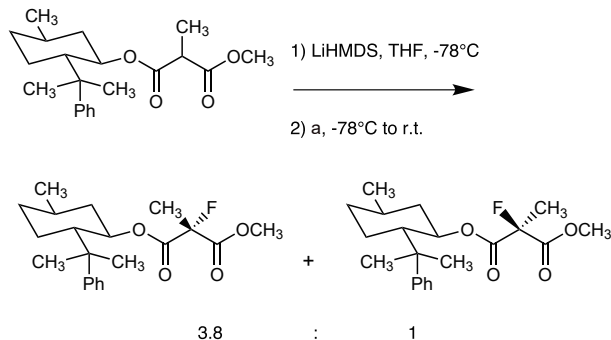
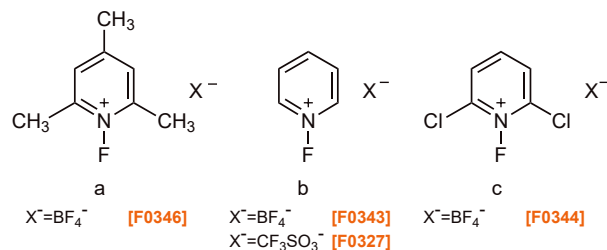


电解氧化也是一种有机化合物氧化的方法。由于不需要使用氧化剂, 可以使目标化合物的纯化过程更易实现。

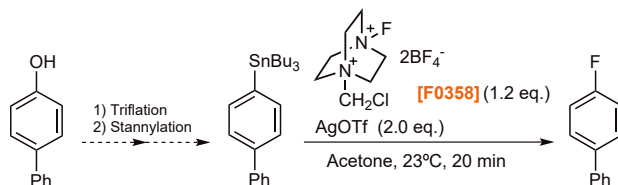
## 2. 亲电氟化试剂

在亲电氟化试剂中, 氟气是一种基本试剂, 由于反应剧烈, 并且毒性高, 因此不适用于部分氟化反应。Umemoto等报道了一种稳定且易操作的晶体 *N*-氟吡啶盐(**a**, **b**, **c**), 其具有很高的反应活性<sup>9)</sup>。通过在吡啶环上引入吸电子或供电子基团, 可以提高或降低氟化能力。例如, 在如下所示的结构中, **a**、**b**、**c**的氟化能力依次增强。此外, 通过选择合适的反应试剂还可以实现抑制副反应和提高产率的

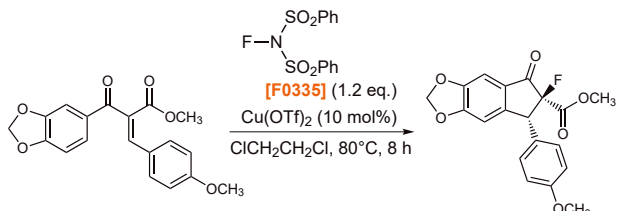
目的。



*N*-氟-*N'*-(氯甲基)三乙二胺双(四氟硼酸盐) [F0358]是一种粉末, 易操作且作为亲电氟化试剂适用于烯醇、硅烯醇醚、烯烃、稳定的碳负离子、芳香族化合物、有机硫化合物和格氏试剂等<sup>10)</sup>。

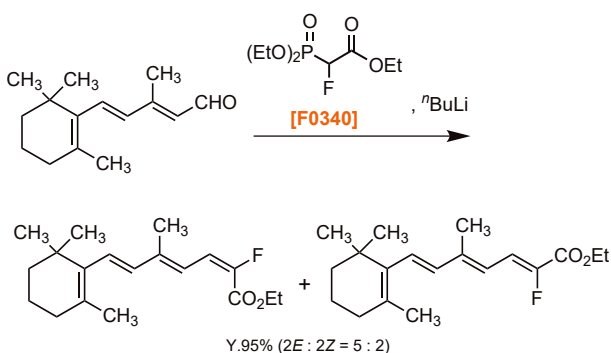


*N*-氟二苯磺酰胺[F0335]也是一种易于使用且稳定的晶体状亲电氟化试剂, 适用于烯醇化物、硅烯醇醚、芳香族化合物、有机锂化合物和烷基磷酸碳负离子等<sup>11)</sup>。

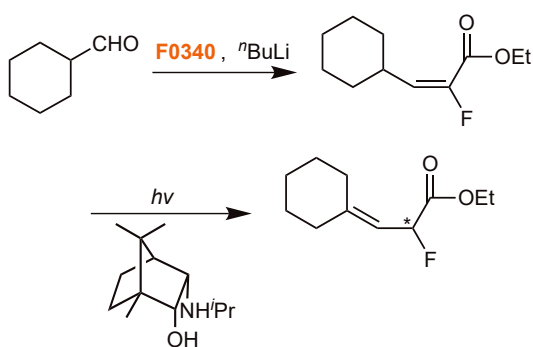


## 3. 含氟结构砌块

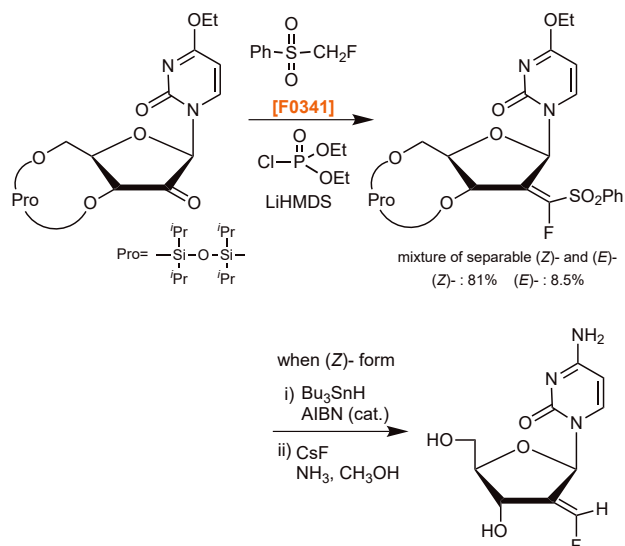
近来, 同时含有一个氟原子和可取代官能团的含氟结构砌块, 是一种易于获取的氟源。尤其是在同一碳上含有一个氟原子和吸电子基团的化合物, 是有效制备生理活性化合物的含氟结构砌块。这类化合物用碱处理后生成可以和亲电试剂反应的氟-碳负离子。例如, 2-氟-2-磷酰基乙酸三乙酯 [F0340]<sup>12</sup>能在碱存在的条件下产生氟-碳负离子。这种负离子可以和羰基化合物发生Horner-Emmons反应生成 $\alpha$ -氟- $\alpha, \beta$ -不饱和酯, 这些酯可以还原为醛和醇, 是合成很多生理活性化合物非常有用的中间体。维生素A衍生物<sup>13</sup>、昆虫性信息素<sup>14</sup>和具有杀虫作用的拟除虫菊酯<sup>15</sup>等化合物, 都是通过F0340合成的含氟生理活性化合物的主要实例。



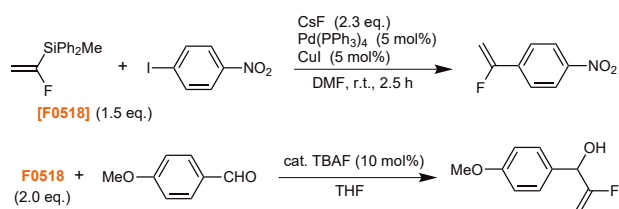
Piva发现, 在碱存在和254nm光辐射的条件下,  $\alpha$ -氟- $\alpha, \beta$ -不饱和酯能够生成 $\alpha$ -氟- $\beta, \gamma$ -不饱和酯。如果使用光学活性胺作为碱, 还可以优先得到其中任意一种旋光对映体<sup>16</sup>。



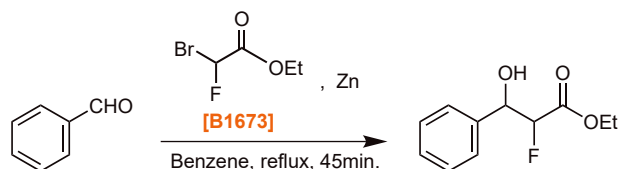
氟甲基苯基砜[F0341], 同一个碳原子上同时含有一个氟原子和磺酰基, 可在碱存在的条件下生成氟-碳负离子<sup>17</sup>。这些负离子和羰基化合物反应时生成 $\alpha$ -氟- $\beta$ -羟基苯基砜衍生物, 通过进一步反应则可转化为 $\alpha$ -氟- $\alpha, \beta$ -不饱和砜和氟乙烯衍生物。McCarthy等报道了一种利用F0341立体选择性地在新基中引入氟亚甲基的方法<sup>18</sup>。



在氟阴离子和催化量的CuI、Pd存在的条件下, 1-氟乙烯基硅烷[F0518]和卤代芳烃反应生成了相应的(1-氟乙烯基)芳烃<sup>19</sup>。该反应通过1-氟乙烯基的转金属化过程进行, 反应条件温和, 且产率很高。此外, F0518还可以和醛反应, 以良好产率生成相应的单氟芳基醇<sup>20</sup>。



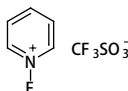
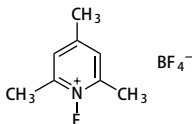
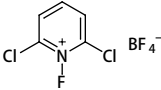
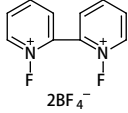
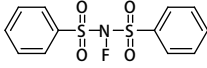
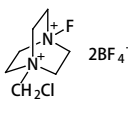
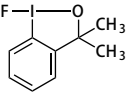
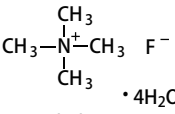
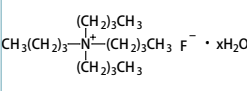
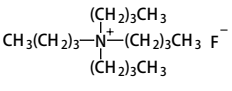
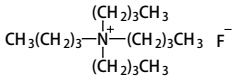
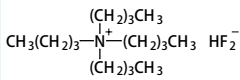
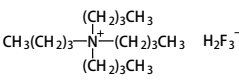
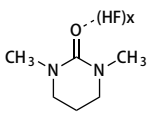
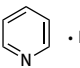
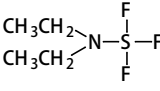
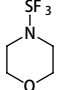
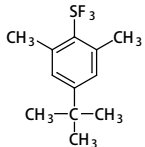
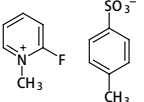
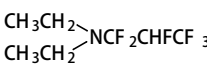
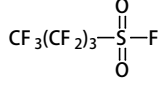
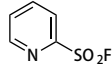
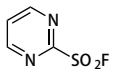
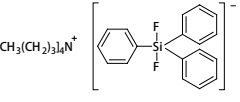
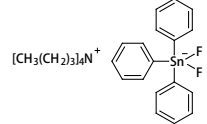
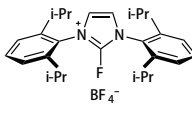
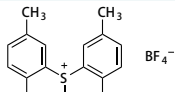
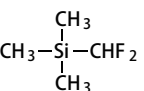
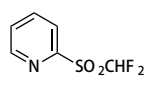
在同一碳上具有一个氟原子, 一个溴原子和一个羧基的溴氟乙酸乙酯[B1673], 与锌反应可生成Reformatsky试剂。Reformatsky试剂不仅可以和羰基化合物反应生成 $\alpha$ -氟- $\beta$ -羟基酯<sup>21</sup>, 还可以和N-( $\alpha$ -氨基烷基)苯并三唑反应生成 $\alpha$ -氟- $\beta$ -氨基酯<sup>22</sup>。Takeuchi等使用B1673合成了一种N-保护的 $\alpha$ -氟- $\alpha$ -氨基酯, 并对其化学性质进行了详细报道<sup>23</sup>。

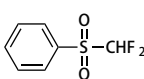
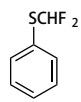
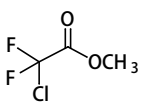
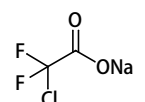
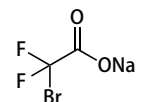
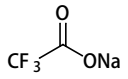
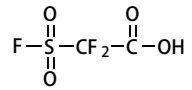
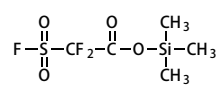
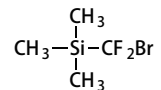
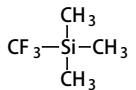
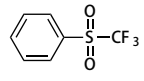
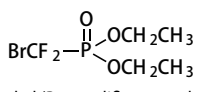
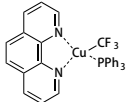
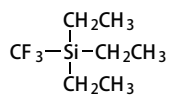
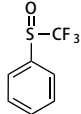
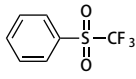
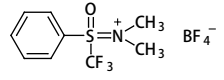
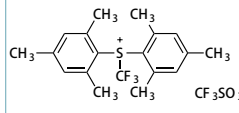
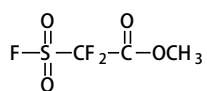
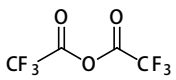
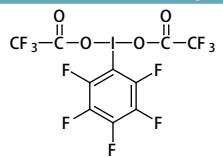
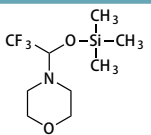
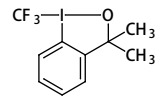
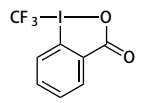
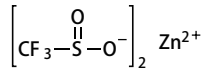
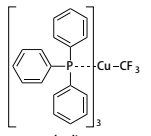


本文所述的氟化剂和含氟结构砌块, 无需使用特殊的设备和技术, 用正常的有机合成方法即可制备含氟有机化合物。这些氟化剂和含氟结构砌块已经被成功用于许多药物和农用化学品的合成中。

## 参考文献

- 1) T. Furuya, A. S. Kamlet, T. Ritter, *Nature*, **2011**, 473, 470; K. Müller, C. Faeh, F. Diederch, *Science* **2007**, 317, 1881.
- 2) M. Gingras, *Tetrahedron Lett.* **1991**, 32, 7381.
- 3) A. G. Martinez, J. O. Barcina, A. Z. Rys, L. R. Subramanian, *Tetrahedron Lett.* **1992**, 33, 7787; A. G. Martinez, J. O. Barcina, A. Z. Rys, L. R. Subramanian, *Synlett* **1993**, 587.
- 4) L. N. Markovskij, V. E. Pashinnik, A. V. Kirsanov, *Synthesis* **1973**, 787; W. J. Middleton, *J. Org. Chem.* **1975**, 40, 574; M. Hudlicky, *Org. React.* **1988**, 35, 513; Wm. Rosenbrook, Jr., D. A. Riley, P. A. Lartey, *Tetrahedron Lett.* **1985**, 26, 3.
- 5) P. A. Kozikowski, A. H. Fauq, J. M. Rusnak, *Tetrahedron Lett.* **1989**, 30, 3365.
- 6) G. S. Lal, G. P. Pez, R. J. Pesaresi, F. M. Prozonc, H. Cheng, *J. Org. Chem.* **1999**, 64, 7048; G. S. Lal, E. Lobach, A. Evans, *J. Org. Chem.* **2000**, 65, 4830; R. P. Singh, B. Twamley, J. M. Shreeve, *J. Org. Chem.* **2002**, 67, 1918; J. M. White, A. R. Tunoori, B. J. Turunen, G. I. Georg, *J. Org. Chem.* **2004**, 69, 2573.
- 7) T. Umemoto, R. P. Singh, Y. Xu, N. Saito, *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, 132, 18199.
- 8) M. Kuroboshi, T. Hiyama, *Tetrahedron Lett.* **1991**, 32, 1215.
- 9) T. Umemoto, K. Tomita, *Tetrahedron Lett.* **1986**, 27, 3271; M. Ihara, N. Taniguchi, T. Kai, K. Satoh, K. Fukumoto, *J. Chem. Soc. Perikin Trans. 1* **1992**, 221.
- 10) C. Zhou, J. Li, B. Lu, C. Fu, S. Ma, *Org. Lett.* **2008**, 10, 581; T. Furuya, A. E. Strom, T. Ritter, *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, 131, 1662.
- 11) J. Nie, H.-W. Zhu, H.-F. Cui, M.-Q. Hua, J.-A. Ma, *Org. Lett.* **2007**, 9, 3053.
- 12) M. Kikuchi, T. Onozawa, *Yuki Gosei Kagaku Kyokai Shi (J. Synth. Org. Chem. Japan)* **1997**, 55, 88.
- 13) R. S. H. Liu, H. Matsumoto, A. E. Asato, M. Denny, Y. Shichida, T. Yoshizawa, F. W. Dahlquist, *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, 103, 7195; A. J. Lovey, B. A. Pawson, *J. Med. Chem.* **1982**, 25, 71.
- 14) F. Camps, J. Coll, G. Fabrias, A. Guerrero, *Tetrahedron* **1984**, 40, 2871.
- 15) Ph. Coutrot, C. Grison, R. Sauvetre, *J. Organomet. Chem.* **1987**, 332, 1.
- 16) O. Piva, *Synlett* **1994**, 729.
- 17) M. Inbasekaran, N. P. Peet, J. R. McCarthy, M. E. LeTourneau, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1985**, 678.
- 18) J. R. McCarthy, D. P. Matthews, D.M. Stemerick, E. W. Huber, P. Bey, B. J. Lippert, R. D. Snyder, P. S. Sunkara, *J. Am. Chem. Soc.* **1991**, 113, 7439.
- 19) T. Hanamoto, T. Kobayashi, *J. Org. Chem.* **2003**, 68, 6354.
- 20) T. Hanamoto, S. Harada, K. Shindo, M. Kondo, *Chem. Commun.* **1999**, 2397.
- 21) E. T. McBee, O. R. Pierce, D. L. Christman, *J. Am. Chem. Soc.* **1955**, 77, 1581; S. Brandange, O. Dahlman, L. Morch, *J. Am. Chem. Soc.* **1982**, 103, 4452.
- 22) A. R. Katriazky, D. A. Nichols, M. Qi, *Tetrahedron Lett.* **1998**, 39, 7063.
- 23) Y. Takeuchi, M. Nabetani, K. Takagi, T. Hagi, T. Koizumi, *J. Chem. Soc. Perikin Trans. 1* **1991**, 49; Y. Takeuchi, K. Takagi, T. Yamaba, M. Nabetani, T. Koizumi, *J. Fluorine Chem.* **1994**, 68, 149.

<h2>氟化试剂</h2> <h3>Fluorinating Agents</h3>		<h2>亲电氟化试剂</h2> <h3>Electrophilic Fluorinating Agents</h3>		<b>F0327</b> 5g 25g  1-Fluoropyridinium Trifluoromethanesulfonate CAS RN: 107263-95-6	<b>F0346</b> 5g  1-Fluoro-2,4,6-trimethyl- pyridinium Tetrafluoroborate CAS RN: 109705-14-8
<b>F0344</b> 5g 25g  1-Fluoro-2,6-dichloropyridinium Tetrafluoroborate CAS RN: 140623-89-8	<b>D3812</b> 1g 5g 25g 100g  1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium Bis(tetrafluoroborate) CAS RN: 178439-26-4	<b>F0335</b> 5g 25g  N-Fluorobenzenesulfonimide CAS RN: 133745-75-2	<b>F0358</b> 5g 25g 100g  F-TEDA-BF <sub>4</sub> CAS RN: 140681-55-6	<b>F0957</b> 1g  1-Fluoro-3,3-dimethyl- 1,2-benziodoxole CAS RN: 1391728-13-4	
<h2>亲核氟化试剂</h2> <h3>Nucleophilic Fluorinating Agents</h3>		<b>C2204</b> 25g 100g CsF Cesium Fluoride CAS RN: 13400-13-0	<b>T2754</b> 5g 25g  Tetramethylammonium Fluoride Tetrahydrate CAS RN: 17787-40-5	<b>T1037</b> 25g 100g  Tetrabutylammonium Fluoride Hydrate CAS RN: 22206-57-1	<b>T1338</b> 25mL 100mL 500mL  Tetrabutylammonium Fluoride (ca. 1mol/L in Tetrahydrofuran) CAS RN: 429-41-4
<b>T1339</b> 25g 100g 500g  Tetrabutylammonium Fluoride (70-75% in Water) CAS RN: 429-41-4	<b>T1295</b> 5g 25g  Tetrabutylammonium Bifluoride CAS RN: 23868-34-0	<b>T1635</b> 5g 25g  Tetrabutylammonium Dihydrogen Trifluoride CAS RN: 99337-56-1	<b>T2022</b> 10g (CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> N · 3HF Triethylamine Trihydrofluoride CAS RN: 73602-61-6	<b>T2026</b> 10g (CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> NF · 3HF Tetraethylammonium Fluoride Trihydrofluoride CAS RN: 42539-97-9	
<b>T2027</b> 10g (CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> NF · 4HF Tetraethylammonium Fluoride Tetrahydrofluoride CAS RN: 145826-81-9	<b>D5272</b> 1g 5g  DMPU-HF Reagent (HF 65%) CAS RN: 287966-55-6	<b>P2140</b> 1g 5g IF <sub>5</sub> ·  · HF IF <sub>5</sub> -Pyridine-HF CAS RN: 2243786-10-7	<b>D1868</b> 5g 25g 100g  DAST CAS RN: 38078-09-0	<b>M1573</b> 1g 5g  Morph-DAST CAS RN: 51010-74-3	
<b>B3664</b> 1g 5g  FLUOLEAD™ CAS RN: 947725-04-4	<b>F0225</b> 5g 25g  2-Fluoro-1-methylpyridinium <i>p</i> -Toluenesulfonate CAS RN: 58086-67-2	<b>H0598</b> 25g 100g 500g  Ishikawa's Reagent CAS RN: 309-88-6	<b>P1098</b> 25g 100g 250g  Perfluoro-1-butanenonyl Fluoride CAS RN: 375-72-4	<b>P2398</b> 5g  Pyridine-2-sulfonyl Fluoride CAS RN: 878376-35-3	
<b>P2465</b> 1g 5g  Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride CAS RN: 35762-87-9	<b>T1909</b> 5g 25g  Tetrabutylammonium Difluorotriphenylsilicate CAS RN: 163931-61-1	<b>T1592</b> 1g 5g  Tetrabutylammonium Difluorotriphenylstannate CAS RN: 139353-88-1	<b>B5480</b> 200mg 1g  AlkylFluor™ CAS RN: 2043361-32-4		
<h2>二氟甲基化试剂</h2> <h3>Difluoromethylating Agents</h3>		<b>D5630</b> 1g 5g  (Difluoromethyl)bis(2,5- dimethylphenyl)sulfonium Tetrafluoroborate CAS RN: 2133476-51-2	<b>D4364</b> 1mL 5mL 25mL  (Difluoromethyl)trimethylsilane CAS RN: 65864-64-4	<b>D5390</b> 1g  Difluoromethyl 2-Pyridyl Sulfone CAS RN: 1219454-89-3	

<p><b>D4764</b> 1g 5g</p>  <p>Difluoromethyl Phenyl Sulfone CAS RN: 1535-65-5</p>	<p><b>D4938</b> 1g 5g</p>  <p>Difluoromethyl Phenyl Sulfide CAS RN: 1535-67-7</p>	<p><b>C1586</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl Chlorodifluoroacetate CAS RN: 1514-87-0</p>	<p><b>C0991</b> 25g 100g 500g</p>  <p>Sodium Chlorodifluoroacetate CAS RN: 1895-39-2</p>	<p><b>S0908</b> 5g</p>  <p>Sodium Bromodifluoroacetate CAS RN: 84349-27-9</p>
<p><b>T1336</b> 25g 100g 500g</p>  <p>Sodium Trifluoroacetate CAS RN: 2923-18-4</p>	<p><b>F0500</b> 5g</p>  <p>2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)-acetic Acid CAS RN: 1717-59-5</p>	<p><b>T3022</b> 5g 25g</p>  <p>Trimethylsilyl Difluoro(fluorosulfonyl)acetate CAS RN: 120801-75-4</p>	<p><b>B4325</b> 1g 5g</p>  <p>(Bromodifluoromethyl)-trimethylsilane CAS RN: 115262-01-6</p>	<p><b>T1570</b> 5g 25g</p>  <p>Ruppert-Prakash Reagent CAS RN: 81290-20-2</p>
<p><b>P2195</b> 1g 5g</p>  <p>Phenyl Trifluoromethyl Sulfone CAS RN: 426-58-4</p>	<p><b>D3071</b> 5g 25g</p>  <p>Diethyl (Bromodifluoromethyl)-phosphonate CAS RN: 65094-22-6</p>	<p><b>三氟甲基化试剂</b> <b>Trifluoromethylating Agents</b></p>		
<p><b>P2172</b> 1g 5g</p>  <p>(1,10-Phenanthroline)-(trifluoromethyl)-(triphenylphosphine)copper(I) CAS RN: 1334890-93-5</p>	<p><b>T3958</b> 25mL 100mL</p> <p><b>CF<sub>3</sub>I</b> Trifluoroiodomethane (ca. 10% in Dimethyl Sulfoxide, ca. 0.6mol/L) CAS RN: 2314-97-8</p>			
<p><b>T2764</b> 1g 5g</p>  <p>Triethyl(trifluoromethyl)silane CAS RN: 120120-26-5</p>	<p><b>T2033</b> 5g 25g</p> <p><b>CF<sub>3</sub>SO<sub>2</sub>Na</b> Langlois Reagent CAS RN: 2926-29-6</p>	<p><b>T3592</b> 1g 5g</p> <p><b>CF<sub>3</sub>SO<sub>2</sub>Br</b> Trifluoromethanesulfonyl Bromide CAS RN: 15458-53-4</p>	<p><b>P2460</b> 1g 5g</p>  <p>Phenyl Trifluoromethyl Sulfoxide CAS RN: 703-18-4</p>	<p><b>P2195</b> 1g 5g</p>  <p>Phenyl Trifluoromethyl Sulfone CAS RN: 426-58-4</p>
<p><b>O0367</b> 200mg 1g</p>  <p>Shibata Reagent I CAS RN: 1046786-08-6</p>	<p><b>D5889</b> 1g 10g</p>  <p>Mes-Umemoto Reagent CAS RN: 1895006-01-5</p>	<p><b>F0311</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl Fluorosulfonyldifluoroacetate CAS RN: 680-15-9</p>	<p><b>T1336</b> 25g 100g 500g</p> <p><b>CF<sub>3</sub>COONa</b> Sodium Trifluoroacetate CAS RN: 2923-18-4</p>	<p><b>P2114</b> 25g 100g</p> <p><b>CF<sub>3</sub>COOK</b> Potassium Trifluoroacetate CAS RN: 2923-16-2</p>
<p><b>T0433</b> 20mL 100mL 400mL</p>  <p>Trifluoroacetic Anhydride CAS RN: 407-25-0</p>	<p><b>B1616</b> 1g 5g</p>  <p>FPIFA CAS RN: 14353-88-9</p>	<p><b>T3597</b> 1g 5g</p>  <p>4-[2,2,2-Trifluoro-1-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl]morpholine CAS RN: 289706-46-3</p>	<p><b>P2036</b> 5g 25g</p> <p><b>CH<sub>3</sub>O-B(OCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-CF<sub>3</sub> K<sup>+</sup></b> Potassium Trimethoxy-(trifluoromethyl)borate CAS RN: 626232-27-7</p>	<p><b>T2624</b> 1g 5g</p>  <p>Togni Reagent CAS RN: 887144-97-0</p>
<p><b>T3014</b> 1g 5g</p>  <p>Togni Reagent II (contains 60% Diatomaceous earth) CAS RN: 887144-94-7</p>	<p><b>Z0028</b> 1g 5g</p>  <p>Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulfinate) CAS RN: 39971-65-8</p>	<p><b>T2883</b> 1g 5g</p>  <p>(Trifluoromethyl)-tris(triphenylphosphine)copper(I) CAS RN: 325810-07-9</p>		

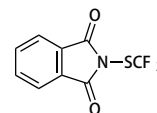
## 三氟甲基化试剂 Trifluoromethylating Agents

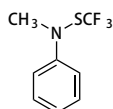
**C1159** 1g 5g

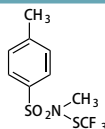
 Copper(I) Trifluoromethanethiolate  
CAS RN: 3872-23-9

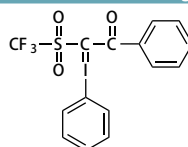
**S0977** 1g 5g

 Silver(I) Trifluoromethanethiolate  
CAS RN: 811-68-7

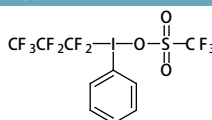
**T3143** 1g 5g

 N-(Trifluoromethylthio)phthalimide  
CAS RN: 719-98-2

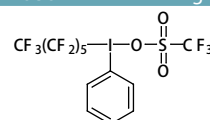
**M2595** 200mg 1g

 N-Methyl-N-(trifluoromethylthio)aniline  
CAS RN: 66476-44-6

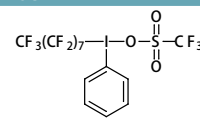
**M2782** 1g 5g

 N-Methyl-N-((trifluoromethylthio)-p-toluenesulfonamide  
CAS RN: 1045822-31-8

**P2143** 1g 5g

 Shibata Reagent II  
CAS RN: 1443036-49-4

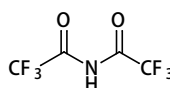
## 全氟烷基化试剂 Perfluoroalkylating Agents

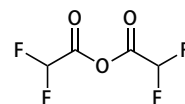
**P1082** 1g

 (Perfluoropropyl)phenyliodonium  
Trifluoromethanesulfonate  
CAS RN: 77758-79-3

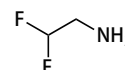
**P1080** 1g 5g

 (Perfluorohexyl)phenyliodonium  
Trifluoromethanesulfonate  
CAS RN: 77758-84-0

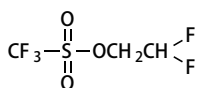
**P1081** 1g

 (Perfluoro-n-octyl)phenyliodonium  
Trifluoromethanesulfonate  
CAS RN: 77758-89-5

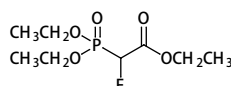
## 其它含氟基团引入试剂 Other Fluorinated Group Introducing Agents

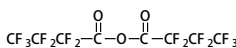
**B0986** 5g 25g

 BTFA  
CAS RN: 407-24-9

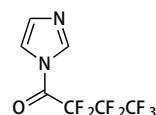
**D4164** 5g

 Difluoroacetic Anhydride  
CAS RN: 401-67-2

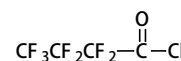
**D4758** 1g 5g

 2,2-Difluoroethylamine  
CAS RN: 430-67-1

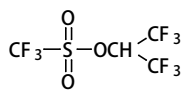
**D5299** 1g 5g

 2,2-Difluoroethyl Triflate  
CAS RN: 74427-22-8

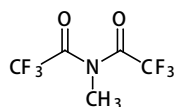
**F0340** 1g 5g

 Triethyl 2-Fluoro-2-phosphonoacetate  
CAS RN: 2356-16-3

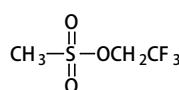
**H0337** 10g

 Heptafluorobutyric Anhydride  
CAS RN: 336-59-4

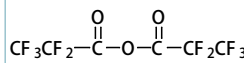
**H0467** 5g 25g

 1-(Heptafluorobutyl)imidazole  
CAS RN: 32477-35-3

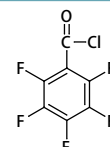
**H0508** 5g 25g

 Heptafluorobutyl Chloride  
CAS RN: 375-16-6

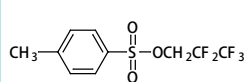
**H1276** 5g

 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl  
Trifluoromethanesulfonate  
CAS RN: 156241-41-7

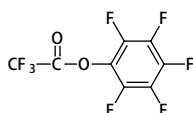
**M0671** 1mL 5mL

 N-Methylbis(trifluoroacetamide)  
CAS RN: 685-27-8

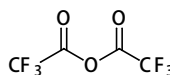
**M1193** 5g 25g

 2,2,2-Trifluoroethyl  
Methanesulfonate  
CAS RN: 25236-64-0

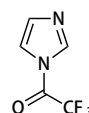
**P0566** 5g 25g

 Pentafluoropropionic Anhydride  
CAS RN: 356-42-3

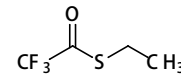
**P0807** 5g 25g

 Pentafluorobenzoyl Chloride  
CAS RN: 2251-50-5

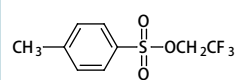
**P1834** 5g 25g

 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Tosylate  
CAS RN: 565-42-4

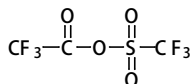
**P1894** 5g 25g

 Pentafluorophenyl Trifluoroacetate  
CAS RN: 14533-84-7

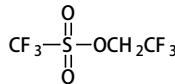
**T0433** 20mL 100mL 400mL

 Trifluoroacetic Anhydride  
CAS RN: 407-25-0

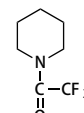
**T0670** 5g 25g

 1-(Trifluoroacetyl)imidazole  
CAS RN: 1546-79-8

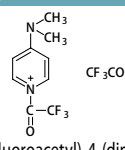
**T0872** 5mL

 S-Ethyl Trifluorothioacetate  
CAS RN: 383-64-2

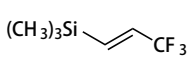
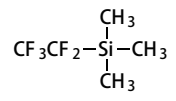
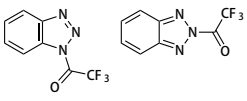
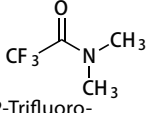
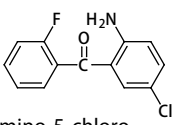

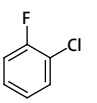
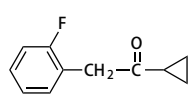
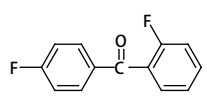
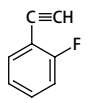
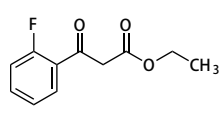
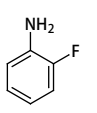
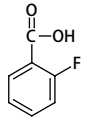
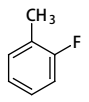
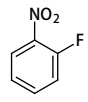
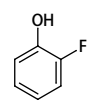
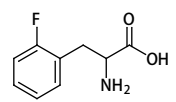
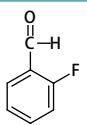
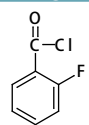
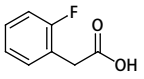
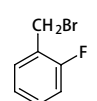
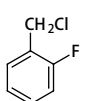
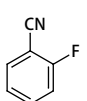
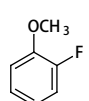
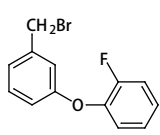
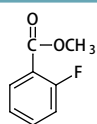
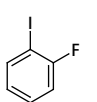
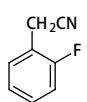
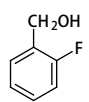
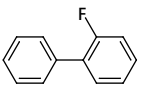
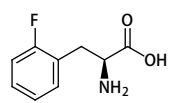
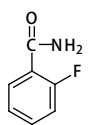
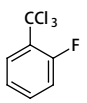
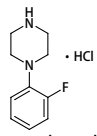
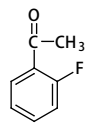
**T1516** 25g

 2,2,2-Trifluoroethyl p-Toluenesulfonate  
CAS RN: 433-06-7

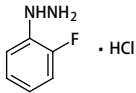
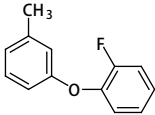
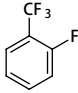
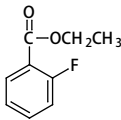
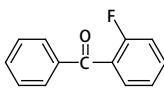
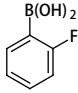
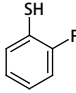
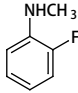
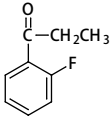
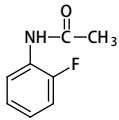
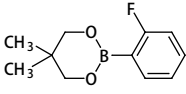
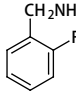
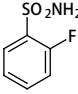
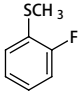
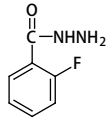
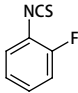
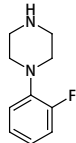
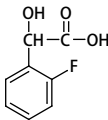
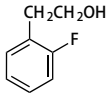
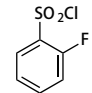
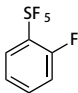
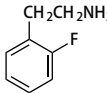
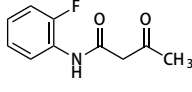
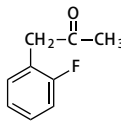
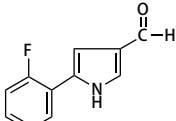
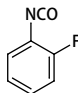
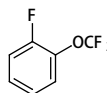
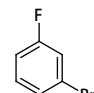
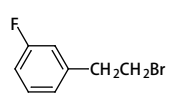
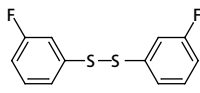
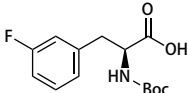
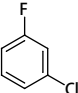
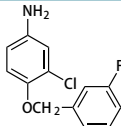
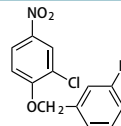
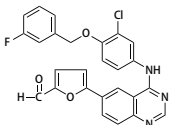
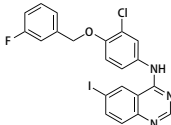
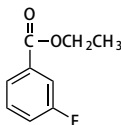
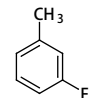
**T1531** 5g

 Trifluoroacetyl Triflate  
CAS RN: 68602-57-3

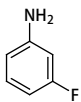
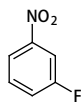
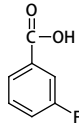
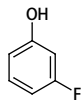
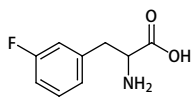
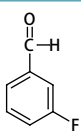
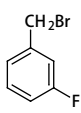
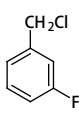
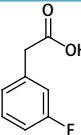
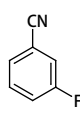
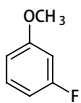
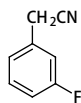
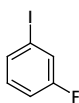
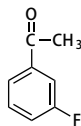
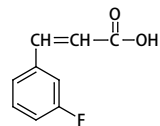
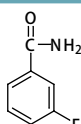
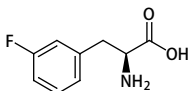
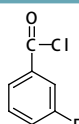
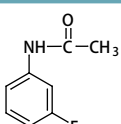
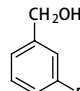
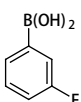
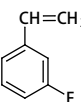
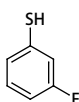
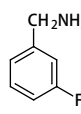
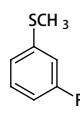
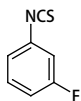
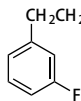
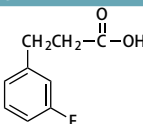
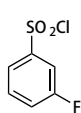
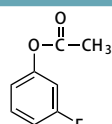
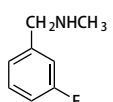
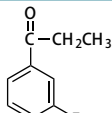
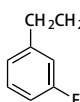
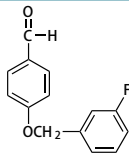
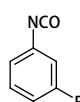
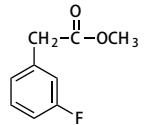
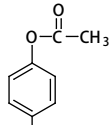
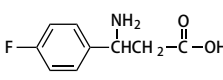
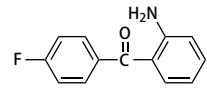
**T1604** 5g 25g

 2,2,2-Trifluoroethyl  
Trifluoromethanesulfonate  
CAS RN: 6226-25-1

**T2087** 5g 25g

 1-(Trifluoroacetyl)piperidine  
CAS RN: 340-07-8

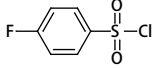
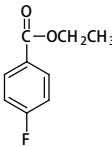
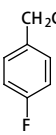
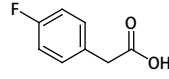
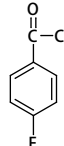
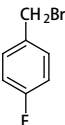
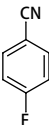
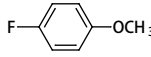
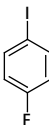
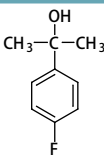
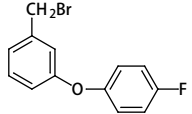
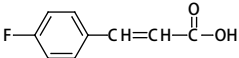
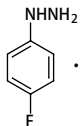
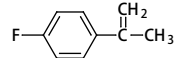
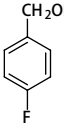
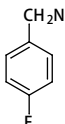
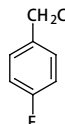
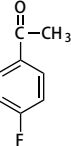
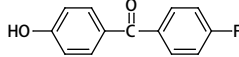
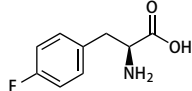
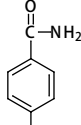
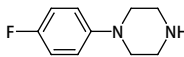
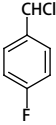
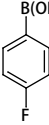
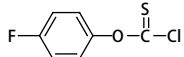
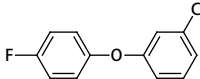
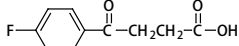
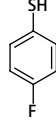
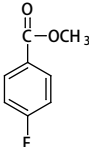
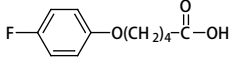
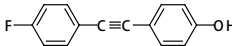
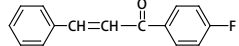
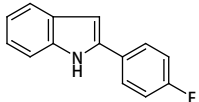
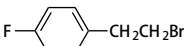
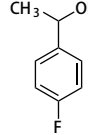
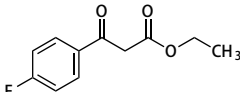
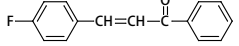
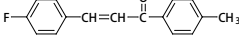
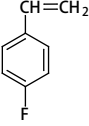
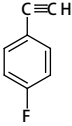
**T2602** 5g

 1-(Trifluoroacetyl)-4-(dimethylamino)pyridinium  
Trifluoroacetate  
CAS RN: 181828-01-3

<p><b>T2977</b> 1g 5g</p>  <p>Ikeda - Omote Reagent CAS RN: 55364-28-8</p>	<p><b>T3011</b> 1g 5g</p>  <p>Trimethyl(pentafluoroethyl)silane CAS RN: 124898-13-1</p>	<p><b>T3174</b> 1g 5g</p>  <p>(Trifluoroacetyl)benzotriazole CAS RN: 183266-61-7</p>	<p><b>T3262</b> 5g 25g</p>  <p>2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide CAS RN: 1547-87-1</p>	
<p><b>含氟结构砌块</b> Fluorinated Building Blocks</p>		<p><b>单氟芳烃化合物</b> Monofluoro Aromatic Compounds</p>	<p><b>单取代(o-)单氟苯</b> Monosubstituted (ortho-) Monofluorobenzenes</p>	<p><b>A1451</b> 25g</p>  <p>2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone CAS RN: 784-38-3</p>
<p><b>B0883</b> 25g 100g 500g</p>  <p>2-Bromofluorobenzene CAS RN: 1072-85-1</p>	<p><b>C0647</b> 10g 25g</p>  <p>1-Chloro-2-fluorobenzene CAS RN: 348-51-6</p>	<p><b>C2710</b> 5g 25g</p>  <p>Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl Ketone CAS RN: 150322-73-9</p>	<p><b>D1796</b> 5g 25g</p>  <p>2,4'-Difluorobenzophenone CAS RN: 342-25-6</p>	<p><b>E0654</b> 5g</p>  <p>1-Ethynyl-2-fluorobenzene CAS RN: 766-49-4</p>
<p><b>E1097</b> 5g 25g</p>  <p>Ethyl (2-Fluorobenzoyl)acetate CAS RN: 1479-24-9</p>	<p><b>F0032</b> 25g 100g 500g</p>  <p>2-Fluoroaniline CAS RN: 348-54-9</p>	<p><b>F0035</b> 25g 500g</p>  <p>2-Fluorobenzoic Acid CAS RN: 445-29-4</p>	<p><b>F0039</b> 25mL 500mL</p>  <p>2-Fluorotoluene CAS RN: 95-52-3</p>	<p><b>F0104</b> 25g 100g 500g</p>  <p>2-Fluoronitrobenzene CAS RN: 1493-27-2</p>
<p><b>F0150</b> 25g 250g</p>  <p>2-Fluorophenol CAS RN: 367-12-4</p>	<p><b>F0170</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-DL-phenylalanine CAS RN: 2629-55-2</p>	<p><b>F0190</b> 25mL 250mL</p>  <p>2-Fluorobenzaldehyde CAS RN: 446-52-6</p>	<p><b>F0195</b> 25g 100g 500g</p>  <p>2-Fluorobenzoyl Chloride CAS RN: 393-52-2</p>	<p><b>F0205</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluorophenylacetic Acid CAS RN: 451-82-1</p>
<p><b>F0209</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluorobenzyl Bromide CAS RN: 446-48-0</p>	<p><b>F0211</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluorobenzyl Chloride CAS RN: 345-35-7</p>	<p><b>F0220</b> 25g</p>  <p>2-Fluorobenzonitrile CAS RN: 394-47-8</p>	<p><b>F0230</b> 25mL</p>  <p>2-Fluoroanisole CAS RN: 321-28-8</p>	<p><b>F0236</b> 100mg 1g</p>  <p>3-(2-Fluorophenoxy)benzyl Bromide CAS RN: 242812-04-0</p>
<p><b>F0241</b> 25g 500g</p>  <p>Methyl 2-Fluorobenzoate CAS RN: 394-35-4</p>	<p><b>F0253</b> 10g 25g</p>  <p>1-Fluoro-2-iodobenzene CAS RN: 348-52-7</p>	<p><b>F0257</b> 25g</p>  <p>2-Fluorobenzyl Cyanide CAS RN: 326-62-5</p>	<p><b>F0259</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluorobenzyl Alcohol CAS RN: 446-51-5</p>	<p><b>F0265</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluorobiphenyl CAS RN: 321-60-8</p>
<p><b>F0273</b> 100mg 1g</p>  <p>2-Fluoro-L-phenylalanine CAS RN: 19883-78-4</p>	<p><b>F0278</b> 10g</p>  <p>2-Fluorobenzamide CAS RN: 445-28-3</p>	<p><b>F0290</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluorobenzotrichloride CAS RN: 488-98-2</p>	<p><b>F0291</b> 5g 25g</p>  <p>1-(2-Fluorophenyl)-piperazine Hydrochloride CAS RN: 1011-16-1</p>	<p><b>F0364</b> 5g 25g</p>  <p>2'-Fluoroacetophenone CAS RN: 445-27-2</p>

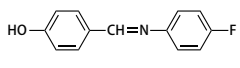
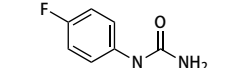
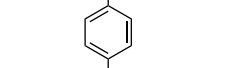
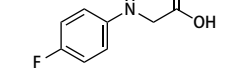
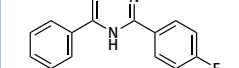
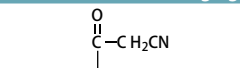


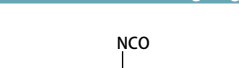


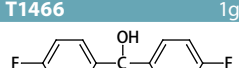
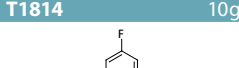
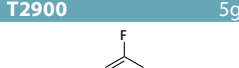




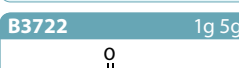
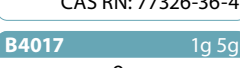

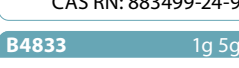
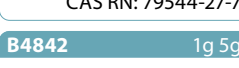
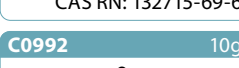
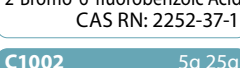
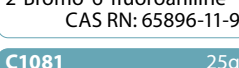
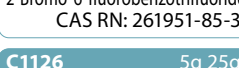
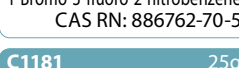
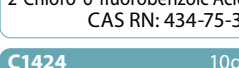
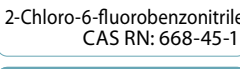
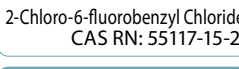
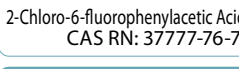
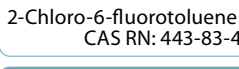
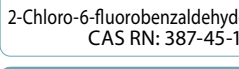
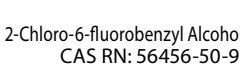
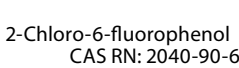
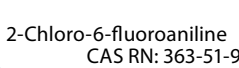
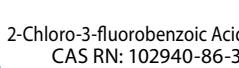
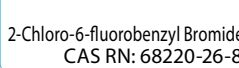
<b>F0368</b> 1g 5g  2-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride CAS RN: 2924-15-4	<b>F0375</b> 5g  m-(2-Fluorophenoxy)toluene CAS RN: 78850-78-9	<b>F0389</b> 5g 25g  2-Fluorobenzotrifluoride CAS RN: 392-85-8	<b>F0395</b> 5g 25g  Ethyl 2-Fluorobenzoate CAS RN: 443-26-5	<b>F0397</b> 5g  2-Fluorobenzophenone CAS RN: 342-24-5
<b>F0407</b> 1g 5g 25g  2-Fluorophenylboronic Acid CAS RN: 1993-03-9	<b>F0419</b> 5g 25g  2-Fluorobenzenethiol CAS RN: 2557-78-0	<b>F0449</b> 25g  2-Fluoro-N-methylaniline CAS RN: 1978-38-7	<b>F0450</b> 5g 25g  2'-Fluoropropiophenone CAS RN: 446-22-0	<b>F0524</b> 25g  2'-Fluoroacetanilide CAS RN: 399-31-5
<b>F0531</b> 1g  2-(2-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane CAS RN: 346656-39-1	<b>F0538</b> 5g 25g  2-Fluorobenzylamine CAS RN: 89-99-6	<b>F0557</b> 5g 25g  2-Fluorobenzenesulfonamide CAS RN: 30058-40-3	<b>F0565</b> 5g 25g  2-Fluorothioanisole CAS RN: 655-20-9	<b>F0616</b> 5g 25g  2-Fluorobenzohydrazide CAS RN: 446-24-2
<b>F0711</b> 5g 25g  2-Fluorophenyl Isothiocyanate CAS RN: 38985-64-7	<b>F0728</b> 25g  1-(2-Fluorophenyl)piperazine CAS RN: 1011-15-0	<b>F0730</b> 5g 25g  2-Fluoro-DL-mandelic Acid CAS RN: 389-31-1	<b>F0778</b> 5g 25g  2-(2-Fluorophenyl)ethanol CAS RN: 50919-06-7	<b>F0795</b> 5g 25g  2-Fluorobenzenesulfonyl Chloride CAS RN: 2905-21-7
<b>F0823</b> 1g  2-Fluorophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 864230-02-4	<b>F0933</b> 5g 25g  2-Fluorophenethylamine CAS RN: 52721-69-4	<b>F0963</b> 200mg 1g  2'-Fluoroacetoacetanilide CAS RN: 5279-85-6	<b>F0970</b> 5g 25g  2-Fluorophenylacetone CAS RN: 2836-82-0	<b>F1074</b> 1g 5g  5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde CAS RN: 881674-56-2
<b>I0338</b> 5g 25g  2-Fluorophenyl Isocyanate CAS RN: 16744-98-2	<b>T2150</b> 5g 25g  1-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 2106-18-5	单取代(m-) 单氟苯 Monosubstituted (meta-) Monofluorobenzenes		<b>B0882</b> 25g 250g  3-Bromofluorobenzene CAS RN: 1073-06-9
<b>B2159</b> 5g  3-Fluorophenethyl Bromide CAS RN: 25017-13-4	<b>B3044</b> 1g 5g  Bis(3-fluorophenyl) Disulfide CAS RN: 63930-17-6	<b>B4367</b> 1g 5g  N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine CAS RN: 114873-01-7	<b>C0648</b> 25g  1-Chloro-3-fluorobenzene CAS RN: 625-98-9	<b>C2874</b> 1g 5g  3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline CAS RN: 202197-26-0
<b>C2875</b> 1g 5g  3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)nitrobenzene CAS RN: 443882-99-3	<b>C2786</b> 1g 5g  5-[4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]-6-quinazolyl]-furan-2-carboxaldehyde CAS RN: 231278-84-5	<b>C2965</b> 1g 5g  4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline CAS RN: 231278-20-9	<b>E0861</b> 25g  Ethyl 3-Fluorobenzoate CAS RN: 451-02-5	<b>F0040</b> 25mL 500mL  3-Fluorotoluene CAS RN: 352-70-5

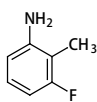
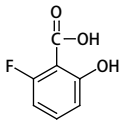
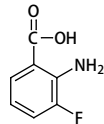
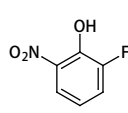
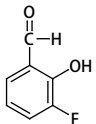
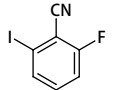
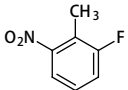
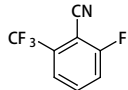
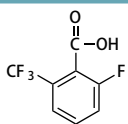
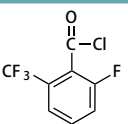
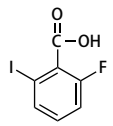
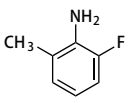
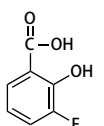
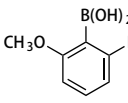
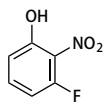
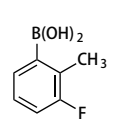
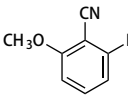
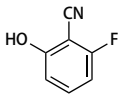
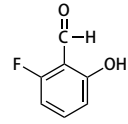
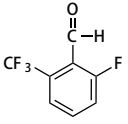
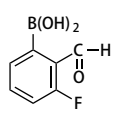
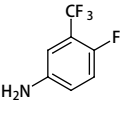
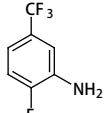
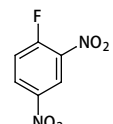
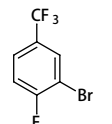
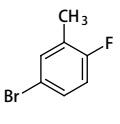
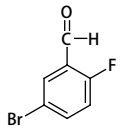
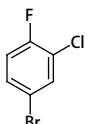
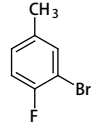
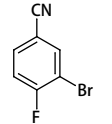
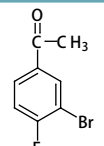
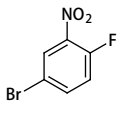
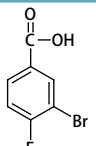
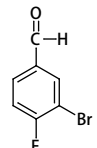
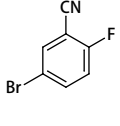
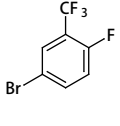
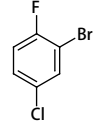
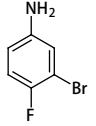
<p><b>F0101</b> 25g 250g</p>  <p>3-Fluoroaniline CAS RN: 372-19-0</p>	<p><b>F0110</b> 25g</p>  <p>3-Fluoronitrobenzene CAS RN: 402-67-5</p>	<p><b>F0158</b> 25g 250g</p>  <p>3-Fluorobenzoic Acid CAS RN: 455-38-9</p>	<p><b>F0159</b> 25mL 100mL</p>  <p>3-Fluorophenol CAS RN: 372-20-3</p>	<p><b>F0169</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-DL-phenylalanine CAS RN: 456-88-2</p>	
<p><b>F0189</b> 5mL 25mL</p>  <p>3-Fluorobenzaldehyde CAS RN: 456-48-4</p>	<p><b>F0208</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorobenzyl Bromide CAS RN: 456-41-7</p>	<p><b>F0210</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorobenzyl Chloride CAS RN: 456-42-8</p>	<p><b>F0216</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorophenylacetic Acid CAS RN: 331-25-9</p>	<p><b>F0219</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorobenzonitrile CAS RN: 403-54-3</p>	
<p><b>F0254</b> 10g 25g</p>  <p>3-Fluoroanisole CAS RN: 456-49-5</p>	<p><b>F0256</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorobenzyl Cyanide CAS RN: 501-00-8</p>	<p><b>F0260</b> 25g</p>  <p>1-Fluoro-3-iodobenzene CAS RN: 1121-86-4</p>	<p><b>F0262</b> 5g 25g</p>  <p>3'-Fluoroacetophenone CAS RN: 455-36-7</p>	<p><b>F0264</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorocinnamic Acid CAS RN: 458-46-8</p>	
<p><b>F0266</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorobenzamide CAS RN: 455-37-8</p>	<p><b>F0272</b> 100mg</p>  <p>3-Fluoro-L-phenylalanine CAS RN: 19883-77-3</p>	<p><b>F0277</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorobenzoyl Chloride CAS RN: 1711-07-5</p>	<p><b>F0302</b> 25g</p>  <p>3'-Fluoroacetanilide CAS RN: 351-28-0</p>	<p><b>F0370</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorobenzyl Alcohol CAS RN: 456-47-3</p>	
<p><b>F0404</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorophenylboronic Acid CAS RN: 768-35-4</p>	<p><b>F0409</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluorostyrene CAS RN: 350-51-6</p>	<p><b>F0422</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorobenzenethiol CAS RN: 2557-77-9</p>	<p><b>F0539</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorobenzylamine CAS RN: 100-82-3</p>	<p><b>F0582</b> 5g</p>  <p>3-Fluorothioanisole CAS RN: 658-28-6</p>	
<p><b>F0643</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorophenyl Isothiocyanate CAS RN: 404-72-8</p>	<p><b>F0776</b> 1g 5g</p>  <p>2-(3-Fluorophenyl)ethanol CAS RN: 52059-53-7</p>	<p><b>F0779</b> 1g 5g</p>  <p>3-(3-Fluorophenyl)propionic Acid CAS RN: 458-45-7</p>	<p><b>F0790</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorobenzenesulfonyl Chloride CAS RN: 701-27-9</p>	<p><b>F0800</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorophenyl Acetate CAS RN: 701-83-7</p>	
<p><b>F0805</b> 1g</p>  <p>3-Fluoro-N-methyl-benzylamine CAS RN: 90389-84-7</p>	<p><b>F0873</b> 5g 25g</p>  <p>3'-Fluoropropiophenone CAS RN: 455-67-4</p>	<p><b>F0930</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluorophenethylamine CAS RN: 404-70-6</p>	<p><b>F0943</b> 1g 5g</p>  <p>4-(3-Fluorobenzoyloxy)-benzaldehyde CAS RN: 66742-57-2</p>	<p><b>I0554</b> 5g</p>  <p>3-Fluorophenyl Isocyanate CAS RN: 404-71-7</p>	
<p><b>M2536</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl 3-Fluorophenylacetate CAS RN: 64123-77-9</p>	<p>单取代(p-) 单氟苯 Monosubstituted (para-) Monofluorobenzenes</p>		<p><b>A1429</b> 5g</p>  <p>4-Fluorophenyl Acetate CAS RN: 405-51-6</p>	<p><b>A2430</b> 1g</p>  <p>3-Amino-3-(4-fluorophenyl)-propionic Acid CAS RN: 325-89-3</p>	<p><b>A2760</b> 1g 5g</p>  <p>2-Amino-4'-fluorobenzophenone CAS RN: 3800-06-4</p>

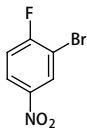
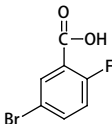
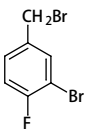
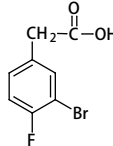
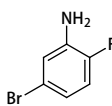
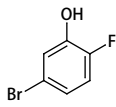
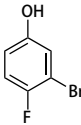
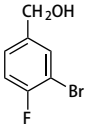
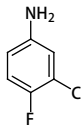
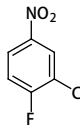
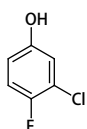
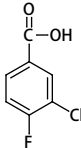
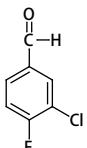
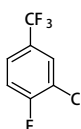
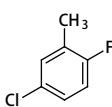
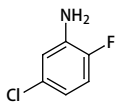
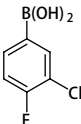
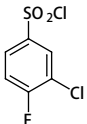
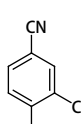
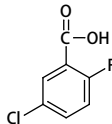
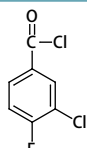
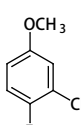
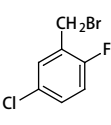
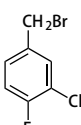
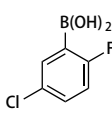
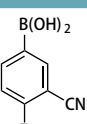
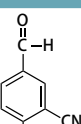
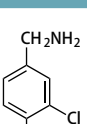
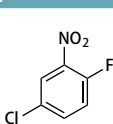
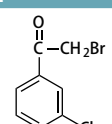
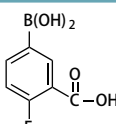
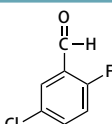
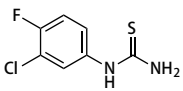
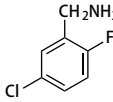
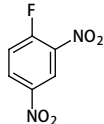
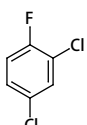
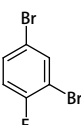
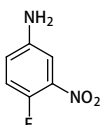
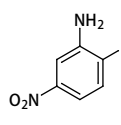
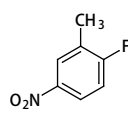
<b>B0875</b> 10g  Terephthalbis(4-fluoroaniline) CAS RN: 17866-84-1	<b>B0884</b> 25g 100g 500g  4-Bromofluorobenzene CAS RN: 460-00-4	<b>B2282</b> 5g 25g  2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)- cyclohexanone CAS RN: 62085-74-9	<b>B2283</b> 5g 25g  <i>trans,trans</i> -1,5-Bis(4-fluorophenyl)- 1,4-pentadien-3-one CAS RN: 53369-00-9	<b>B2382</b> 5g 25g  4-Fluorophenacyl Bromide CAS RN: 403-29-2
<b>B2648</b> 1g 5g  Bis(4-fluorophenyl) Ether CAS RN: 330-93-8	<b>B2764</b> 5g 25g  1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]- piperazine CAS RN: 27469-60-9	<b>B3213</b> 25g  Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone CAS RN: 347-84-2	<b>B3303</b> 1g 5g  <i>N</i> -( <i>tert</i> -Butoxycarbonyl)- 4-fluoro- <i>D</i> -phenylalanine CAS RN: 57292-45-2	<b>B3304</b> 1g 5g  <i>N</i> -( <i>tert</i> -Butoxycarbonyl)- 4-fluoro- <i>L</i> -phenylalanine CAS RN: 41153-30-4
<b>B3690</b> 1g 5g  Atorvastatin Acetonide <i>tert</i> -Butyl Ester CAS RN: 125971-95-1	<b>B4301</b> 5g 25g  4'-(Benzyloxy)benzylidene- 4-fluoroaniline CAS RN: 70627-52-0	<b>B4376</b> 5g 25g  $\beta$ -Bromo-4-fluorophenetole CAS RN: 332-48-9	<b>B4517</b> 1g 5g  1,3-Bis(4-fluorophenyl)urea CAS RN: 370-22-9	<b>C0659</b> 25g  1-Chloro-4-fluorobenzene CAS RN: 352-33-0
<b>C1294</b> 25g  4-Chloro-4'-fluorobutylphenone CAS RN: 3874-54-2	<b>C1570</b> 5g 25g  3-Chloro-4'-fluoropropiophenone CAS RN: 347-93-3	<b>C1860</b> 5g 25g  2-Chloro-4'-fluorobenzophenone CAS RN: 1806-23-1	<b>C1977</b> 5g 25g  2-Chloro-4'-fluoroacetophenone CAS RN: 456-04-2	<b>C2850</b> 5g 25g  2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)- benzimidazole CAS RN: 84946-20-3
<b>C2908</b> 1g 5g  2-(3-Chloropropyl)-2-(4- fluorophenyl)-1,3-dioxolane CAS RN: 3308-94-9	<b>D0537</b> 10g 25g 250g  Bis(4-fluorophenyl) Sulfone CAS RN: 383-29-9	<b>D1795</b> 25g  4,4'-Difluorobenzhydrol CAS RN: 365-24-2	<b>D1796</b> 5g 25g  2,4'-Difluorobenzophenone CAS RN: 342-25-6	<b>D1797</b> 25g 100g 500g  4,4'-Difluorobenzophenone CAS RN: 345-92-6
<b>D1925</b> 25g  4,4'-Difluorodiphenylmethane CAS RN: 457-68-1	<b>D2181</b> 1g 5g  4,4'-Difluorobiphenyl CAS RN: 398-23-2	<b>D2292</b> 5g  4,4'-Difluorobenzil CAS RN: 579-39-5	<b>D2884</b> 5g  4,4'-Difluorochalcone CAS RN: 2805-56-3	<b>D3324</b> 5g 25g  Diethyl (4-Fluorobenzyl)- phosphonate CAS RN: 63909-58-0
<b>D4138</b> 5g 25g  4,4'-Difluorobenzhydyl Chloride CAS RN: 27064-94-4	<b>F0033</b> 25mL  4-Fluoroaniline CAS RN: 371-40-4	<b>F0041</b> 25mL 500mL  4-Fluorotoluene CAS RN: 352-32-9	<b>F0191</b> 25mL 250mL  4-Fluorobenzaldehyde CAS RN: 459-57-4	<b>F0106</b> 1g  4-Fluoro- <i>DL</i> -phenylalanine CAS RN: 51-65-0
<b>F0112</b> 25g  4-Fluorobenzoic Acid CAS RN: 456-22-4	<b>F0160</b> 25g 500g  4-Fluorophenol CAS RN: 371-41-5	<b>F0161</b> 5g 25g  4-Fluorobenzophenone CAS RN: 345-83-5	<b>F0175</b> 1g 5g  4-Fluoro- <i>N,N</i> -dimethylaniline CAS RN: 403-46-3	

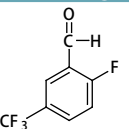
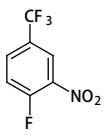
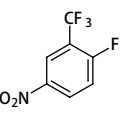
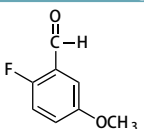
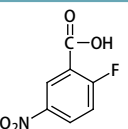
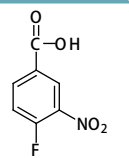
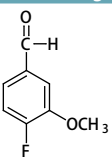
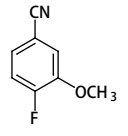
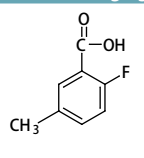
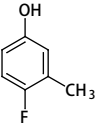
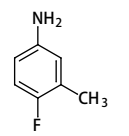
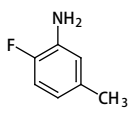
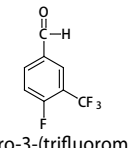
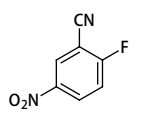
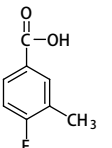
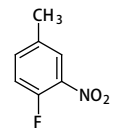
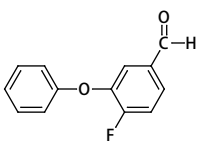
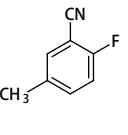
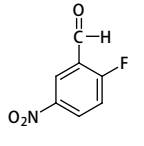
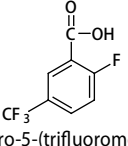
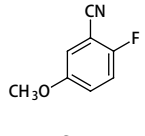
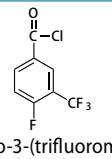
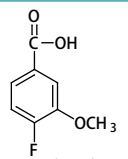
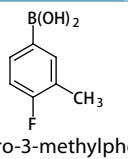
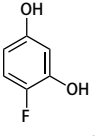
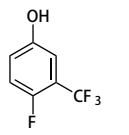
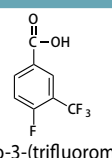
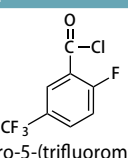
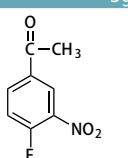
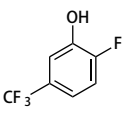
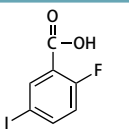
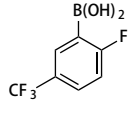
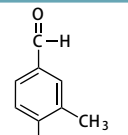
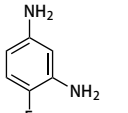
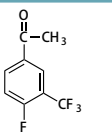
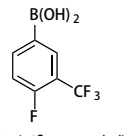
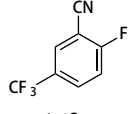
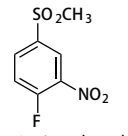
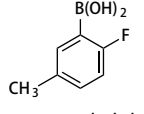
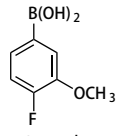
<p><b>F0202</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride CAS RN: 349-88-2</p>	<p><b>F0203</b> 25g</p>  <p>Ethyl 4-Fluorobenzoate CAS RN: 451-46-7</p>	<p><b>F0204</b> 25g 500g</p>  <p>4-Fluorobenzyl Chloride CAS RN: 352-11-4</p>	<p><b>F0206</b> 5g 25g 250g</p>  <p>4-Fluorophenylacetic Acid CAS RN: 405-50-5</p>	<p><b>F0213</b> 25g 100g 500g</p>  <p>4-Fluorobenzoyl Chloride CAS RN: 403-43-0</p>
<p><b>F0214</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorobenzyl Bromide CAS RN: 459-46-1</p>	<p><b>F0221</b> 25g 100g 500g</p>  <p>4-Fluorobenzonitrile CAS RN: 1194-02-1</p>	<p><b>F0231</b> 25g 500g</p>  <p>4-Fluoroanisole CAS RN: 459-60-9</p>	<p><b>F0237</b> 5g 25g</p>  <p>1-Fluoro-4-iodobenzene CAS RN: 352-34-1</p>	<p><b>F0242</b> 10g</p>  <p>2-(4-Fluorophenyl)-2-propanol CAS RN: 402-41-5</p>
<p><b>F0243</b> 1g 5g</p>  <p>3-(4-Fluorophenoxy)benzyl Bromide CAS RN: 65295-58-1</p>	<p><b>F0244</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorocinnamic Acid CAS RN: 459-32-5</p>	<p><b>F0246</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride CAS RN: 823-85-8</p>	<p><b>F0250</b> 5mL 25mL</p>  <p>4-Fluoro-<math>\alpha</math>-methylstyrene CAS RN: 350-40-3</p>	<p><b>F0251</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorobenzyl Alcohol CAS RN: 459-56-3</p>
<p><b>F0252</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorobenzylamine CAS RN: 140-75-0</p>	<p><b>F0258</b> 25g 250g</p>  <p>4-Fluorobenzyl Cyanide CAS RN: 459-22-3</p>	<p><b>F0261</b> 25g 500g</p>  <p>4'-Fluoroacetophenone CAS RN: 403-42-9</p>	<p><b>F0269</b> 10g</p>  <p>4-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone CAS RN: 25913-05-7</p>	<p><b>F0274</b> 100mg</p>  <p>4-Fluoro-L-phenylalanine CAS RN: 1132-68-9</p>
<p><b>F0279</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorobenzamide CAS RN: 824-75-9</p>	<p><b>F0288</b> 25g</p>  <p>1-(4-Fluorophenyl)piperazine Dihydrochloride CAS RN: 64090-19-3</p>	<p><b>F0315</b> 25g</p>  <p>4-Fluorobenzal Chloride CAS RN: 456-19-9</p>	<p><b>F0361</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorophenylboronic Acid CAS RN: 1765-93-1</p>	<p><b>F0365</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluorophenyl Chlorothionoformate CAS RN: 42908-73-6</p>
<p><b>F0374</b> 5g</p>  <p><i>m</i>-(4-Fluorophenoxy)toluene CAS RN: 1514-26-7</p>	<p><b>F0379</b> 5g 25g</p>  <p>3-(4-Fluorobenzoyl)propionic Acid CAS RN: 366-77-8</p>	<p><b>F0393</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorobenzenethiol CAS RN: 371-42-6</p>	<p><b>F0403</b> 25g 500g</p>  <p>Methyl 4-Fluorobenzoate CAS RN: 403-33-8</p>	<p><b>F0410</b> 5g</p>  <p>5-(4-Fluorophenoxy)valeric Acid CAS RN: 347867-75-8</p>
<p><b>F0423</b> 1g</p>  <p>4-(4-Fluorophenylethynyl)phenol CAS RN: 197770-48-2</p>	<p><b>F0425</b> 25g</p>  <p>4'-Fluorochalcone CAS RN: 399-10-0</p>	<p><b>F0427</b> 5g</p>  <p>2-(4-Fluorophenyl)indole CAS RN: 782-17-2</p>	<p><b>F0431</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluorophenethyl Bromide CAS RN: 332-42-3</p>	<p><b>F0432</b> 5g 25g</p>  <p>1-(4-Fluorophenyl)ethanol CAS RN: 403-41-8</p>
<p><b>F0435</b> 1g 5g 25g</p>  <p>Ethyl (4-Fluorobenzoyl)acetate CAS RN: 1999-00-4</p>	<p><b>F0459</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorochalcone CAS RN: 1608-51-1</p>	<p><b>F0460</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluoro-4'-methylchalcone CAS RN: 13565-38-3</p>	<p><b>F0461</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorostyrene CAS RN: 405-99-2</p>	<p><b>F0470</b> 1g 5g</p>  <p>1-Ethynyl-4-fluorobenzene CAS RN: 766-98-3</p>

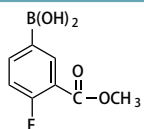
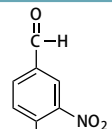
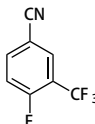
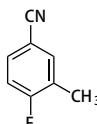
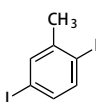
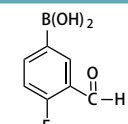
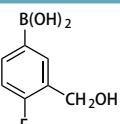
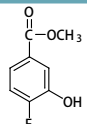
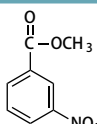
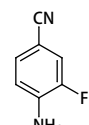
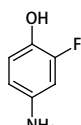
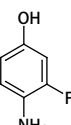
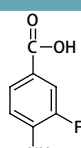
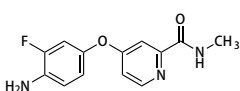
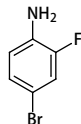
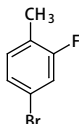
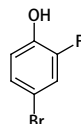
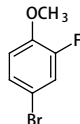
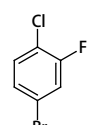
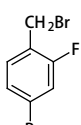
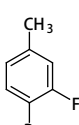
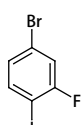
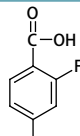
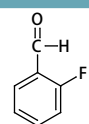
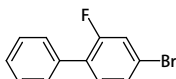
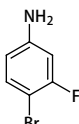
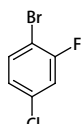
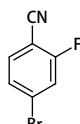
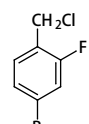
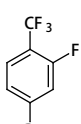
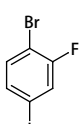
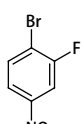
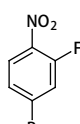
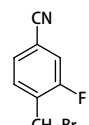
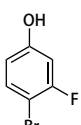
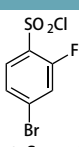
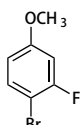
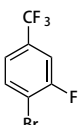
<b>F0472</b> 1g 5g  Methyl 4-Fluorobenzoylacetate CAS RN: 63131-29-3	<b>F0476</b> 1g 5g  4-(4-Fluorobenzoyl)butyric Acid CAS RN: 149437-76-3	<b>F0478</b> 1g  4-Fluorophenethyl Chloride CAS RN: 332-43-4	<b>F0482</b> 1g 5g  4-Fluorobiphenyl CAS RN: 324-74-3	<b>F0521</b> 25g  4'-Fluoroacetanilide CAS RN: 351-83-7
<b>F0522</b> 5g 25g  4'-Fluoropropiophenone CAS RN: 456-03-1	<b>F0532</b> 1g 5g  4-(4-Fluorophenoxy)benzotrile CAS RN: 215589-24-5	<b>F0535</b> 5g 25g  (4-Fluorophenyl)acetone CAS RN: 459-03-0	<b>F0537</b> 1g 5g  4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde CAS RN: 137736-06-2	<b>F0540</b> 5g 25g  4-Fluorobenzohydrazide CAS RN: 456-06-4
<b>F0546</b> 1g 5g  4'-Fluoroformanilide CAS RN: 459-25-6	<b>F0566</b> 25g  4-Fluorothioanisole CAS RN: 371-15-3	<b>F0568</b> 5g 25g  4-Fluorodiphenylmethane CAS RN: 587-79-1	<b>F0612</b> 5g  4-Fluorobenzyl Mercaptan CAS RN: 15894-04-9	<b>F0624</b> 5g  2-(4-Fluorophenyl)ethanol CAS RN: 7589-27-7
<b>F0630</b> 1g 5g  4-Fluorodiphenylamine CAS RN: 330-83-6	<b>F0644</b> 5g 25g  4-Fluorophenyl Isothiocyanate CAS RN: 1544-68-9	<b>F0651</b> 5g 25g  4-Fluorophenyl Methyl Sulfone CAS RN: 455-15-2	<b>F0655</b> 5g  4-Fluorophenetole CAS RN: 459-26-7	<b>F0673</b> 250g  4-Fluorophenylmagnesium Bromide (ca. 19% in Tetrahydrofuran, ca. 1.0mol/L) CAS RN: 352-13-6
<b>F0704</b> 5g  4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl CAS RN: 324-94-7	<b>F0722</b> 5g 25g  4-Fluorocinnamaldehyde CAS RN: 24654-55-5	<b>F0724</b> 1g 5g  2-(4-Fluorophenyl)thiophene CAS RN: 58861-48-6	<b>F0743</b> 5g 25g  3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole CAS RN: 93957-49-4	<b>F0802</b> 1g 5g  3-(4-Fluorophenyl)propionic Acid CAS RN: 459-31-4
<b>F0819</b> 5g 25g  (E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein CAS RN: 93957-50-7	<b>F0829</b> 5g 25g  2-(4-Fluorophenyl)ethylamine CAS RN: 1583-88-6	<b>F0836</b> 5g 25g  (4-Fluorophenyl)thiourea CAS RN: 459-05-2	<b>F0862</b> 1g 5g  4-Fluoro-L-2-phenylglycine CAS RN: 19883-57-9	<b>F0863</b> 1g 5g  4-Fluoro-D-2-phenylglycine CAS RN: 93939-74-3
<b>F0878</b> 5g 25g  (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol CAS RN: 105812-81-5	<b>F0879</b> 1g  1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile CAS RN: 64169-67-1	<b>F0867</b> 5g 25g  4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methanesulfonyl-amino)-5-pyrimidinecarboxaldehyde CAS RN: 147118-37-4	<b>F0891</b> 1g 5g  N-(4-Fluorobenzylidene)aniline CAS RN: 5676-81-3	
<b>F0892</b> 1g 5g  4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline CAS RN: 39769-09-0	<b>F0893</b> 1g 5g  4-Fluoro-N-salicylideneaniline CAS RN: 3382-62-5	<b>F0901</b> 1g 5g  4-Fluoro-D-phenylalanine CAS RN: 18125-46-7	<b>F0902</b> 1g 5g  Fmoc-Phe(4-F)-OH CAS RN: 169243-86-1	<b>F0907</b> 5g 25g  4-Fluoro-DL-mandelic Acid CAS RN: 395-33-5

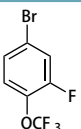
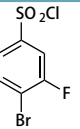
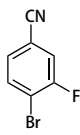
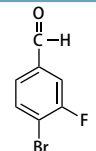
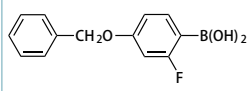
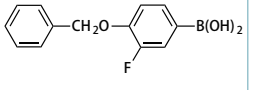
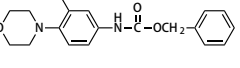
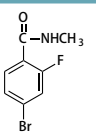
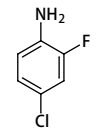
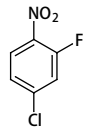
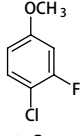
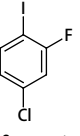
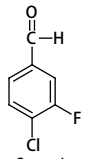
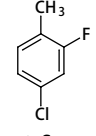
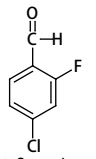
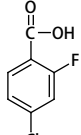
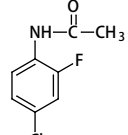
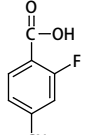
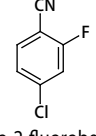
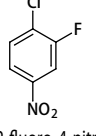
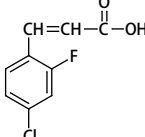
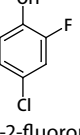
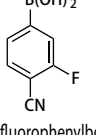
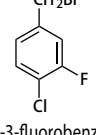
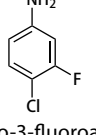
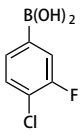
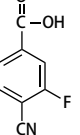
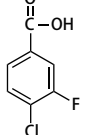
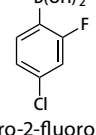
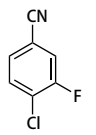
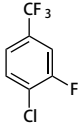
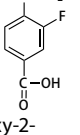
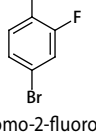
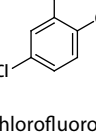
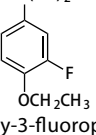
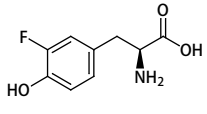
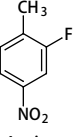
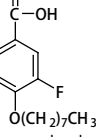
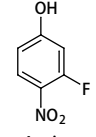
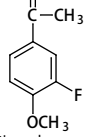
<p><b>F0946</b> 5g 25g</p>  <p>4-[[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol CAS RN: 3382-63-6</p>	<p><b>F0950</b> 1g 5g</p>  <p>(4-Fluorophenyl)urea CAS RN: 659-30-3</p>	<p><b>F0953</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorobenzenesulfonamide CAS RN: 402-46-0</p>	<p><b>F0960</b> 1g 5g</p>  <p>N-(4-Fluorophenyl)glycine CAS RN: 351-95-1</p>	<p><b>F0968</b> 200mg</p>  <p>2-(4-Fluorophenyl)-4,5-diphenylimidazole CAS RN: 2284-96-0</p>
<p><b>F0987</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluorobenzoylacetonitrile CAS RN: 4640-67-9</p>	<p><b>F0989</b> 200mg 1g</p>  <p>4-Fluorobenzil CAS RN: 3834-66-0</p>	<p><b>F1023</b> 1g 5g</p>  <p>3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylic Acid CAS RN: 1736-21-6</p>	<p><b>I0339</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorophenyl Isocyanate CAS RN: 1195-45-5</p>	<p><b>P2111</b> 5g 25g</p>  <p>(S)-4-Phenyl-3-[5-(4-fluorophenyl)-5-oxopentany]-2-oxazolidinone CAS RN: 189028-93-1</p>
<p><b>T1465</b> 1g</p>  <p>4,4',4''-Trifluorotriptyl Bromide CAS RN: 200004-38-2</p>	<p><b>T1466</b> 1g</p>  <p>Tris(4-fluorophenyl)methanol CAS RN: 379-57-7</p>	<p><b>T1814</b> 10g</p>  <p>2,4,6-Tris(4-fluorophenyl)boroxin CAS RN: 448-59-9</p>	<p><b>T2900</b> 5g</p>  <p>Tris(4-fluorophenyl)phosphine CAS RN: 18437-78-0</p>	<p>二取代(2,3-)单氟苯 Disubstituted (2,3-) Monofluorobenzenes</p>
<p><b>A2344</b> 5g 25g</p>  <p>2-Amino-6-fluorobenzonitrile CAS RN: 77326-36-4</p>	<p><b>B2392</b> 1g</p>  <p>2-Bromo-6-fluorotoluene CAS RN: 1422-54-4</p>	<p><b>B3119</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene CAS RN: 883499-24-9</p>	<p><b>B3183</b> 5g</p>  <p>2-Bromo-6-fluorobenzonitrile CAS RN: 79544-27-7</p>	<p><b>B3722</b> 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-3-fluorobenzoic Acid CAS RN: 132715-69-6</p>
<p><b>B4017</b> 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-6-fluorobenzoic Acid CAS RN: 2252-37-1</p>	<p><b>B4803</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-6-fluoroaniline CAS RN: 65896-11-9</p>	<p><b>B4833</b> 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 261951-85-3</p>	<p><b>B4842</b> 1g 5g</p>  <p>1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene CAS RN: 886762-70-5</p>	<p><b>C0992</b> 10g</p>  <p>2-Chloro-6-fluorobenzoic Acid CAS RN: 434-75-3</p>
<p><b>C1002</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-6-fluorobenzonitrile CAS RN: 668-45-1</p>	<p><b>C1081</b> 25g</p>  <p>2-Chloro-6-fluorobenzyl Chloride CAS RN: 55117-15-2</p>	<p><b>C1126</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-6-fluorophenylacetic Acid CAS RN: 37777-76-7</p>	<p><b>C1181</b> 25g</p>  <p>2-Chloro-6-fluorotoluene CAS RN: 443-83-4</p>	<p><b>C1424</b> 10g</p>  <p>2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde CAS RN: 387-45-1</p>
<p><b>C1638</b> 25g</p>  <p>2-Chloro-6-fluorobenzyl Alcohol CAS RN: 56456-50-9</p>	<p><b>C2049</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-6-fluorophenol CAS RN: 2040-90-6</p>	<p><b>C2126</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-6-fluoroaniline CAS RN: 363-51-9</p>	<p><b>C2128</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-3-fluorobenzoic Acid CAS RN: 102940-86-3</p>	<p><b>C2308</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-6-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 68220-26-8</p>
<p><b>E1038</b> 1g 5g</p>  <p>Ethyl 2-Chloro-6-fluorophenylacetate CAS RN: 214262-85-8</p>	<p><b>F0282</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluorocatechol CAS RN: 363-52-0</p>	<p><b>F0332</b> 5mL</p>  <p>3-Fluoro-o-xylene CAS RN: 443-82-3</p>	<p><b>F0353</b> 5g</p>  <p>3-Fluorophthalic Acid CAS RN: 1583-67-1</p>	<p><b>F0475</b> 1g 5g</p>  <p>6-Fluoroanthranilic Acid CAS RN: 434-76-4</p>

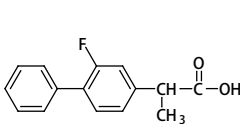
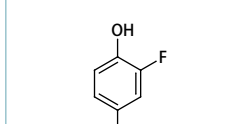
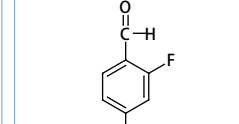
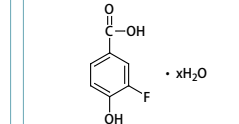
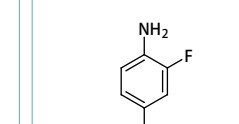
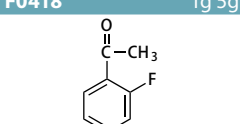
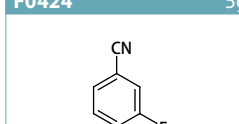
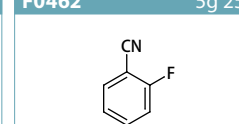
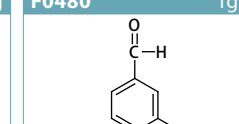
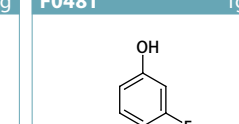
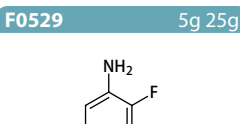
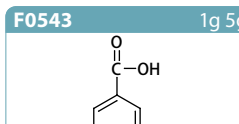
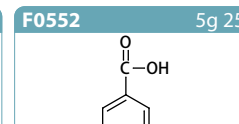
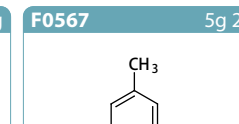
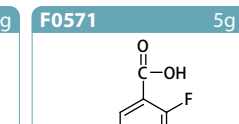
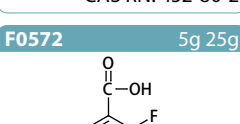
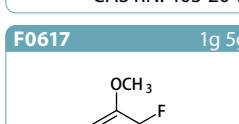
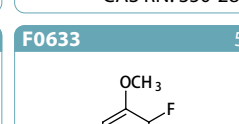
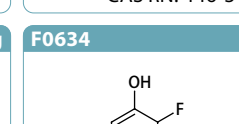
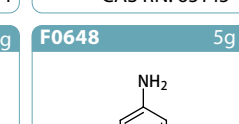
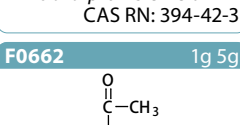
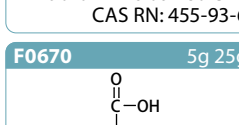
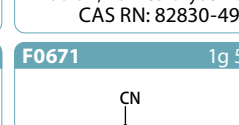
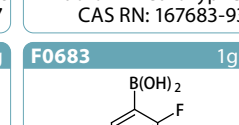
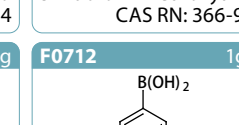
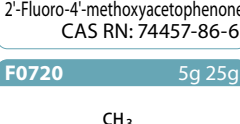
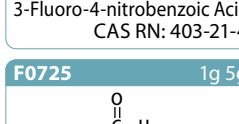
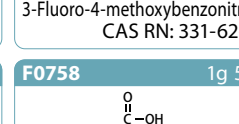
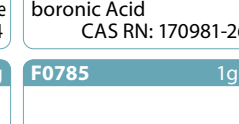
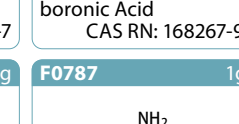
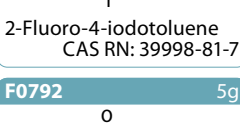
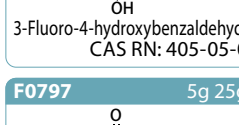
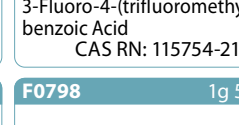
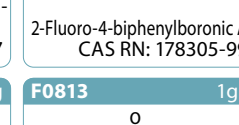
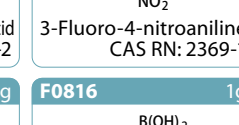
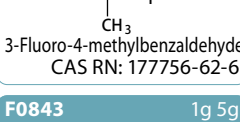
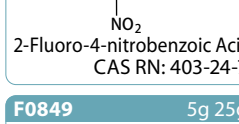
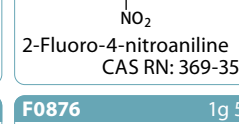
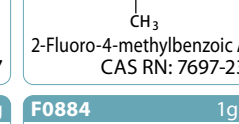
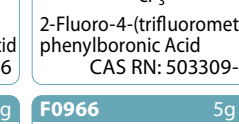
<b>F0526</b> 5g 25g  3-Fluoro-2-methylaniline CAS RN: 443-86-7	<b>F0553</b> 1g 5g  6-Fluorosalicylic Acid CAS RN: 67531-86-6	<b>F0570</b> 1g 5g  3-Fluoroanthranilic Acid CAS RN: 825-22-9	<b>F0623</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-nitrophenol CAS RN: 1526-17-6	<b>F0625</b> 1g 5g  3-Fluorosalicylaldehyde CAS RN: 394-50-3
<b>F0660</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-iodobenzonitrile CAS RN: 79544-29-9	<b>F0696</b> 5g 25g  2-Fluoro-6-nitrotoluene CAS RN: 769-10-8	<b>F0701</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-benzonitrile CAS RN: 133116-83-3	<b>F0757</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-benzoic Acid CAS RN: 32890-94-1	<b>F0765</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-benzoyl Chloride CAS RN: 109227-12-5
<b>F0796</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-iodobenzoic Acid CAS RN: 111771-08-5	<b>F0817</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-methylaniline CAS RN: 443-89-0	<b>F0845</b> 1g 5g  3-Fluorosalicylic Acid CAS RN: 341-27-5	<b>F0941</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic Acid CAS RN: 78495-63-3	<b>F0947</b> 1g 5g  3-Fluoro-2-nitrophenol CAS RN: 385-01-3
<b>F0955</b> 1g  3-Fluoro-2-methylphenylboronic Acid CAS RN: 163517-61-1	<b>F0969</b> 5g 25g  2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile CAS RN: 94088-46-7	<b>F0985</b> 1g 5g  2-Cyano-3-fluorophenol CAS RN: 140675-43-0	<b>F0988</b> 1g 5g  6-Fluorosalicylaldehyde CAS RN: 38226-10-7	<b>F1033</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 60611-24-7
<b>F1089</b> 1g 5g  3-Fluoro-2-formylphenylboronic Acid CAS RN: 871126-15-7	二取代(2,4)- 单氟苯 Disubstituted (2,4) Monofluorobenzenes		<b>A1164</b> 5g 25g  5-Amino-2-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 2357-47-3	<b>A1582</b> 5g 25g  3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 535-52-4
<b>A5512</b> 5g 25g  2,4-Dinitrofluorobenzene CAS RN: 70-34-8	<b>B1421</b> 1g 5g 25g  3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 68322-84-9	<b>B1679</b> 25g  5-Bromo-2-fluorotoluene CAS RN: 51437-00-4	<b>B1789</b> 5g 25g  5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde CAS RN: 93777-26-5	<b>B1860</b> 5g 25g  4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene CAS RN: 60811-21-4
<b>B1945</b> 5g  3-Bromo-4-fluorotoluene CAS RN: 452-62-0	<b>B1965</b> 5g 25g  3-Bromo-4-fluorobenzonitrile CAS RN: 79630-23-2	<b>B2014</b> 5g 25g  3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone CAS RN: 1007-15-4	<b>B2075</b> 1g 5g 25g  4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene CAS RN: 364-73-8	<b>B2133</b> 1g 5g  3-Bromo-4-fluorobenzoic Acid CAS RN: 1007-16-5
<b>B2143</b> 5g 25g  3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde CAS RN: 77771-02-9	<b>B2425</b> 5g 25g  5-Bromo-2-fluorobenzonitrile CAS RN: 179897-89-3	<b>B2872</b> 5g 25g  5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 393-37-3	<b>B2956</b> 5g 25g  2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene CAS RN: 1996-30-1	<b>B2957</b> 5g  3-Bromo-4-fluoroaniline CAS RN: 656-64-4

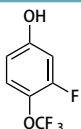
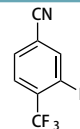
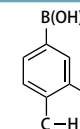
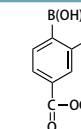
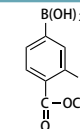
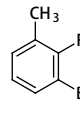
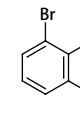
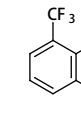
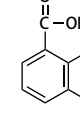
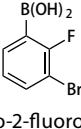
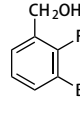
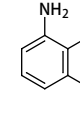
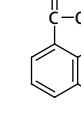
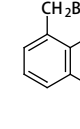
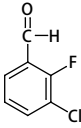
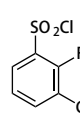
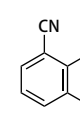
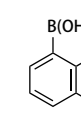
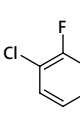
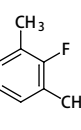
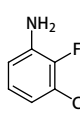
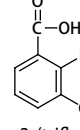
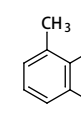
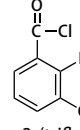
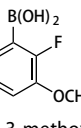
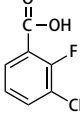
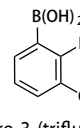
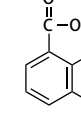
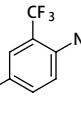
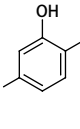
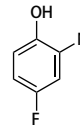
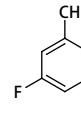
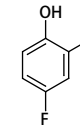
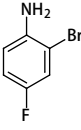
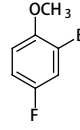
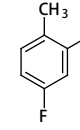
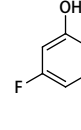
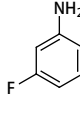
<p><b>B2958</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene CAS RN: 701-45-1</p>	<p><b>B2974</b> 1g 5g 25g</p>  <p>5-Bromo-2-fluorobenzoic Acid CAS RN: 146328-85-0</p>	<p><b>B2975</b> 5g 25g</p>  <p>3-Bromo-4-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 78239-71-1</p>	<p><b>B2976</b> 5g 25g</p>  <p>3-Bromo-4-fluorophenylacetic Acid CAS RN: 194019-11-9</p>	<p><b>B3043</b> 5g 25g</p>  <p>5-Bromo-2-fluoroaniline CAS RN: 2924-09-6</p>
<p><b>B3064</b> 5g 25g</p>  <p>5-Bromo-2-fluorophenol CAS RN: 112204-58-7</p>	<p><b>B4491</b> 5g 25g</p>  <p>3-Bromo-4-fluorophenol CAS RN: 27407-11-0</p>	<p><b>B4656</b> 5g 25g</p>  <p>3-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol CAS RN: 77771-03-0</p>	<p><b>C1024</b> 25g 500g</p>  <p>3-Chloro-4-fluoroaniline CAS RN: 367-21-5</p>	<p><b>C1041</b> 25g 250g</p>  <p>3-Chloro-4-fluoronitrobenzene CAS RN: 350-30-1</p>
<p><b>C1121</b> 10g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorophenol CAS RN: 2613-23-2</p>	<p><b>C1275</b> 5g 25g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorobenzoic Acid CAS RN: 403-16-7</p>	<p><b>C1498</b> 5g 25g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde CAS RN: 34328-61-5</p>	<p><b>C1515</b> 5g 25g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 78068-85-6</p>	<p><b>C1587</b> 5g</p>  <p>5-Chloro-2-fluorotoluene CAS RN: 452-66-4</p>
<p><b>C1596</b> 5g 25g</p>  <p>5-Chloro-2-fluoroaniline CAS RN: 2106-05-0</p>	<p><b>C1760</b> 1g 5g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 144432-85-9</p>	<p><b>C1772</b> 5g 25g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorobenzene-sulfonyl Chloride CAS RN: 91170-93-3</p>	<p><b>C2081</b> 5g 25g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorobenzonitrile CAS RN: 117482-84-5</p>	<p><b>C2094</b> 5g 25g</p>  <p>5-Chloro-2-fluorobenzoic Acid CAS RN: 394-30-9</p>
<p><b>C2122</b> 5g 25g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorobenzoyl Chloride CAS RN: 65055-17-6</p>	<p><b>C2217</b> 5g</p>  <p>3-Chloro-4-fluoroanisole CAS RN: 202925-07-3</p>	<p><b>C2360</b> 5g</p>  <p>5-Chloro-2-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 71916-91-1</p>	<p><b>C2482</b> 5g 25g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 192702-01-5</p>	<p><b>C2645</b> 5g</p>  <p>5-Chloro-2-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 352535-83-2</p>
<p><b>C2676</b> 1g</p>  <p>3-Cyano-4-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 214210-21-6</p>	<p><b>C2692</b> 1g 5g</p>  <p>3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde CAS RN: 218301-22-5</p>	<p><b>C2702</b> 1g 5g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorobenzylamine CAS RN: 72235-56-4</p>	<p><b>C2704</b> 5g 25g</p>  <p>5-Chloro-2-fluoronitrobenzene CAS RN: 345-18-6</p>	<p><b>C2752</b> 1g 5g</p>  <p>3-Chloro-4-fluorophenacyl Bromide CAS RN: 63529-30-6</p>
<p><b>C2945</b> 1g 5g</p>  <p>3-Carboxy-4-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 872460-12-3</p>	<p><b>C3114</b> 5g</p>  <p>5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde CAS RN: 96515-79-6</p>	<p><b>C3137</b> 1g 5g</p>  <p>(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea CAS RN: 154371-25-2</p>	<p><b>C3158</b> 1g 5g</p>  <p>5-Chloro-2-fluorobenzylamine CAS RN: 261723-26-6</p>	<p><b>D0835</b> 25g 500g</p>  <p>2,4-Dinitrofluorobenzene CAS RN: 70-34-8</p>
<p><b>D2059</b> 25g 500g</p>  <p>2,4-Dichlorofluorobenzene CAS RN: 1435-48-9</p>	<p><b>D3489</b> 5g 25g</p>  <p>2,4-Dibromo-1-fluorobenzene CAS RN: 1435-53-6</p>	<p><b>F0168</b> 25g</p>  <p>4-Fluoro-3-nitroaniline CAS RN: 364-76-1</p>	<p><b>F0267</b> 25g</p>  <p>2-Fluoro-5-nitroaniline CAS RN: 369-36-8</p>	<p><b>F0276</b> 10g 25g</p>  <p>2-Fluoro-5-nitrotoluene CAS RN: 455-88-9</p>

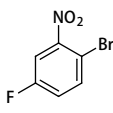
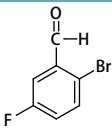
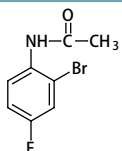
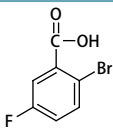
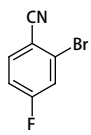
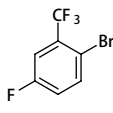
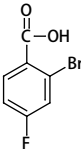
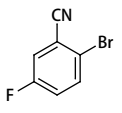
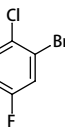
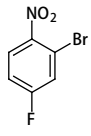
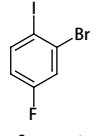
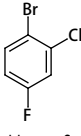
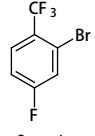
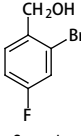
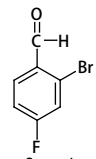
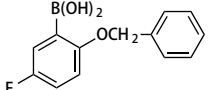
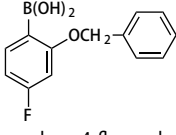
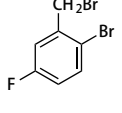
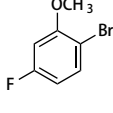
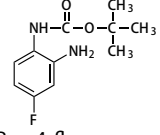
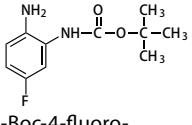
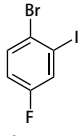
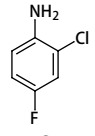
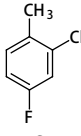
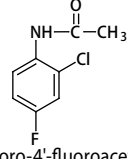
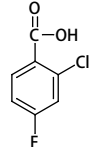
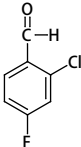
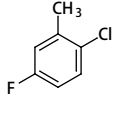
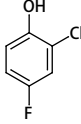
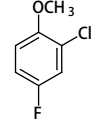
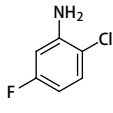
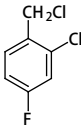
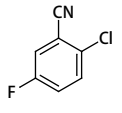
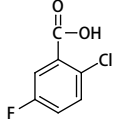
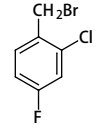
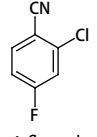
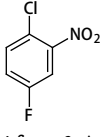
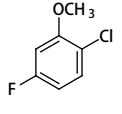
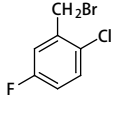
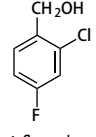
<b>F0289</b> 1g 5g 25g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-benzaldehyde CAS RN: 146137-78-2	<b>F0324</b> 25g 250g  4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride CAS RN: 367-86-2	<b>F0373</b> 5g 25g  2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride CAS RN: 400-74-8	<b>F0383</b> 5g 25g  6-Fluoro- <i>m</i> -anisaldehyde CAS RN: 105728-90-3	<b>F0391</b> 5g 25g  2-Fluoro-5-nitrobenzoic Acid CAS RN: 7304-32-7
<b>F0399</b> 5g 25g  4-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid CAS RN: 453-71-4	<b>F0401</b> 1g 5g 25g  4-Fluoro- <i>m</i> -anisaldehyde CAS RN: 128495-46-5	<b>F0408</b> 1g 5g  4-Fluoro-3-methoxybenzotrifluoride CAS RN: 243128-37-2	<b>F0426</b> 1g 5g 25g  6-Fluoro- <i>m</i> -toluic Acid CAS RN: 321-12-0	<b>F0429</b> 5g 25g  4-Fluoro- <i>m</i> -cresol CAS RN: 452-70-0
<b>F0527</b> 5g 25g  4-Fluoro-3-methylaniline CAS RN: 452-69-7	<b>F0528</b> 5g 25g  2-Fluoro-5-methylaniline CAS RN: 452-84-6	<b>F0545</b> 1g 5g 25g  4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-benzaldehyde CAS RN: 67515-60-0	<b>F0550</b> 5g 25g  2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride CAS RN: 17417-09-3	<b>F0560</b> 5g  4-Fluoro- <i>m</i> -toluic Acid CAS RN: 403-15-6
<b>F0562</b> 5g 25g  4-Fluoro-3-nitrotoluene CAS RN: 446-11-7	<b>F0564</b> 5g 25g  4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde CAS RN: 68359-57-9	<b>F0573</b> 5g  6-Fluoro- <i>m</i> -tolunitrile CAS RN: 64113-84-4	<b>F0618</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde CAS RN: 27996-87-8	<b>F0620</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-benzoic Acid CAS RN: 115029-23-7
<b>F0642</b> 1g 5g  3-Cyano-4-fluoroanisole CAS RN: 127667-01-0	<b>F0659</b> 1g 5g  4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-benzoyl Chloride CAS RN: 67515-56-4	<b>F0681</b> 1g 5g  4-Fluoro-3-methoxybenzoic Acid CAS RN: 82846-18-2	<b>F0697</b> 5g 25g  4-Fluoro-3-methylphenylboronic Acid CAS RN: 139911-27-6	<b>F0741</b> 1g  4-Fluororesorcinol CAS RN: 103068-41-3
<b>F0754</b> 5g 25g  4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol CAS RN: 61721-07-1	<b>F0760</b> 1g 5g  4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-benzoic Acid CAS RN: 67515-55-3	<b>F0764</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-benzoyl Chloride CAS RN: 207981-46-2	<b>F0777</b> 5g 25g  4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone CAS RN: 400-93-1	<b>F0780</b> 5g 25g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol CAS RN: 141483-15-0
<b>F0786</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-iodobenzoic Acid CAS RN: 124700-41-0	<b>F0788</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 352535-96-7	<b>F0791</b> 5g  4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde CAS RN: 135427-08-6	<b>F0794</b> 5g  4-Fluoro-1,3-phenylenediamine CAS RN: 6264-67-1	<b>F0808</b> 1g 5g  4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)-acetophenone CAS RN: 208173-24-4
<b>F0830</b> 1g 5g  4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid CAS RN: 182344-23-6	<b>F0860</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-benzotrifluoride CAS RN: 4088-84-0	<b>F0887</b> 1g 5g  4-Fluoro-3-nitrophenyl Methyl Sulfone CAS RN: 453-72-5	<b>F0915</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-methylphenylboronic Acid CAS RN: 166328-16-1	<b>F0919</b> 1g 5g  4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic Acid CAS RN: 854778-31-7

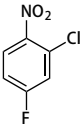
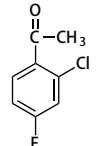
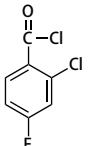
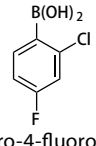
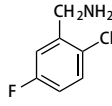
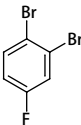
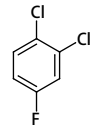
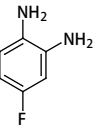
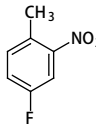
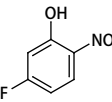
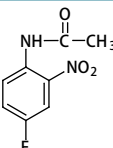
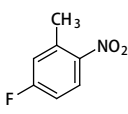
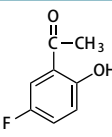
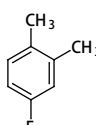
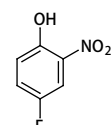
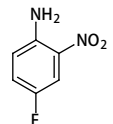
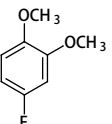
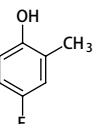
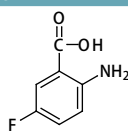
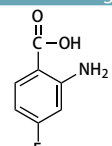
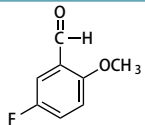
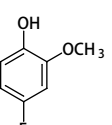
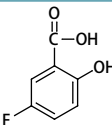
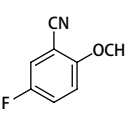
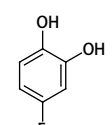
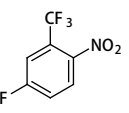
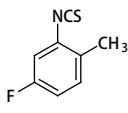
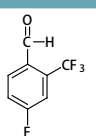
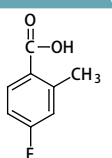
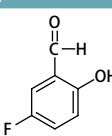
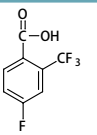
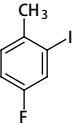
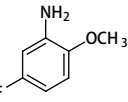
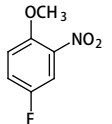
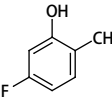
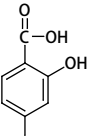
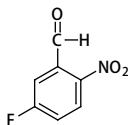
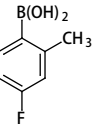
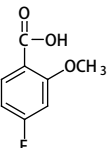
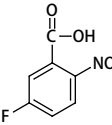
<p><b>F0951</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 874219-35-9</p>	<p><b>F0956</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde CAS RN: 42564-51-2</p>	<p><b>F0979</b> 5g 25g</p>  <p>5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 67515-59-7</p>	<p><b>F0986</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluoro-<i>m</i>-tolunitrile CAS RN: 185147-08-4</p>	<p><b>F1004</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluoro-5-iodotoluene CAS RN: 452-68-6</p>
<p><b>F1061</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-3-formylphenylboronic Acid CAS RN: 374538-01-9</p>	<p><b>F1090</b> 200mg 1g</p>  <p>4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 481681-02-1</p>	<p><b>M1919</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl 4-Fluoro-3-hydroxybenzoate CAS RN: 214822-96-5</p>	<p><b>M2535</b> 1g 5g</p>  <p>Methyl 4-Fluoro-3-nitrobenzoate CAS RN: 329-59-9</p>	<p>二取代(2,5)- 单氟苯 Disubstituted (2,5)- Monofluorobenzenes</p>
<p><b>A1965</b> 5g 25g</p>  <p>4-Cyano-2-fluoroaniline CAS RN: 63069-50-1</p>	<p><b>A2163</b> 1g 5g</p>  <p>4-Amino-2-fluorophenol CAS RN: 399-96-2</p>	<p><b>A2164</b> 1g 5g</p>  <p>4-Amino-3-fluorophenol CAS RN: 399-95-1</p>	<p><b>A2165</b> 1g 5g</p>  <p>4-Amino-3-fluorobenzoic Acid CAS RN: 455-87-8</p>	
<p><b>A2979</b> 200mg 1g</p>  <p>4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-<i>N</i>-methyl-2-pyridinecarboxamide CAS RN: 757251-39-1</p>	<p><b>B1314</b> 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluoroaniline CAS RN: 367-24-8</p>	<p><b>B1716</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluorotoluene CAS RN: 51436-99-8</p>	<p><b>B1835</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluorophenol CAS RN: 2105-94-4</p>	<p><b>B1855</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluoroanisole CAS RN: 2357-52-0</p>
<p><b>B1861</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene CAS RN: 60811-18-9</p>	<p><b>B1934</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 76283-09-5</p>	<p><b>B1935</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-3-fluorotoluene CAS RN: 452-74-4</p>	<p><b>B1947</b> 25g</p>  <p>1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene CAS RN: 105931-73-5</p>	<p><b>B1950</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid CAS RN: 112704-79-7</p>
<p><b>B2002</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde CAS RN: 57848-46-1</p>	<p><b>B2028</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluorobiphenyl CAS RN: 41604-19-7</p>	<p><b>B2102</b> 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-3-fluoroaniline CAS RN: 656-65-5</p>	<p><b>B2724</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene CAS RN: 1996-29-8</p>	<p><b>B2745</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluorobenzonitrile CAS RN: 105942-08-3</p>
<p><b>B2841</b> 5g</p>  <p>4-Bromo-2-fluorobenzyl Chloride CAS RN: 85510-82-3</p>	<p><b>B2946</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 142808-15-9</p>	<p><b>B3017</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene CAS RN: 136434-77-0</p>	<p><b>B3060</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene CAS RN: 185331-69-5</p>	<p><b>B3062</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluoro-1-nitrobenzene CAS RN: 321-23-3</p>
<p><b>B3204</b> 1g 5g 25g</p>  <p>4-Cyano-2-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 105942-09-4</p>	<p><b>B3688</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-3-fluorophenol CAS RN: 121219-03-2</p>	<p><b>B3698</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-2-fluorobenzene-sulfonyl Chloride CAS RN: 216159-03-4</p>	<p><b>B3743</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-3-fluoroanisole CAS RN: 458-50-4</p>	<p><b>B3783</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 40161-54-4</p>

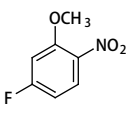
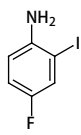
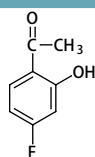
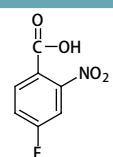
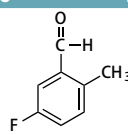
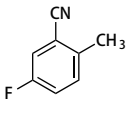
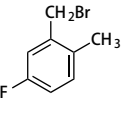
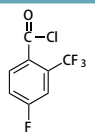
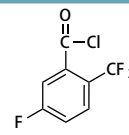
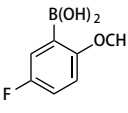
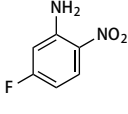
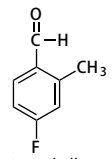
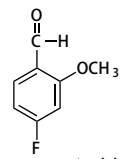
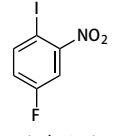
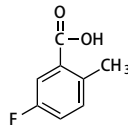
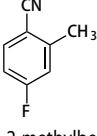
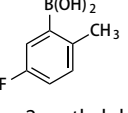
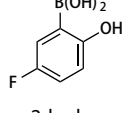
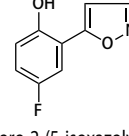
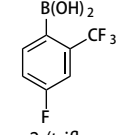
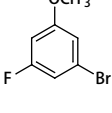
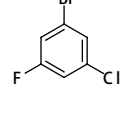
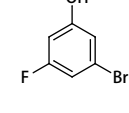
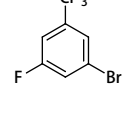
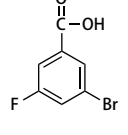
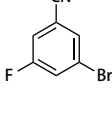
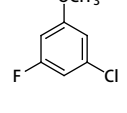
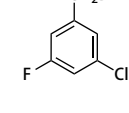
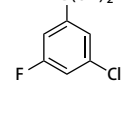
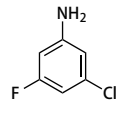
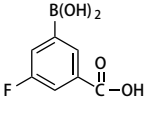
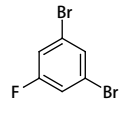
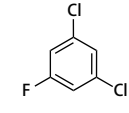
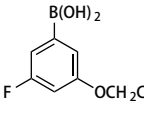
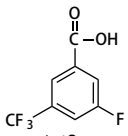
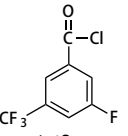
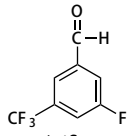
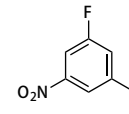
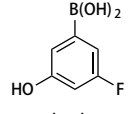
<b>B3808</b> 1g 5g  1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 105529-58-6	<b>B3835</b> 1g 5g  4-Bromo-3-fluorobenzene-sulfonyl Chloride CAS RN: 351003-51-5	<b>B4022</b> 5g 25g  4-Bromo-3-fluorobenzonitrile CAS RN: 133059-44-6	<b>B4319</b> 5g 25g  4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde CAS RN: 133059-43-5	<b>B4638</b> 200mg 1g  4-Benzyloxy-2-fluorophenyl-boronic Acid CAS RN: 166744-78-1
<b>B4639</b> 1g 5g  4-Benzyloxy-3-fluorophenyl-boronic Acid CAS RN: 133057-83-7	<b>B4810</b> 5g 25g  Benzyl (3-Fluoro-4-morpholinophenyl)carbamate CAS RN: 168828-81-7	<b>B5074</b> 1g 5g  4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide CAS RN: 749927-69-3	<b>C1169</b> 10g 25g  4-Chloro-2-fluoroaniline CAS RN: 57946-56-2	<b>C1261</b> 5g 25g  4-Chloro-2-fluoronitrobenzene CAS RN: 700-37-8
<b>C1273</b> 5g  4-Chloro-3-fluoroanisole CAS RN: 501-29-1	<b>C1499</b> 5g 25g  4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene CAS RN: 6797-79-1	<b>C1506</b> 1g 5g 25g  4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde CAS RN: 5527-95-7	<b>C1513</b> 25g 250g  4-Chloro-2-fluorotoluene CAS RN: 452-75-5	<b>C1597</b> 5g 25g  4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde CAS RN: 61072-56-8
<b>C1668</b> 1g 5g 25g  4-Chloro-2-fluorobenzoic Acid CAS RN: 446-30-0	<b>C1692</b> 5g 25g  4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide CAS RN: 59280-70-5	<b>C2051</b> 1g 5g  4-Cyano-2-fluorobenzoic Acid CAS RN: 164149-28-4	<b>C2121</b> 5g 25g  4-Chloro-2-fluorobenzonitrile CAS RN: 57381-51-8	<b>C2195</b> 5g 25g  1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene CAS RN: 350-31-2
<b>C2200</b> 5g  4-Chloro-2-fluorocinnamic Acid CAS RN: 202982-65-8	<b>C2264</b> 5g 25g  4-Chloro-2-fluorophenol CAS RN: 348-62-9	<b>C2456</b> 1g 5g  4-Cyano-3-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 843663-18-3	<b>C2484</b> 1g 5g  4-Chloro-3-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 206362-80-3	<b>C2512</b> 5g 25g  4-Chloro-3-fluoroaniline CAS RN: 367-22-6
<b>C2749</b> 1g 5g  4-Chloro-3-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 137504-86-0	<b>C2799</b> 1g 5g  4-Cyano-3-fluorobenzoic Acid CAS RN: 176508-81-9	<b>C2891</b> 5g  4-Chloro-3-fluorobenzoic Acid CAS RN: 403-17-8	<b>C3048</b> 1g 5g  4-Chloro-2-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 160591-91-3	<b>C3103</b> 1g 5g  4-Chloro-3-fluorobenzonitrile CAS RN: 110888-15-8
<b>C3216</b> 1g 5g  4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 32137-20-5	<b>C3220</b> 1g 5g  4-Carboxy-2-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 851335-07-4	<b>D2212</b> 25g  1,4-Dibromo-2-fluorobenzene CAS RN: 1435-52-5	<b>D2513</b> 5g 25g  2,5-Dichlorofluorobenzene CAS RN: 348-59-4	<b>E1124</b> 1g 5g  4-Ethoxy-3-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 279263-10-4
<b>F0201</b> 100mg  3-Fluoro-L-tyrosine CAS RN: 7423-96-3	<b>F0292</b> 5g 25g  2-Fluoro-4-nitrotoluene CAS RN: 1427-07-2	<b>F0337</b> 1g 5g  3-Fluoro-4-n-octyloxybenzoic Acid CAS RN: 326-78-3	<b>F0348</b> 5g 25g  3-Fluoro-4-nitrophenol CAS RN: 394-41-2	<b>F0366</b> 5g 25g  3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone CAS RN: 455-91-4

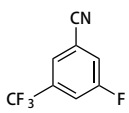
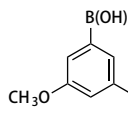
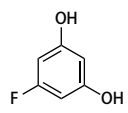
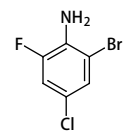
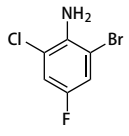
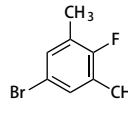
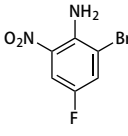
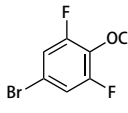
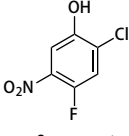
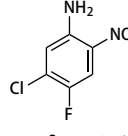
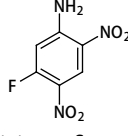
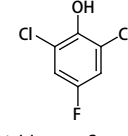
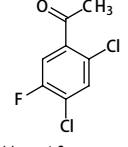
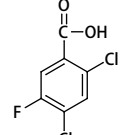
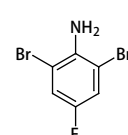
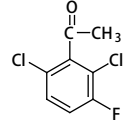
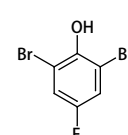
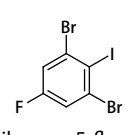
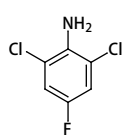
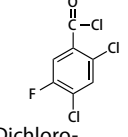
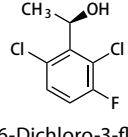
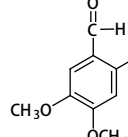
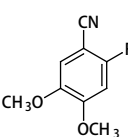
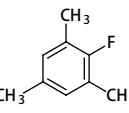
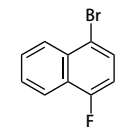
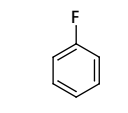
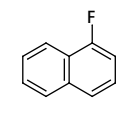
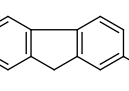
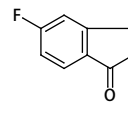
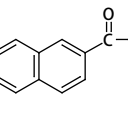
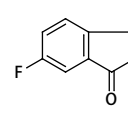
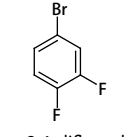
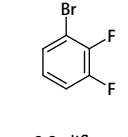
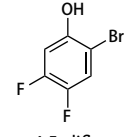
<p><b>F0371</b> 5g 25g</p>  <p>2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-propionic Acid CAS RN: 5104-49-4</p>	<p><b>F0381</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluoro-4-nitrophenol CAS RN: 403-19-0</p>	<p><b>F0386</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluoro-<i>p</i>-anisaldehyde CAS RN: 331-64-6</p>	<p><b>F0413</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-4-hydroxybenzoic Acid Hydrate CAS RN: 350-29-8</p>	<p><b>F0417</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluoro-4-iodoaniline CAS RN: 29632-74-4</p>
<p><b>F0418</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-4-hydroxyacetophenone CAS RN: 98619-07-9</p>	<p><b>F0424</b> 5g</p>  <p>3-Fluoro-<i>p</i>-tolunitrile CAS RN: 170572-49-3</p>	<p><b>F0462</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile CAS RN: 82380-18-5</p>	<p><b>F0480</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-<i>p</i>-anisaldehyde CAS RN: 351-54-2</p>	<p><b>F0481</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-<i>p</i>-cresol CAS RN: 452-78-8</p>
<p><b>F0529</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluoro-4-methylaniline CAS RN: 452-80-2</p>	<p><b>F0543</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-<i>p</i>-anisic Acid CAS RN: 403-20-3</p>	<p><b>F0552</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluoro-<i>p</i>-toluic Acid CAS RN: 350-28-7</p>	<p><b>F0567</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluoro-4-nitrotoluene CAS RN: 446-34-4</p>	<p><b>F0571</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluoro-4-hydroxybenzoic Acid CAS RN: 65145-13-3</p>
<p><b>F0572</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluoro-<i>p</i>-anisic Acid CAS RN: 394-42-3</p>	<p><b>F0617</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-4-nitroanisole CAS RN: 455-93-6</p>	<p><b>F0633</b> 5g</p>  <p>2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene CAS RN: 82830-49-7</p>	<p><b>F0634</b> 5g</p>  <p>2-Fluoro-4-methoxyphenol CAS RN: 167683-93-4</p>	<p><b>F0648</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluoro-4-methoxyaniline CAS RN: 366-99-4</p>
<p><b>F0662</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-4-methoxyacetophenone CAS RN: 74457-86-6</p>	<p><b>F0670</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluoro-4-nitrobenzoic Acid CAS RN: 403-21-4</p>	<p><b>F0671</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile CAS RN: 331-62-4</p>	<p><b>F0683</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-4-methylphenylboronic Acid CAS RN: 170981-26-7</p>	<p><b>F0712</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-4-methylphenylboronic Acid CAS RN: 168267-99-0</p>
<p><b>F0720</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluoro-4-iodotoluene CAS RN: 39998-81-7</p>	<p><b>F0725</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde CAS RN: 405-05-0</p>	<p><b>F0758</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 115754-21-7</p>	<p><b>F0785</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-4-biphenylboronic Acid CAS RN: 178305-99-2</p>	<p><b>F0787</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-4-nitroaniline CAS RN: 2369-13-3</p>
<p><b>F0792</b> 5g</p>  <p>3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde CAS RN: 177756-62-6</p>	<p><b>F0797</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluoro-4-nitrobenzoic Acid CAS RN: 403-24-7</p>	<p><b>F0798</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-4-nitroaniline CAS RN: 369-35-7</p>	<p><b>F0813</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-4-methylbenzoic Acid CAS RN: 7697-23-6</p>	<p><b>F0816</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid CAS RN: 503309-11-3</p>
<p><b>F0843</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-4-hydroxyacetophenone CAS RN: 403-14-5</p>	<p><b>F0849</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluoro-4-morpholinoaniline CAS RN: 93246-53-8</p>	<p><b>F0876</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic Acid CAS RN: 149507-26-6</p>	<p><b>F0884</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-4-methylbenzonitrile CAS RN: 85070-67-3</p>	<p><b>F0966</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluoro-4-methoxybenzyl Chloride CAS RN: 351-52-0</p>

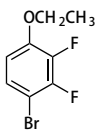
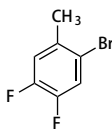
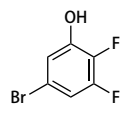
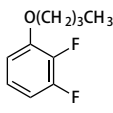
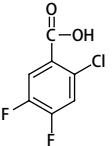
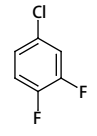
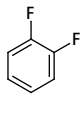
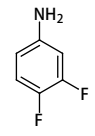
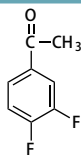
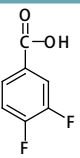
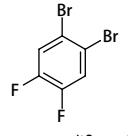
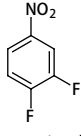
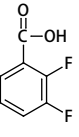
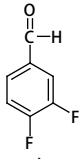
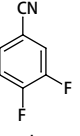
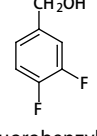
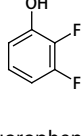
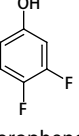
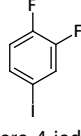
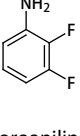
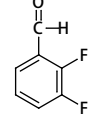
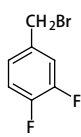
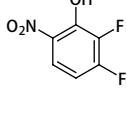
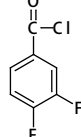
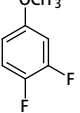
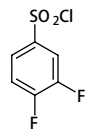
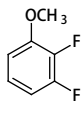
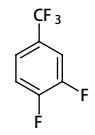
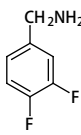
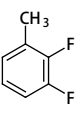
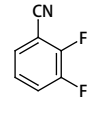
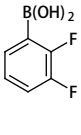
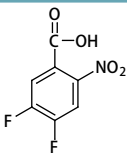
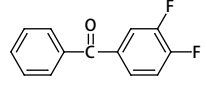
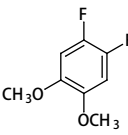
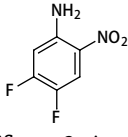
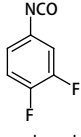
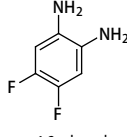
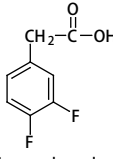
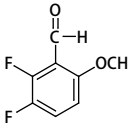
<b>F1009</b> 1g  3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol CAS RN: 177596-38-2	<b>F1019</b> 1g 5g  3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzotrile CAS RN: 231953-38-1	<b>F1051</b> 1g 5g  3-Fluoro-4-formylphenylboronic Acid CAS RN: 248270-25-9	<b>F1071</b> 1g 5g  2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic Acid CAS RN: 603122-84-5	<b>F1087</b> 1g 5g  3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic Acid CAS RN: 505083-04-5
<b>二取代(2,6-)单氟苯</b> Disubstituted (2,6-) Monofluorobenzenes				
<b>B2969</b> 1g 5g 25g  3-Bromo-2-fluorotoluene CAS RN: 59907-12-9	<b>B2972</b> 5g  1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene CAS RN: 144584-65-6	<b>B3389</b> 1g  3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 144584-67-8	<b>B3929</b> 1g 5g  3-Bromo-2-fluorobenzoic Acid CAS RN: 161957-56-8	
<b>B5137</b> 1g 5g  3-Bromo-2-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 352535-97-8	<b>B5143</b> 1g 5g  3-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol CAS RN: 261723-32-4	<b>C1659</b> 5g 25g  3-Chloro-2-fluoroaniline CAS RN: 2106-04-9	<b>C2117</b> 5g 25g  3-Chloro-2-fluorobenzoic Acid CAS RN: 161957-55-7	<b>C2118</b> 1g 5g  3-Chloro-2-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 85070-47-9
<b>C2127</b> 5g 25g  3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde CAS RN: 85070-48-0	<b>C2553</b> 5g 25g  3-Chloro-2-fluorobenzene-sulfonyl Chloride CAS RN: 351003-48-0	<b>C2562</b> 5g  3-Chloro-2-fluorobenzotrile CAS RN: 94087-40-8	<b>C2946</b> 1g 5g  3-Chloro-2-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 352535-82-1	<b>D2485</b> 5g 25g  2,6-Dichlorofluorobenzene CAS RN: 2268-05-5
<b>F0402</b> 5g 25g  2-Fluoro- <i>m</i> -xylene CAS RN: 443-88-9	<b>F0554</b> 1g 5g  2-Fluoro-3-methylaniline CAS RN: 1978-33-2	<b>F0619</b> 1g 5g  2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 115029-22-6	<b>F0661</b> 5g 25g  2-Fluoro-3-nitrotoluene CAS RN: 437-86-5	<b>F0762</b> 1g 5g  2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl Chloride CAS RN: 208173-19-7
<b>F0940</b> 1g 5g  2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic Acid CAS RN: 352303-67-4	<b>F0949</b> 1g 5g  2-Fluoro- <i>m</i> -toluic Acid CAS RN: 315-31-1	<b>F1006</b> 1g 5g  2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid CAS RN: 157834-21-4	<b>M2711</b> 1g 5g  Methyl 3-Bromo-2-fluorobenzoate CAS RN: 206551-41-9	<b>二取代(3,4-)单氟苯</b> Disubstituted (3,4-) Monofluorobenzenes
<b>A1158</b> 5g 25g  2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 393-39-5	<b>A2300</b> 1g 5g  2-Amino-5-fluorophenol CAS RN: 53981-24-1	<b>A2400</b> 5g  2-Amino-4-fluorophenol CAS RN: 399-97-3	<b>B1303</b> 5g 25g  2-Bromo-5-fluorotoluene CAS RN: 452-63-1	<b>B1555</b> 5g 25g  2-Bromo-4-fluorophenol CAS RN: 496-69-5
<b>B1829</b> 5g 25g  2-Bromo-4-fluoroaniline CAS RN: 1003-98-1	<b>B1830</b> 5g 25g  2-Bromo-4-fluoroanisole CAS RN: 452-08-4	<b>B1872</b> 5g 25g  2-Bromo-4-fluorotoluene CAS RN: 1422-53-3	<b>B2040</b> 5g 25g  2-Bromo-5-fluorophenol CAS RN: 147460-41-1	<b>B2163</b> 5g 25g  2-Bromo-5-fluoroaniline CAS RN: 1003-99-2

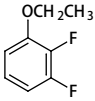
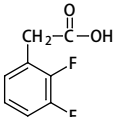
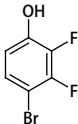
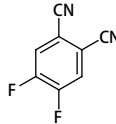
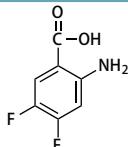
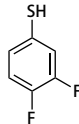
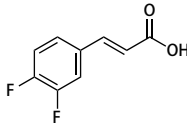
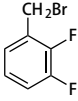
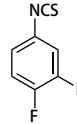
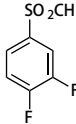
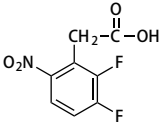
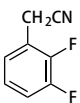
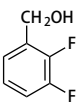
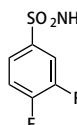
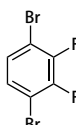
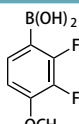
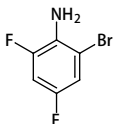
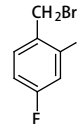
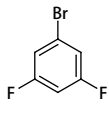
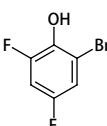
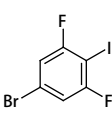
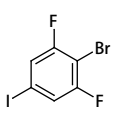
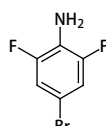
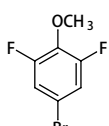
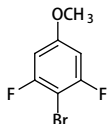
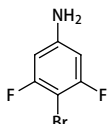
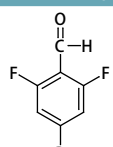
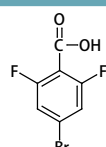
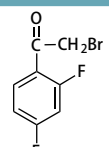
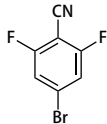
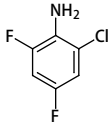
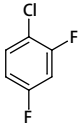
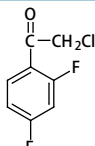
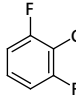
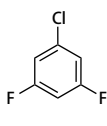
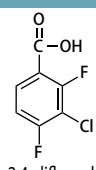
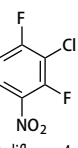
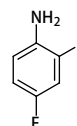
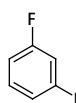
<p><b>B2339</b> 1g 5g</p>  <p>1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene CAS RN: 446-09-3</p>	<p><b>B2353</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde CAS RN: 94569-84-3</p>	<p><b>B2721</b> 25g</p>  <p>2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide CAS RN: 1009-22-9</p>	<p><b>B2722</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-5-fluorobenzoic Acid CAS RN: 394-28-5</p>	<p><b>B2744</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-4-fluorobenzonitrile CAS RN: 36282-26-5</p>
<p><b>B2800</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 40161-55-5</p>	<p><b>B2887</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-4-fluorobenzoic Acid CAS RN: 1006-41-3</p>	<p><b>B3010</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-5-fluorobenzonitrile CAS RN: 57381-39-2</p>	<p><b>B3048</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene CAS RN: 201849-15-2</p>	<p><b>B3061</b> 5g</p>  <p>2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene CAS RN: 700-36-7</p>
<p><b>B3098</b> 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene CAS RN: 202865-73-4</p>	<p><b>B3349</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene CAS RN: 110407-59-5</p>	<p><b>B3397</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 351003-21-9</p>	<p><b>B3417</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol CAS RN: 229027-89-8</p>	<p><b>B3498</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde CAS RN: 59142-68-6</p>
<p><b>B3683</b> 1g 5g</p>  <p>2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 779331-47-4</p>	<p><b>B3779</b> 1g 5g</p>  <p>2-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 848779-87-3</p>	<p><b>B3784</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-5-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 112399-50-5</p>	<p><b>B3875</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-5-fluoroanisole CAS RN: 450-88-4</p>	<p><b>B4236</b> 200mg 1g</p>  <p>N'-Boc-4-fluoro-1,2-phenylenediamine CAS RN: 579474-47-8</p>
<p><b>B4237</b> 200mg 1g</p>  <p>N<sub>2</sub>-Boc-4-fluoro-1,2-phenylenediamine CAS RN: 362670-07-3</p>	<p><b>B4506</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene CAS RN: 202865-72-3</p>	<p><b>C1161</b> 25g</p>  <p>2-Chloro-4-fluoroaniline CAS RN: 2106-02-7</p>	<p><b>C1227</b> 25g 500g</p>  <p>2-Chloro-4-fluorotoluene CAS RN: 452-73-3</p>	<p><b>C1311</b> 5g 25g</p>  <p>2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide CAS RN: 399-35-9</p>
<p><b>C1350</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-4-fluorobenzoic Acid CAS RN: 2252-51-9</p>	<p><b>C1465</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde CAS RN: 84194-36-5</p>	<p><b>C1537</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-5-fluorotoluene CAS RN: 33406-96-1</p>	<p><b>C1598</b> 25g</p>  <p>2-Chloro-4-fluorophenol CAS RN: 1996-41-4</p>	<p><b>C1667</b> 5g</p>  <p>2-Chloro-4-fluoroanisole CAS RN: 2267-25-6</p>
<p><b>C1693</b> 5g</p>  <p>2-Chloro-5-fluoroaniline CAS RN: 452-83-5</p>	<p><b>C1998</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-4-fluorobenzyl Chloride CAS RN: 93286-22-7</p>	<p><b>C2080</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-5-fluorobenzonitrile CAS RN: 57381-56-3</p>	<p><b>C2088</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-5-fluorobenzoic Acid CAS RN: 2252-50-8</p>	<p><b>C2098</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-4-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 45767-66-6</p>
<p><b>C2129</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-4-fluorobenzonitrile CAS RN: 60702-69-4</p>	<p><b>C2166</b> 5g</p>  <p>1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene CAS RN: 345-17-5</p>	<p><b>C2216</b> 5g</p>  <p>2-Chloro-5-fluoroanisole CAS RN: 450-89-5</p>	<p><b>C2359</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-5-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 81778-09-8</p>	<p><b>C2527</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-4-fluorobenzyl Alcohol CAS RN: 208186-84-9</p>

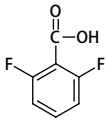
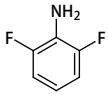
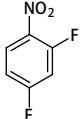
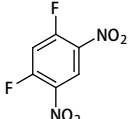
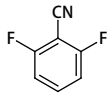
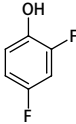
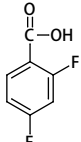
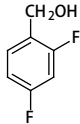
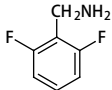
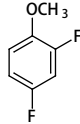
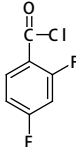
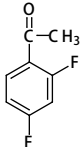
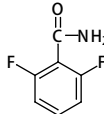
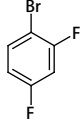
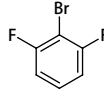
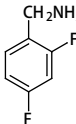
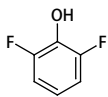
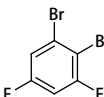
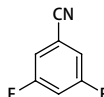
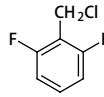
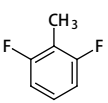
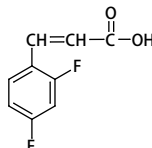
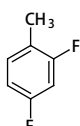
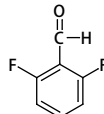
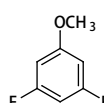
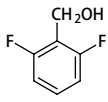
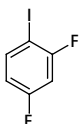
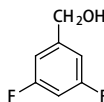
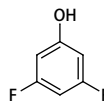
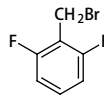
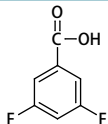
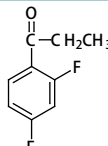
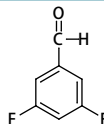
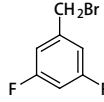
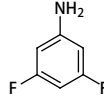
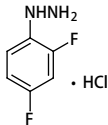
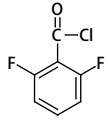
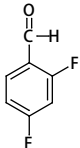
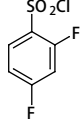
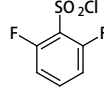
<b>C2615</b> 5g 25g  2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene CAS RN: 2106-50-5	<b>C2643</b> 1g 5g  2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone CAS RN: 700-35-6	<b>C2697</b> 5g 25g  2-Chloro-4-fluorobenzoyl Chloride CAS RN: 21900-54-9	<b>C2772</b> 5g 25g  2-Chloro-4-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 313545-72-1	<b>C3140</b> 1g 5g  2-Chloro-5-fluorobenzylamine CAS RN: 202522-23-4
<b>D2854</b> 5g 25g  1,2-Dibromo-4-fluorobenzene CAS RN: 2369-37-1	<b>D3570</b> 25g  1,2-Dichloro-4-fluorobenzene CAS RN: 1435-49-0	<b>D3726</b> 5g  4-Fluoro-1,2-phenylenediamine CAS RN: 367-31-7	<b>F0218</b> 5g 25g  4-Fluoro-2-nitrotoluene CAS RN: 446-10-6	<b>F0224</b> 25g  5-Fluoro-2-nitrophenol CAS RN: 446-36-6
<b>F0284</b> 25g  4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide CAS RN: 448-39-5	<b>F0301</b> 5g 25g  5-Fluoro-2-nitrotoluene CAS RN: 446-33-3	<b>F0318</b> 5g 25g  5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone CAS RN: 394-32-1	<b>F0355</b> 10g  4-Fluoro-o-xylene CAS RN: 452-64-2	<b>F0367</b> 5g 25g  4-Fluoro-2-nitrophenol CAS RN: 394-33-2
<b>F0380</b> 5g 25g  4-Fluoro-2-nitroaniline CAS RN: 364-78-3	<b>F0385</b> 5g  4-Fluoroveratrole CAS RN: 398-62-9	<b>F0387</b> 5g 25g  4-Fluoro-o-cresol CAS RN: 452-72-2	<b>F0396</b> 1g 5g  5-Fluoroanthranilic Acid CAS RN: 446-08-2	<b>F0405</b> 1g 5g 25g  4-Fluoroanthranilic Acid CAS RN: 446-32-2
<b>F0428</b> 1g 5g  5-Fluoro-o-anisaldehyde CAS RN: 19415-51-1	<b>F0436</b> 1g 5g  4-Fluoroguaiacol CAS RN: 450-93-1	<b>F0469</b> 1g 5g  5-Fluorosalicylic Acid CAS RN: 345-16-4	<b>F0479</b> 1g 5g  2-Cyano-4-fluoroanisole CAS RN: 189628-38-4	<b>F0483</b> 1g 5g  4-Fluorocatechol CAS RN: 367-32-8
<b>F0497</b> 5g 25g  5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride CAS RN: 393-09-9	<b>F0515</b> 5g 25g  5-Fluoro-o-tolyl Isothiocyanate CAS RN: 175205-39-7	<b>F0544</b> 1g 5g  4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 90176-80-0	<b>F0559</b> 5g 25g  4-Fluoro-o-toluic Acid CAS RN: 321-21-1	<b>F0574</b> 5g 25g  5-Fluorosalicylaldehyde CAS RN: 347-54-6
<b>F0577</b> 1g 5g  4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 141179-72-8	<b>F0613</b> 5g 25g  4-Fluoro-2-iodotoluene CAS RN: 13194-67-7	<b>F0614</b> 5g  5-Fluoro-2-methoxyaniline CAS RN: 1978-39-8	<b>F0615</b> 5g 25g  4-Fluoro-2-nitroanisole CAS RN: 445-83-0	<b>F0632</b> 1g 5g  5-Fluoro-o-cresol CAS RN: 452-85-7
<b>F0637</b> 1g 5g 25g  4-Fluorosalicylic Acid CAS RN: 345-29-9	<b>F0645</b> 5g 25g  5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde CAS RN: 395-81-3	<b>F0666</b> 1g 5g  4-Fluoro-2-methylphenylboronic Acid CAS RN: 139911-29-8	<b>F0680</b> 1g 5g  4-Fluoro-2-methoxybenzoic Acid CAS RN: 395-82-4	<b>F0694</b> 5g 25g  5-Fluoro-2-nitrobenzoic Acid CAS RN: 320-98-9

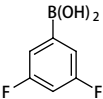
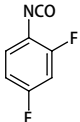
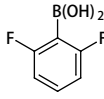
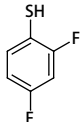
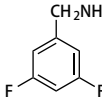
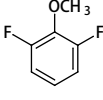
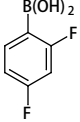
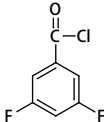
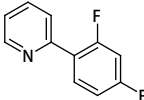
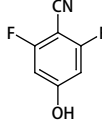
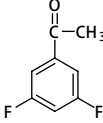
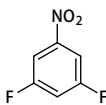
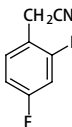
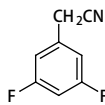
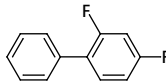
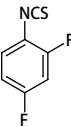
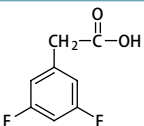
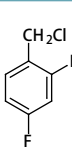
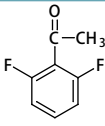
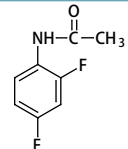
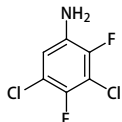
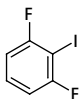
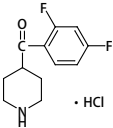
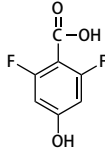
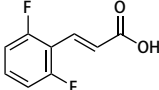
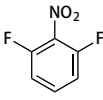
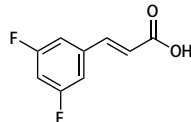
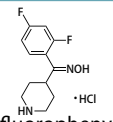
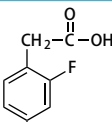
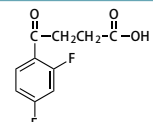
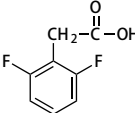
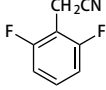
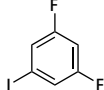
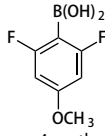
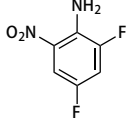
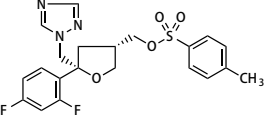
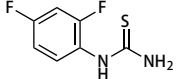
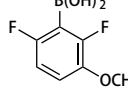
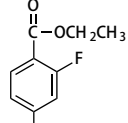
<p><b>F0703</b> 5g 25g</p>  <p>5-Fluoro-2-nitroanisole CAS RN: 448-19-1</p>	<p><b>F0706</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluoro-2-iodoaniline CAS RN: 61272-76-2</p>	<p><b>F0723</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone CAS RN: 1481-27-2</p>	<p><b>F0737</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-2-nitrobenzoic Acid CAS RN: 394-01-4</p>	<p><b>F0746</b> 5g 25g</p>  <p>5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde CAS RN: 22062-53-9</p>
<p><b>F0747</b> 5g 25g</p>  <p>2-Cyano-4-fluorotoluene CAS RN: 77532-79-7</p>	<p><b>F0748</b> 1g 5g</p>  <p>5-Fluoro-2-methylbenzyl Bromide CAS RN: 261951-71-7</p>	<p><b>F0768</b> 1g</p>  <p>4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl Chloride CAS RN: 189807-21-4</p>	<p><b>F0769</b> 1g 5g</p>  <p>5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl Chloride CAS RN: 216144-70-6</p>	<p><b>F0775</b> 5g 25g</p>  <p>5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic Acid CAS RN: 179897-94-0</p>
<p><b>F0789</b> 5g 25g</p>  <p>5-Fluoro-2-nitroaniline CAS RN: 2369-11-1</p>	<p><b>F0793</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde CAS RN: 63082-45-1</p>	<p><b>F0827</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-o-anisaldehyde CAS RN: 450-83-9</p>	<p><b>F0828</b> 5g 25g</p>  <p>4-Iodo-1-iodo-2-nitrobenzene CAS RN: 364-77-2</p>	<p><b>F0844</b> 5g 25g</p>  <p>5-Fluoro-2-methylbenzoic Acid CAS RN: 33184-16-6</p>
<p><b>F0962</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-2-methylbenzonitrile CAS RN: 147754-12-9</p>	<p><b>F0976</b> 1g 5g</p>  <p>5-Fluoro-2-methylphenylboronic Acid CAS RN: 163517-62-2</p>	<p><b>F0977</b> 1g 5g</p>  <p>5-Fluoro-2-hydroxyphenylboronic Acid CAS RN: 259209-20-6</p>	<p><b>F1049</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-2-(5-isoxazolyl)phenol CAS RN: 288401-62-7</p>	<p><b>F1052</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid CAS RN: 182344-16-7</p>
<p><b>二取代(3,5)单氟苯</b> Disubstituted (3,5) Monofluorobenzenes</p>				
<p><b>B2945</b> 5g</p>  <p>3-Bromo-5-fluoroanisole CAS RN: 29578-39-0</p>	<p><b>B3045</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene CAS RN: 33863-76-2</p>	<p><b>B3063</b> 5g</p>  <p>3-Bromo-5-fluorophenol CAS RN: 433939-27-6</p>	<p><b>B3106</b> 5g 25g</p>  <p>3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 130723-13-6</p>	
<p><b>B3782</b> 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-5-fluorobenzoic Acid CAS RN: 176548-70-2</p>	<p><b>B4600</b> 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-5-fluorobenzonitrile CAS RN: 179898-34-1</p>	<p><b>C2218</b> 1g 5g</p>  <p>3-Chloro-5-fluoroanisole CAS RN: 202925-08-4</p>	<p><b>C2474</b> 1g 5g</p>  <p>3-Chloro-5-fluorobenzyl Bromide CAS RN: 493024-39-8</p>	<p><b>C2914</b> 1g 5g</p>  <p>3-Chloro-5-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 328956-61-2</p>
<p><b>C3052</b> 1g 5g</p>  <p>3-Chloro-5-fluoroaniline CAS RN: 4863-91-6</p>	<p><b>C3287</b> 1g 5g</p>  <p>3-Carboxy-5-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 871329-84-9</p>	<p><b>D2211</b> 10g 25g</p>  <p>1,3-Dibromo-5-fluorobenzene CAS RN: 1435-51-4</p>	<p><b>D4046</b> 5g 25g</p>  <p>1,3-Dichloro-5-fluorobenzene CAS RN: 1435-46-7</p>	<p><b>E1205</b> 200mg 1g</p>  <p>3-Ethoxy-5-fluorophenylboronic Acid CAS RN: 850589-53-6</p>
<p><b>F0759</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 161622-05-5</p>	<p><b>F0767</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl Chloride CAS RN: 171243-30-4</p>	<p><b>F0774</b> 1g 5g</p>  <p>3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 188815-30-7</p>	<p><b>F0815</b> 1g 5g</p>  <p>1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene CAS RN: 3819-88-3</p>	<p><b>F0954</b> 1g</p>  <p>3-Fluoro-5-hydroxyphenylboronic Acid CAS RN: 871329-82-7</p>

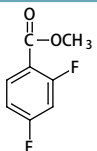
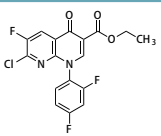
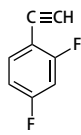
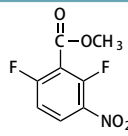
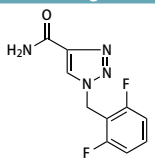
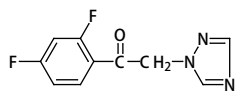
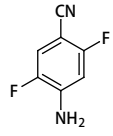
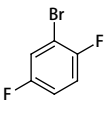
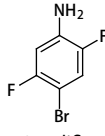

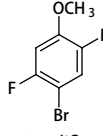
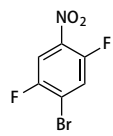
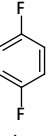
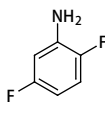
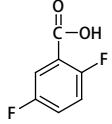
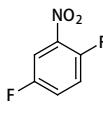
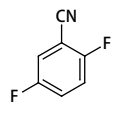
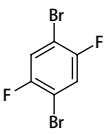
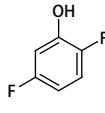
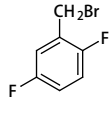
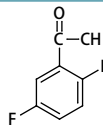
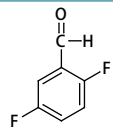
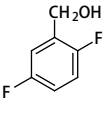
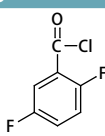
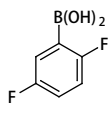
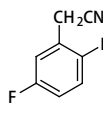
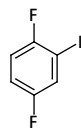
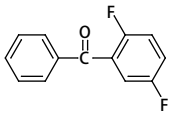
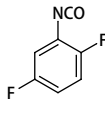
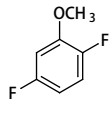
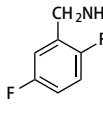
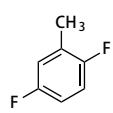
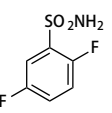
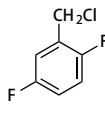
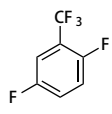
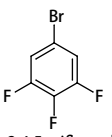
<b>F0994</b> 5g 25g  3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-benzonitrile CAS RN: 149793-69-1	<b>F1063</b> 1g 5g  3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic Acid CAS RN: 609807-25-2	<b>F1081</b> 200mg 1g  5-Fluororesorcinol CAS RN: 75996-29-1	三取代单氟苯 Trisubstituted Monofluorobenzenes	<b>B2723</b> 5g  2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline CAS RN: 195191-47-0
<b>B3681</b> 5g  2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline CAS RN: 201849-14-1	<b>B4370</b> 1g 5g  5-Bromo-2-fluoro- <i>m</i> -xylene CAS RN: 99725-44-7	<b>B4872</b> 1g  2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline CAS RN: 10472-88-5		<b>B5057</b> 1g 5g  5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 115467-07-7
<b>C2616</b> 5g 25g  2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol CAS RN: 84478-75-1	<b>C3141</b> 1g 5g  5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline CAS RN: 104222-34-6	<b>D1637</b> 1g  2,4-Dinitro-5-fluoroaniline CAS RN: 367-81-7	<b>D2204</b> 10g  2,6-Dichloro-4-fluorophenol CAS RN: 392-71-2	<b>D2385</b> 25g  2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone CAS RN: 704-10-9
<b>D2386</b> 5g 25g  2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic Acid CAS RN: 86522-89-6	<b>D2570</b> 25g  2,6-Dibromo-4-fluoroaniline CAS RN: 344-18-3	<b>D2750</b> 5g 25g  2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone CAS RN: 290835-85-7	<b>D3531</b> 5g 25g  2,6-Dibromo-4-fluorophenol CAS RN: 344-20-7	<b>D3582</b> 5g  1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene CAS RN: 62720-29-0
<b>D3625</b> 1g 5g  2,6-Dichloro-4-fluoroaniline CAS RN: 344-19-4	<b>D4380</b> 5g  2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl Chloride CAS RN: 86393-34-2	<b>D4577</b> 1g 5g  ( <i>R</i> )-2,6-Dichloro-3-fluoro- $\alpha$ -methylbenzyl Alcohol CAS RN: 330156-50-8	<b>F0441</b> 1g 5g  6-Fluoroveratraldehyde CAS RN: 71924-62-4	<b>F0641</b> 1g 5g  4-Cyano-5-fluoroveratrole CAS RN: 119396-88-2
<b>M1201</b> 1g 5g  Mesityl Fluoride CAS RN: 392-69-8	其它单氟芳烃 Other Monofluoro Aromatic Hydrocarbons	<b>B3797</b> 1g 5g  1-Bromo-4-fluoronaphthalene CAS RN: 341-41-3	<b>F0034</b> 25g 100g 500g  Fluorobenzene CAS RN: 462-06-6	<b>F0212</b> 5g 25g  1-Fluoronaphthalene CAS RN: 321-38-0
<b>F0228</b> 5g 25g  2-Fluorofluorene CAS RN: 343-43-1		<b>F0376</b> 1g 5g  5-Fluoro-1-indanone CAS RN: 700-84-5	<b>F0473</b> 1g 5g  Methyl 6-Fluoro-2-naphthoate CAS RN: 5043-00-5	<b>F0668</b> 1g 5g  6-Fluoro-1-indanone CAS RN: 1481-32-9
二氟芳烃 Difluoro Aromatic Hydrocarbons	1,2-二氟苯 1,2-Difluoro- benzenes	<b>B1523</b> 25g 250g  1-Bromo-3,4-difluorobenzene CAS RN: 348-61-8	<b>B1800</b> 1g 5g 25g  1-Bromo-2,3-difluorobenzene CAS RN: 38573-88-5	<b>B3845</b> 1g 5g  2-Bromo-4,5-difluorophenol CAS RN: 166281-37-4

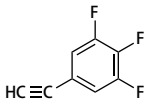
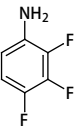
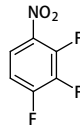
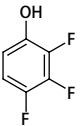
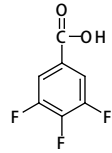
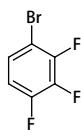
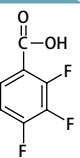
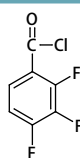
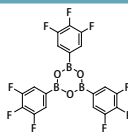
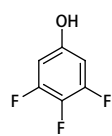
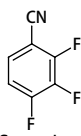
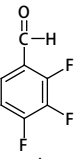
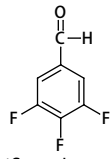
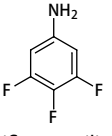
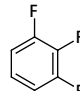
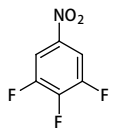
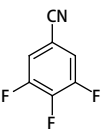
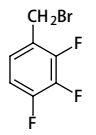
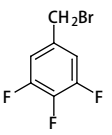
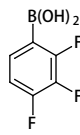
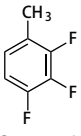
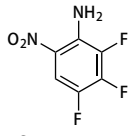
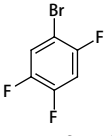
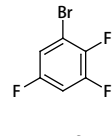
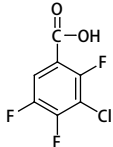
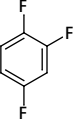
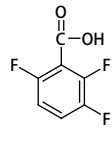
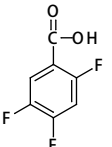
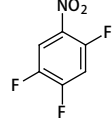
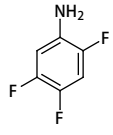
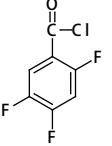
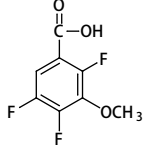
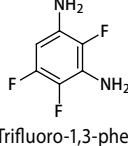
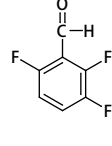
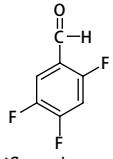
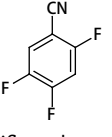
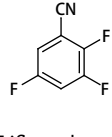
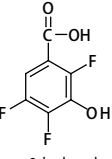
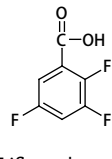
<p><b>B3884</b> 5g</p>  <p>4-Bromo-2,3-difluorophenetole CAS RN: 156573-09-0</p>	<p><b>B4129</b> 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-4,5-difluorotoluene CAS RN: 875664-38-3</p>	<p><b>B4490</b> 5g 25g</p>  <p>5-Bromo-2,3-difluorophenol CAS RN: 186590-26-1</p>	<p><b>B5058</b> 5g 25g</p>  <p>1-Butoxy-2,3-difluorobenzene CAS RN: 136239-66-2</p>	<p><b>C1460</b> 5g 25g 250g</p>  <p>2-Chloro-4,5-difluorobenzoic Acid CAS RN: 110877-64-0</p>
<p><b>C1599</b> 5g 25g</p>  <p>1-Chloro-3,4-difluorobenzene CAS RN: 696-02-6</p>	<p><b>D1627</b> 5g 25g</p>  <p>1,2-Difluorobenzene CAS RN: 367-11-3</p>	<p><b>D1809</b> 25g 100g</p>  <p>3,4-Difluoroaniline CAS RN: 3863-11-4</p>	<p><b>D1906</b> 5g 25g</p>  <p>3',4'-Difluoroacetophenone CAS RN: 369-33-5</p>	<p><b>D1908</b> 5g 25g</p>  <p>3,4-Difluorobenzoic Acid CAS RN: 455-86-7</p>
<p><b>D1913</b> 5g 25g</p>  <p>1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene CAS RN: 64695-78-9</p>	<p><b>D1926</b> 25g 250g</p>  <p>3,4-Difluoronitrobenzene CAS RN: 369-34-6</p>	<p><b>D2058</b> 5g 25g</p>  <p>2,3-Difluorobenzoic Acid CAS RN: 4519-39-5</p>	<p><b>D2340</b> 5g 25g</p>  <p>3,4-Difluorobenzaldehyde CAS RN: 34036-07-2</p>	<p><b>D2341</b> 5g 25g</p>  <p>3,4-Difluorobenzonitrile CAS RN: 64248-62-0</p>
<p><b>D2415</b> 5g 25g</p>  <p>3,4-Difluorobenzyl Alcohol CAS RN: 85118-05-4</p>	<p><b>D2453</b> 5g 25g</p>  <p>2,3-Difluorophenol CAS RN: 6418-38-8</p>	<p><b>D2476</b> 5g 25g</p>  <p>3,4-Difluorophenol CAS RN: 2713-33-9</p>	<p><b>D2560</b> 10g</p>  <p>1,2-Difluoro-4-iodobenzene CAS RN: 64248-58-4</p>	<p><b>D2595</b> 1g 5g</p>  <p>2,3-Difluoroaniline CAS RN: 4519-40-8</p>
<p><b>D2614</b> 5g 25g</p>  <p>2,3-Difluorobenzaldehyde CAS RN: 2646-91-5</p>	<p><b>D2627</b> 5g 25g</p>  <p>3,4-Difluorobenzyl Bromide CAS RN: 85118-01-0</p>	<p><b>D2705</b> 5g 25g</p>  <p>2,3-Difluoro-6-nitrophenol CAS RN: 82419-26-9</p>	<p><b>D2847</b> 5g</p>  <p>3,4-Difluorobenzoyl Chloride CAS RN: 76903-88-3</p>	<p><b>D2856</b> 5g 25g</p>  <p>3,4-Difluoroanisole CAS RN: 115144-40-6</p>
<p><b>D2941</b> 1g 5g</p>  <p>3,4-Difluorobenzenesulfonyl Chloride CAS RN: 145758-05-0</p>	<p><b>D3359</b> 1g 5g</p>  <p>2,3-Difluoroanisole CAS RN: 134364-69-5</p>	<p><b>D3370</b> 5g</p>  <p>3,4-Difluorobenzotrifluoride CAS RN: 32137-19-2</p>	<p><b>D3373</b> 1g 5g</p>  <p>3,4-Difluorobenzylamine CAS RN: 72235-53-1</p>	<p><b>D3497</b> 1g 5g</p>  <p>2,3-Difluorotoluene CAS RN: 3828-49-7</p>
<p><b>D3500</b> 1g 5g</p>  <p>2,3-Difluorobenzonitrile CAS RN: 21524-39-0</p>	<p><b>D3523</b> 5g 25g</p>  <p>2,3-Difluorophenylboronic Acid CAS RN: 121219-16-7</p>	<p><b>D3555</b> 5g 25g</p>  <p>4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic Acid CAS RN: 20372-63-8</p>	<p><b>D3576</b> 5g 25g</p>  <p>3,4-Difluorobenzophenone CAS RN: 85118-07-6</p>	<p><b>D3626</b> 1g 5g</p>  <p>1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene CAS RN: 203059-80-7</p>
<p><b>D3644</b> 5g 25g</p>  <p>4,5-Difluoro-2-nitroaniline CAS RN: 78056-39-0</p>	<p><b>D3696</b> 1g 5g</p>  <p>3,4-Difluorophenyl Isocyanate CAS RN: 42601-04-7</p>	<p><b>D3729</b> 1g</p>  <p>4,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine CAS RN: 76179-40-3</p>	<p><b>D3771</b> 1g 5g</p>  <p>3,4-Difluorophenylacetic Acid CAS RN: 658-93-5</p>	<p><b>D3885</b> 1g 5g</p>  <p>5,6-Difluoro-o-anisaldehyde CAS RN: 187543-87-9</p>

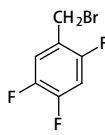
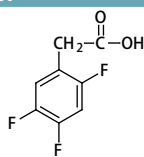
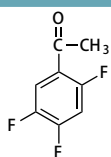
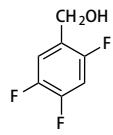
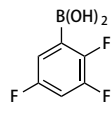
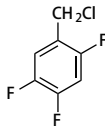
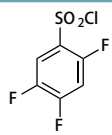
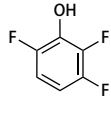
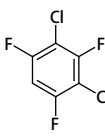
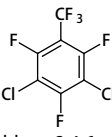
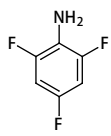
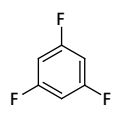
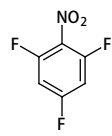
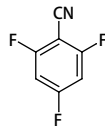
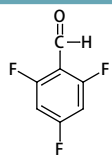
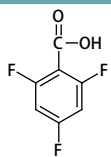
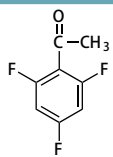
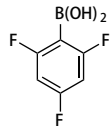
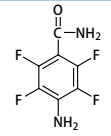
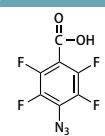
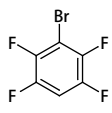
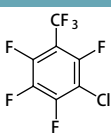
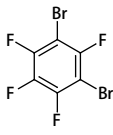
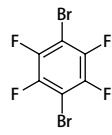
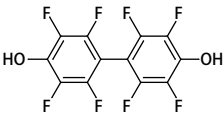
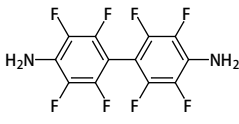
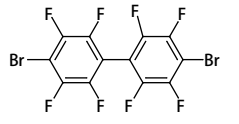
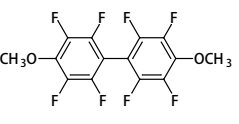
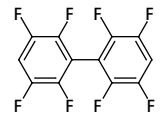
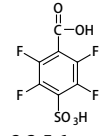
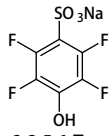
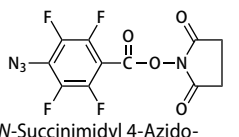
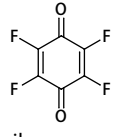
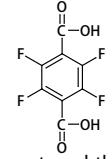
<b>D3888</b> 5g  2,3-Difluorophenetole CAS RN: 121219-07-6	<b>D3889</b> 1g 5g  2,3-Difluorophenylacetic Acid CAS RN: 145689-41-4	<b>D3913</b> 1g 5g  4-Bromo-2,3-difluorophenol CAS RN: 144292-32-0	<b>D3963</b> 1g 5g  4,5-Difluorophthalonitrile CAS RN: 134450-56-9	<b>D4063</b> 5g 25g  4,5-Difluoroanthranilic Acid CAS RN: 83506-93-8	
<b>D4121</b> 5g 25g  3,4-Difluorobenzenethiol CAS RN: 60811-24-7	<b>D4161</b> 1g 5g  <i>trans</i> -3,4-Difluorocinnamic Acid CAS RN: 112897-97-9	<b>D4320</b> 1g 5g  2,3-Difluorobenzyl Bromide CAS RN: 113211-94-2	<b>D4458</b> 1g 5g  3,4-Difluorophenyl Isothiocyanate CAS RN: 113028-75-4	<b>D4526</b> 1g 5g  3,4-Difluorophenyl Methyl Sulfone CAS RN: 424792-57-4	
<b>D4583</b> 1g 5g  2,3-Difluoro-6-nitrophenylacetic Acid CAS RN: 141428-47-9	<b>D4602</b> 1g 5g  2,3-Difluorophenylacetonitrile CAS RN: 145689-34-5	<b>D4619</b> 5g 25g  2,3-Difluorobenzyl Alcohol CAS RN: 75853-18-8	<b>D4892</b> 1g 5g  3,4-Difluorobenzenesulfonamide CAS RN: 108966-71-8	<b>D4983</b> 1g 5g  1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene CAS RN: 156682-52-9	
<b>D5016</b> 5g 25g  2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl-boronic Acid CAS RN: 170981-41-6	<b>1,3-二氟苯</b> 1,3-Difluorobenzenes		<b>B1288</b> 25g  2-Bromo-4,6-difluoroaniline CAS RN: 444-14-4	<b>B1710</b> 5g 25g  2,4-Difluorobenzyl Bromide CAS RN: 23915-07-3	<b>B1764</b> 25g 250g  1-Bromo-3,5-difluorobenzene CAS RN: 461-96-1
<b>B3004</b> 1g 5g  2-Bromo-4,6-difluorophenol CAS RN: 98130-56-4	<b>B3058</b> 5g  5-Bromo-1,3-difluoro-2-iodobenzene CAS RN: 160976-02-3	<b>B3073</b> 5g 25g  2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene CAS RN: 155906-10-8	<b>B3220</b> 1g 5g 25g  4-Bromo-2,6-difluoroaniline CAS RN: 67567-26-4	<b>B3391</b> 5g  4-Bromo-2,6-difluoroanisole CAS RN: 104197-14-0	
<b>B3392</b> 5g 25g  4-Bromo-3,5-difluoroanisole CAS RN: 202865-61-0	<b>B3416</b> 5g 25g  4-Bromo-3,5-difluoroaniline CAS RN: 203302-95-8	<b>B3446</b> 100mg 1g  4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde CAS RN: 537013-51-7	<b>B3447</b> 1g 5g  4-Bromo-2,6-difluorobenzoic Acid CAS RN: 183065-68-1	<b>B4020</b> 5g 25g  2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone CAS RN: 102429-07-2	
<b>B4021</b> 1g 5g  4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile CAS RN: 123843-67-4	<b>C1777</b> 1g 5g  2-Chloro-4,6-difluoroaniline CAS RN: 36556-56-6	<b>C1830</b> 25g  1-Chloro-2,4-difluorobenzene CAS RN: 1435-44-5	<b>C2030</b> 5g 25g  2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone CAS RN: 51336-94-8	<b>C2211</b> 5g  2-Chloro-1,3-difluorobenzene CAS RN: 38361-37-4	
<b>C2514</b> 5g 25g  1-Chloro-3,5-difluorobenzene CAS RN: 1435-43-4	<b>C2517</b> 5g 25g  3-Chloro-2,4-difluorobenzoic Acid CAS RN: 154257-75-7	<b>C2964</b> 5g 25g  2-Chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene CAS RN: 3847-58-3	<b>D1508</b> 25g 500g  2,4-Difluoroaniline CAS RN: 367-25-9	<b>D1626</b> 25g 500g  1,3-Difluorobenzene CAS RN: 372-18-9	

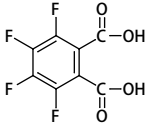
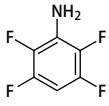
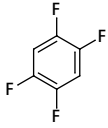
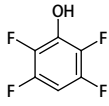
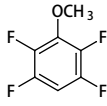
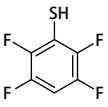
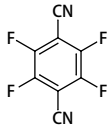
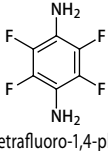
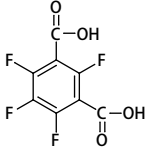
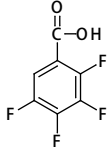

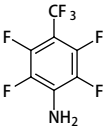
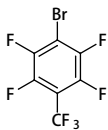
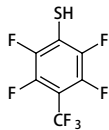
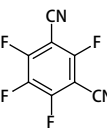
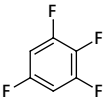
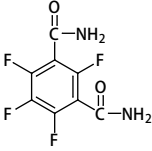
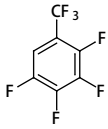
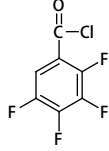
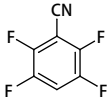
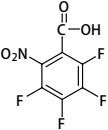
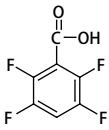
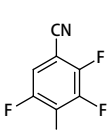
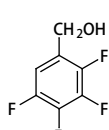
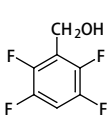
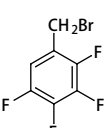
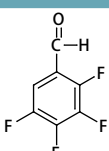
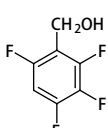
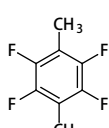
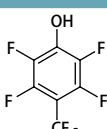
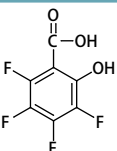
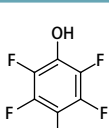
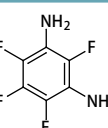
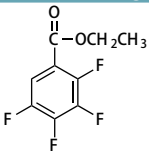
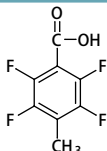
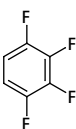
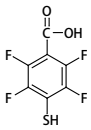
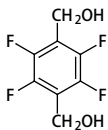
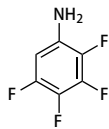
<p><b>D1629</b> 25g</p>  <p>2,6-Difluorobenzoic Acid CAS RN: 385-00-2</p>	<p><b>D1635</b> 5g 25g 100g</p>  <p>2,6-Difluoroaniline CAS RN: 5509-65-9</p>	<p><b>D1636</b> 25g 500g</p>  <p>2,4-Difluoronitrobenzene CAS RN: 446-35-5</p>	<p><b>D1649</b> 5g 25g</p>  <p>1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene CAS RN: 327-92-4</p>	<p><b>D1650</b> 25g 100g</p>  <p>2,6-Difluorobenzonitrile CAS RN: 1897-52-5</p>
<p><b>D1832</b> 5g 25g</p>  <p>2,4-Difluorophenol CAS RN: 367-27-1</p>	<p><b>D1833</b> 25g 500g</p>  <p>2,4-Difluorobenzoic Acid CAS RN: 1583-58-0</p>	<p><b>D1838</b> 10g</p>  <p>2,4-Difluorobenzyl Alcohol CAS RN: 56456-47-4</p>	<p><b>D1847</b> 5g 25g</p>  <p>2,6-Difluorobenzylamine CAS RN: 69385-30-4</p>	<p><b>D1849</b> 10g 25g</p>  <p>2,4-Difluoroanisole CAS RN: 452-10-8</p>
<p><b>D1882</b> 10g</p>  <p>2,4-Difluorobenzoyl Chloride CAS RN: 72482-64-5</p>	<p><b>D1885</b> 10g</p>  <p>2',4'-Difluoroacetophenone CAS RN: 364-83-0</p>	<p><b>D1907</b> 25g</p>  <p>2,6-Difluorobenzamide CAS RN: 18063-03-1</p>	<p><b>D1909</b> 25g 500g</p>  <p>1-Bromo-2,4-difluorobenzene CAS RN: 348-57-2</p>	<p><b>D1943</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-2,6-difluorobenzene CAS RN: 64248-56-2</p>
<p><b>D1996</b> 1g 5g</p>  <p>2,4-Difluorobenzylamine CAS RN: 72235-52-0</p>	<p><b>D2015</b> 5g 25g</p>  <p>2,6-Difluorophenol CAS RN: 28177-48-2</p>	<p><b>D2023</b> 25g</p>  <p>1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzene CAS RN: 139215-43-3</p>	<p><b>D2081</b> 5g</p>  <p>3,5-Difluorobenzonitrile CAS RN: 64248-63-1</p>	<p><b>D2337</b> 5g 25g</p>  <p>2,6-Difluorobenzyl Chloride CAS RN: 697-73-4</p>
<p><b>D2338</b> 1g 5g</p>  <p>2,6-Difluorotoluene CAS RN: 443-84-5</p>	<p><b>D2343</b> 5g</p>  <p>2,4-Difluorocinnamic Acid CAS RN: 94977-52-3</p>	<p><b>D2351</b> 10g</p>  <p>2,4-Difluorotoluene CAS RN: 452-76-6</p>	<p><b>D2452</b> 5g 25g</p>  <p>2,6-Difluorobenzaldehyde CAS RN: 437-81-0</p>	<p><b>D2463</b> 10g</p>  <p>3,5-Difluoroanisole CAS RN: 93343-10-3</p>
<p><b>D2507</b> 5g 25g</p>  <p>2,6-Difluorobenzyl Alcohol CAS RN: 19064-18-7</p>	<p><b>D2545</b> 25g</p>  <p>2,4-Difluoro-1-iodobenzene CAS RN: 2265-93-2</p>	<p><b>D2559</b> 10g</p>  <p>3,5-Difluorobenzyl Alcohol CAS RN: 79538-20-8</p>	<p><b>D2569</b> 5g 25g</p>  <p>3,5-Difluorophenol CAS RN: 2713-34-0</p>	<p><b>D2576</b> 5g</p>  <p>2,6-Difluorobenzyl Bromide CAS RN: 85118-00-9</p>
<p><b>D2596</b> 5g 25g</p>  <p>3,5-Difluorobenzoic Acid CAS RN: 455-40-3</p>	<p><b>D2598</b> 5g 25g</p>  <p>2',4'-Difluoropropiophenone CAS RN: 85068-30-0</p>	<p><b>D2626</b> 5g 25g</p>  <p>3,5-Difluorobenzaldehyde CAS RN: 32085-88-4</p>	<p><b>D2631</b> 5g 25g</p>  <p>3,5-Difluorobenzyl Bromide CAS RN: 141776-91-2</p>	<p><b>D2665</b> 5g 25g</p>  <p>3,5-Difluoroaniline CAS RN: 372-39-4</p>
<p><b>D2698</b> 5g 25g</p>  <p>2,4-Difluorophenylhydrazine Hydrochloride CAS RN: 51523-79-6</p>	<p><b>D2798</b> 25g</p>  <p>2,6-Difluorobenzoyl Chloride CAS RN: 18063-02-0</p>	<p><b>D2839</b> 5g 25g</p>  <p>2,4-Difluorobenzaldehyde CAS RN: 1550-35-2</p>	<p><b>D2939</b> 5g 25g</p>  <p>2,4-Difluorobenzenesulfonyl Chloride CAS RN: 13918-92-8</p>	<p><b>D2940</b> 1g 5g 25g</p>  <p>2,6-Difluorobenzenesulfonyl Chloride CAS RN: 60230-36-6</p>

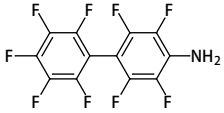
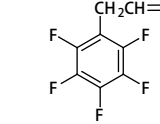
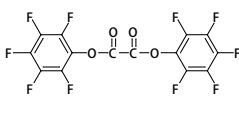
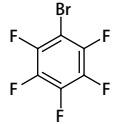
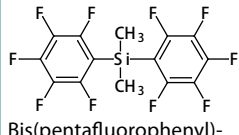
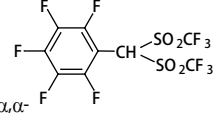
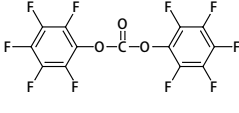
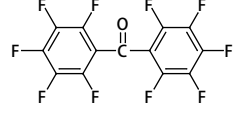
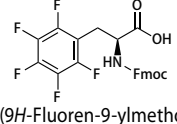
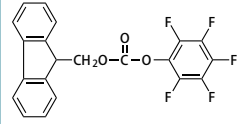
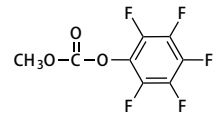
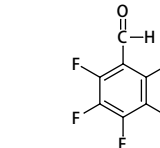
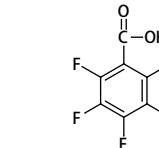
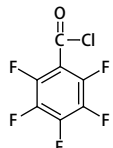
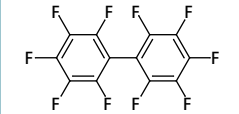
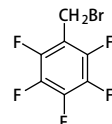
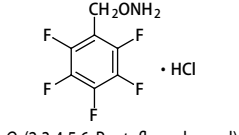
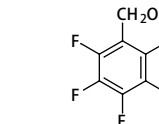
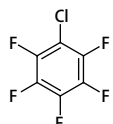
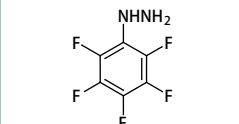
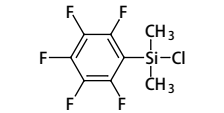
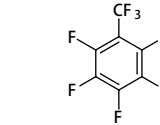
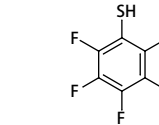
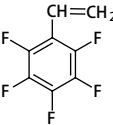
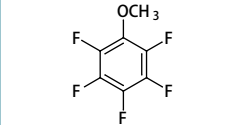
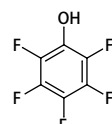
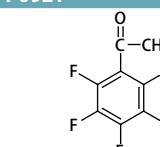
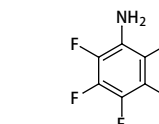
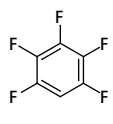
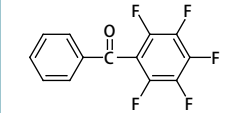
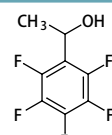
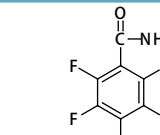
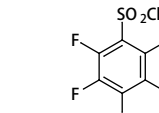
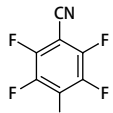
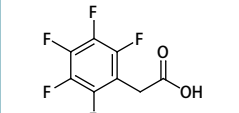
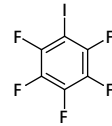
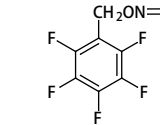
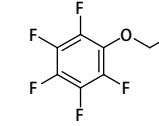

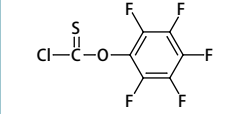
<b>D3081</b> 5g 25g  3,5-Difluorophenylboronic Acid CAS RN: 156545-07-2	<b>D3086</b> 5g  2,4-Difluorophenyl Isocyanate CAS RN: 59025-55-7	<b>D3087</b> 1g 5g 25g  2,6-Difluorophenylboronic Acid CAS RN: 162101-25-9	<b>D3342</b> 5g 25g  2,4-Difluorobenzenethiol CAS RN: 1996-44-7	<b>D3343</b> 1g 5g  3,5-Difluorobenzylamine CAS RN: 90390-27-5
<b>D3360</b> 1g 5g  2,6-Difluoroanisole CAS RN: 437-82-1	<b>D3391</b> 5g 25g  2,4-Difluorophenylboronic Acid CAS RN: 144025-03-6	<b>D3407</b> 5g 25g  3,5-Difluorobenzoyl Chloride CAS RN: 129714-97-2	<b>D3413</b> 1g 5g  2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine CAS RN: 391604-55-0	<b>D3424</b> 5g  2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile CAS RN: 123843-57-2
<b>D3425</b> 5g 25g  3',5'-Difluoroacetophenone CAS RN: 123577-99-1	<b>D3426</b> 5g 25g  3,5-Difluoronitrobenzene CAS RN: 2265-94-3	<b>D3441</b> 5g  2,4-Difluorobenzyl Cyanide CAS RN: 656-35-9	<b>D3443</b> 5g  3,5-Difluorobenzyl Cyanide CAS RN: 122376-76-5	<b>D3450</b> 5g  2,4-Difluorobiphenyl CAS RN: 37847-52-2
<b>D3454</b> 1g  2,4-Difluorophenyl Isothiocyanate CAS RN: 141106-52-7	<b>D3462</b> 1g 5g  3,5-Difluorophenylacetic Acid CAS RN: 105184-38-1	<b>D3493</b> 5g 25g  2,4-Difluorobenzyl Chloride CAS RN: 452-07-3	<b>D3559</b> 5g 25g  2',6'-Difluoroacetophenone CAS RN: 13670-99-0	<b>D3578</b> 25g  2',4'-Difluoroacetanilide CAS RN: 399-36-0
<b>D3637</b> 5g 25g  3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline CAS RN: 83121-15-7	<b>D3643</b> 5g  1,3-Difluoro-2-iodo-benzene CAS RN: 13697-89-7	<b>D3979</b> 5g 25g  4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride CAS RN: 106266-04-0	<b>D3985</b> 1g 5g  2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic Acid CAS RN: 214917-68-7	<b>D4115</b> 1g 5g  trans-2,6-Difluorocinnamic Acid CAS RN: 102082-89-3
<b>D4123</b> 1g 5g  2,6-Difluoronitrobenzene CAS RN: 19064-24-5	<b>D4156</b> 5g  trans-3,5-Difluorocinnamic Acid CAS RN: 147700-58-1	<b>D4269</b> 5g  (2,4-Difluorophenyl)-4-piperidylmethanone Oxime Hydrochloride CAS RN: 135634-18-3	<b>D4321</b> 5g 25g  2,4-Difluorophenylacetic Acid CAS RN: 81228-09-3	<b>D4585</b> 1g 5g  3-(2,4-Difluorobenzoyl)propionic Acid CAS RN: 110931-77-6
<b>D4322</b> 5g  2,6-Difluorophenylacetic Acid CAS RN: 85068-28-6	<b>D4510</b> 5g 25g  2,6-Difluorobenzyl Cyanide CAS RN: 654-01-3	<b>D4620</b> 5g 25g  1,3-Difluoro-5-iodobenzene CAS RN: 2265-91-0	<b>D4728</b> 1g  2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic Acid CAS RN: 406482-20-0	<b>D4733</b> 5g 25g  2,4-Difluoro-6-nitroaniline CAS RN: 364-30-7
<b>D4537</b> 200mg  (3S,5R)-5-(2,4-Difluorophenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-ylmethyl p-Toluenesulfonate CAS RN: 149809-43-8	<b>D4861</b> 1g 5g  (2,4-Difluorophenyl)thiourea CAS RN: 175277-76-6	<b>D5006</b> 1g 5g  2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic Acid CAS RN: 870779-02-5	<b>E0935</b> 5g 25g  Ethyl 2,4-Difluorobenzoate CAS RN: 108928-00-3	

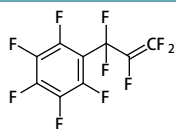
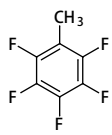
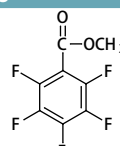
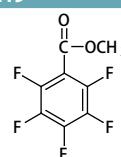
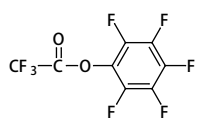
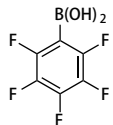
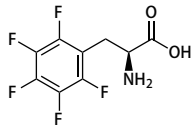
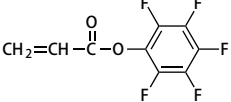
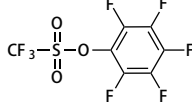
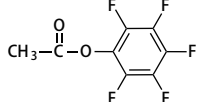
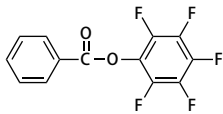
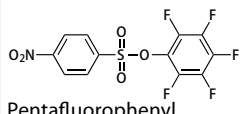
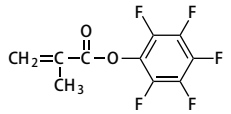
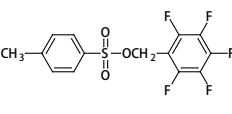
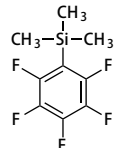
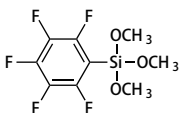
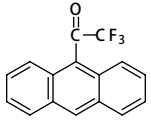
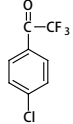
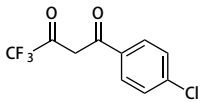
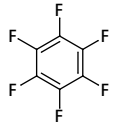
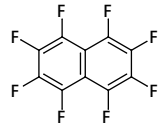
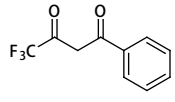
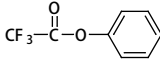
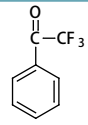
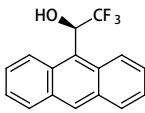
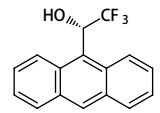
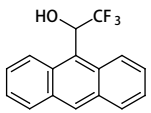
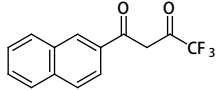
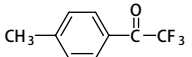
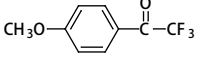
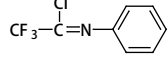
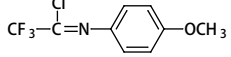
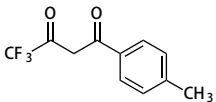
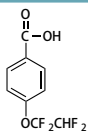
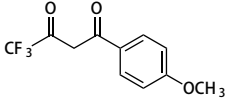
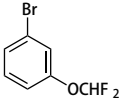
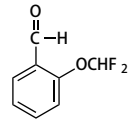
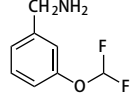
<p><b>M1879</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl 2,4-Difluorobenzoate CAS RN: 106614-28-2</p>	<p><b>E1180</b> 5g 25g</p>  <p>Ethyl 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate CAS RN: 100491-29-0</p>	<p><b>E1169</b> 1g 5g</p>  <p>1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene CAS RN: 302912-34-1</p>	<p><b>M2749</b> 1g 5g</p>  <p>Methyl 2,6-Difluoro-3-nitrobenzoate CAS RN: 84832-01-9</p>	
<p><b>R0143</b> 25mg 100mg 1g</p>  <p>Rufinamide CAS RN: 106308-44-5</p>	<p><b>T2722</b> 5g 25g</p>  <p>2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2',4'-difluoroacetophenone CAS RN: 86404-63-9</p>	<p><b>1,4-二氟苯</b> 1,4-Difluorobenzenes</p>	<p><b>A2106</b> 1g 5g</p>  <p>4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile CAS RN: 112279-61-5</p>	<p><b>B1166</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-2,5-difluorobenzene CAS RN: 399-94-0</p>
<p><b>B2072</b> 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-2,5-difluoroaniline CAS RN: 112279-60-4</p>	<p><b>B2388</b> 1g</p>  <p>4-Bromo-2,5-difluorobenzene-sulfonoyl Chloride CAS RN: 207974-14-9</p>	<p><b>B3097</b> 5g</p>  <p>4-Bromo-2,5-difluoroanisole CAS RN: 202865-60-9</p>	<p><b>B3926</b> 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzene CAS RN: 167415-27-2</p>	<p><b>D1628</b> 5g 25g</p>  <p>1,4-Difluorobenzene CAS RN: 540-36-3</p>
<p><b>D1634</b> 5g 25g</p>  <p>2,5-Difluoroaniline CAS RN: 367-30-6</p>	<p><b>D1699</b> 5g</p>  <p>2,5-Difluorobenzoic Acid CAS RN: 2991-28-8</p>	<p><b>D1700</b> 25g</p>  <p>2,5-Difluoronitrobenzene CAS RN: 364-74-9</p>	<p><b>D1834</b> 5g 25g</p>  <p>2,5-Difluorobenzonitrile CAS RN: 64248-64-2</p>	<p><b>D1864</b> 10g 25g</p>  <p>1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene CAS RN: 327-51-5</p>
<p><b>D2036</b> 5g</p>  <p>2,5-Difluorophenol CAS RN: 2713-31-7</p>	<p><b>D2597</b> 5g 25g</p>  <p>2,5-Difluorobenzyl Bromide CAS RN: 85117-99-3</p>	<p><b>D2607</b> 5g</p>  <p>2',5'-Difluoroacetophenone CAS RN: 1979-36-8</p>	<p><b>D2637</b> 5g 25g</p>  <p>2,5-Difluorobenzaldehyde CAS RN: 2646-90-4</p>	<p><b>D2818</b> 5g</p>  <p>2,5-Difluorobenzyl Alcohol CAS RN: 75853-20-2</p>
<p><b>D3406</b> 5g 25g</p>  <p>2,5-Difluorobenzoyl Chloride CAS RN: 35730-09-7</p>	<p><b>D3436</b> 5g 25g</p>  <p>2,5-Difluorophenylboronic Acid CAS RN: 193353-34-3</p>	<p><b>D3442</b> 5g</p>  <p>2,5-Difluorobenzyl Cyanide CAS RN: 69584-87-8</p>	<p><b>D3594</b> 1g 5g</p>  <p>1,4-Difluoro-2-iodobenzene CAS RN: 2265-92-1</p>	<p><b>D3598</b> 5g</p>  <p>2,5-Difluorobenzophenone CAS RN: 85068-36-6</p>
<p><b>D3695</b> 1g 5g</p>  <p>2,5-Difluorophenyl Isocyanate CAS RN: 39718-32-6</p>	<p><b>D3805</b> 5g</p>  <p>2,5-Difluoroanisole CAS RN: 75626-17-4</p>	<p><b>D4034</b> 1g 5g</p>  <p>2,5-Difluorobenzylamine CAS RN: 85118-06-5</p>	<p><b>D4042</b> 5g 25g</p>  <p>2,5-Difluorotoluene CAS RN: 452-67-5</p>	<p><b>D4060</b> 1g 5g</p>  <p>2,5-Difluorobenzenesulfonamide CAS RN: 120022-63-1</p>
<p><b>D4726</b> 5g 25g</p>  <p>2,5-Difluorobenzyl Chloride CAS RN: 495-07-8</p>	<p><b>D4933</b> 1g 5g</p>  <p>2,5-Difluorobenzotrifluoride CAS RN: 393-38-4</p>	<p><b>三氟芳烃</b> Trifluoro Aromatic Hydrocarbons</p>	<p><b>1,2,3-三氟苯</b> 1,2,3-Trifluorobenzenes</p>	<p><b>B1765</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene CAS RN: 138526-69-9</p>

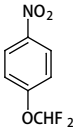
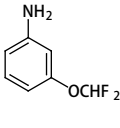
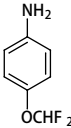
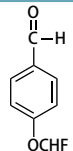
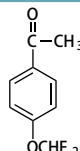
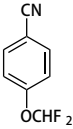
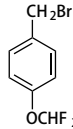
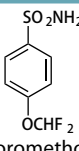
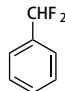
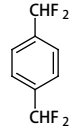
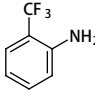
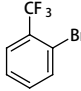
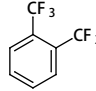
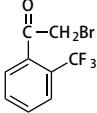
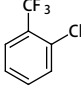
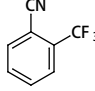
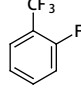
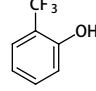
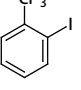
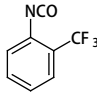
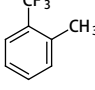
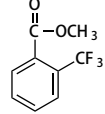
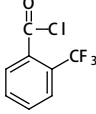
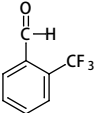
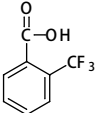
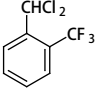
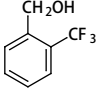
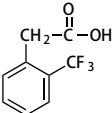
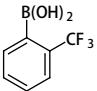
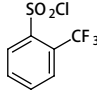
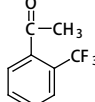
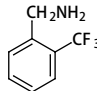
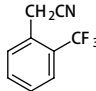
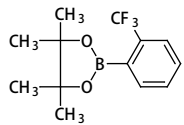
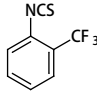
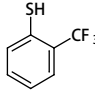
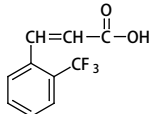
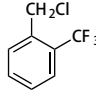
<b>E1078</b> 1g  5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene CAS RN: 158816-55-8	<b>T1385</b> 5g 25g  2,3,4-Trifluoroaniline CAS RN: 3862-73-5	<b>T1539</b> 5g 25g  2,3,4-Trifluoronitrobenzene CAS RN: 771-69-7	<b>T1616</b> 1g 5g  2,3,4-Trifluorophenol CAS RN: 2822-41-5	<b>T1640</b> 1g 5g  3,4,5-Trifluorobenzoic Acid CAS RN: 121602-93-5
<b>T1678</b> 1g 5g  1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzene CAS RN: 176317-02-5	<b>T1867</b> 1g 5g 25g  2,3,4-Trifluorobenzoic Acid CAS RN: 61079-72-9	<b>T1868</b> 5g  2,3,4-Trifluorobenzoyl Chloride CAS RN: 157373-08-5	<b>T1929</b> 1g 5g  2,4,6-Tris(3,4,5-trifluorophenyl)-boroxin CAS RN: 223440-94-6	<b>T2299</b> 5g 25g  3,4,5-Trifluorophenol CAS RN: 99627-05-1
<b>T2305</b> 1g  2,3,4-Trifluorobenzonitrile CAS RN: 143879-80-5	<b>T2316</b> 5g  2,3,4-Trifluorobenzaldehyde CAS RN: 161793-17-5	<b>T2321</b> 1g 5g  3,4,5-Trifluorobenzaldehyde CAS RN: 132123-54-7	<b>T2355</b> 1g 5g  3,4,5-Trifluoroaniline CAS RN: 163733-96-8	<b>T2356</b> 1g 5g  1,2,3-Trifluorobenzene CAS RN: 1489-53-8
<b>T2357</b> 5g 25g  3,4,5-Trifluoronitrobenzene CAS RN: 66684-58-0	<b>T2370</b> 1g 5g  3,4,5-Trifluorobenzonitrile CAS RN: 134227-45-5	<b>T2462</b> 1g 5g  2,3,4-Trifluorobenzyl Bromide CAS RN: 157911-55-2	<b>T2464</b> 1g 5g  3,4,5-Trifluorobenzyl Bromide CAS RN: 220141-72-0	<b>T2574</b> 5g  2,3,4-Trifluorophenylboronic Acid CAS RN: 226396-32-3
<b>T2735</b> 1g 5g  2,3,4-Trifluorotoluene CAS RN: 193533-92-5	<b>T2783</b> 1g 5g  2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline CAS RN: 148416-38-0	<b>1,2,4-三氟苯</b> 1,2,4-Trifluoro-benzenes		<b>B1167</b> 5g 25g  1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene CAS RN: 327-52-6
<b>B2970</b> 1g 5g  1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene CAS RN: 133739-70-5	<b>C2261</b> 5g 25g  3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic Acid CAS RN: 101513-77-3	<b>T1033</b> 5g 25g  1,2,4-Trifluorobenzene CAS RN: 367-23-7	<b>T1456</b> 5g 25g  2,3,6-Trifluorobenzoic Acid CAS RN: 2358-29-4	<b>T1586</b> 5g 25g  2,4,5-Trifluorobenzoic Acid CAS RN: 446-17-3
<b>T1589</b> 5g 25g  2,4,5-Trifluoronitrobenzene CAS RN: 2105-61-5	<b>T1645</b> 5g  2,4,5-Trifluoroaniline CAS RN: 367-34-0	<b>T1653</b> 5g  2,4,5-Trifluorobenzoyl Chloride CAS RN: 88419-56-1	<b>T1917</b> 5g 25g  2,4,5-Trifluoro- <i>m</i> -anisic Acid CAS RN: 112811-65-1	<b>T2060</b> 1g 5g  2,4,5-Trifluoro-1,3-phenylenediamine CAS RN: 321182-37-0
<b>T2318</b> 1g 5g  2,3,6-Trifluorobenzaldehyde CAS RN: 104451-70-9	<b>T2319</b> 1g 5g  2,4,5-Trifluorobenzaldehyde CAS RN: 165047-24-5	<b>T2326</b> 5g 25g  2,4,5-Trifluorobenzonitrile CAS RN: 98349-22-5	<b>T2369</b> 5g  2,3,5-Trifluorobenzonitrile CAS RN: 241154-09-6	<b>T2380</b> 5g 25g  2,4,5-Trifluoro-3-hydroxybenzoic Acid CAS RN: 116751-24-7
<b>T2385</b> 1g 5g  2,3,5-Trifluorobenzoic Acid CAS RN: 654-87-5				

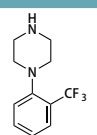
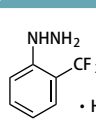
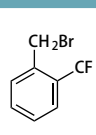
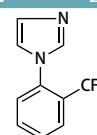
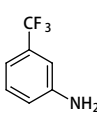
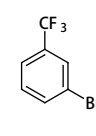
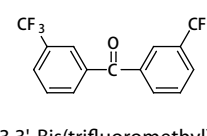
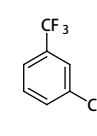
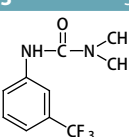
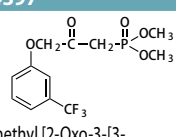
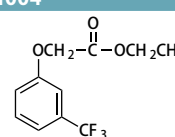
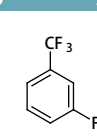
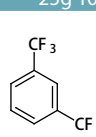
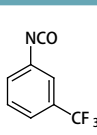
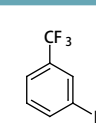
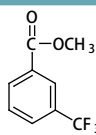
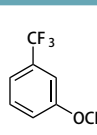
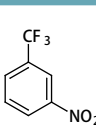
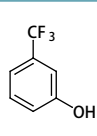
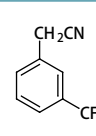
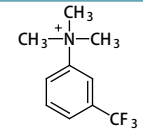
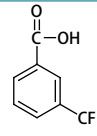
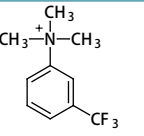
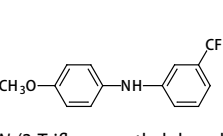
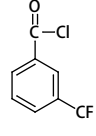
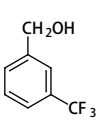
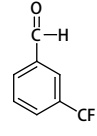
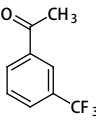
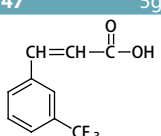
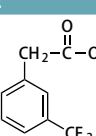
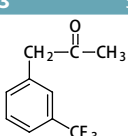
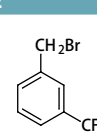
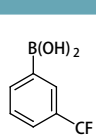
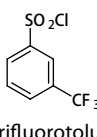
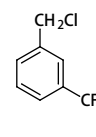
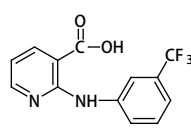
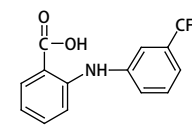
<p><b>T2386</b> 1g 5g</p>  <p>2,4,5-Trifluorobenzyl Bromide CAS RN: 157911-56-3</p>	<p><b>T2407</b> 5g</p>  <p>2,4,5-Trifluorophenylacetic Acid CAS RN: 209995-38-0</p>	<p><b>T2758</b> 1g 5g</p>  <p>2',4',5'-Trifluoroacetophenone CAS RN: 129322-83-4</p>	<p><b>T2793</b> 5g 25g</p>  <p>2,4,5-Trifluorobenzyl Alcohol CAS RN: 144284-25-3</p>	<p><b>T2874</b> 5g</p>  <p>2,3,5-Trifluorophenylboronic Acid CAS RN: 247564-73-4</p>
<p><b>T2889</b> 1g 5g</p>  <p>2,4,5-Trifluorobenzyl Chloride CAS RN: 243139-71-1</p>	<p><b>T3128</b> 1g 5g</p>  <p>2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl Chloride CAS RN: 220227-21-4</p>	<p><b>T3129</b> 1g 5g</p>  <p>2,3,6-Trifluorophenol CAS RN: 113798-74-6</p>	<p><b>1,3,5-三氟苯</b> 1,3,5-Trifluorobenzenes</p>	
<p><b>D2868</b> 5g</p>  <p>1,3-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzene CAS RN: 2368-53-8</p>	<p><b>D2869</b> 5g 25g</p>  <p>3,5-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride CAS RN: 4284-10-0</p>	<p><b>T1038</b> 5g</p>  <p>2,4,6-Trifluoroaniline CAS RN: 363-81-5</p>	<p><b>T1039</b> 5g 25g</p>  <p>1,3,5-Trifluorobenzene CAS RN: 372-38-3</p>	<p><b>T1681</b> 5g 25g</p>  <p>2,4,6-Trifluoronitrobenzene CAS RN: 315-14-0</p>
<p><b>T1908</b> 5g</p>  <p>2,4,6-Trifluorobenzonitrile CAS RN: 96606-37-0</p>	<p><b>T2320</b> 1g 5g</p>  <p>2,4,6-Trifluorobenzaldehyde CAS RN: 58551-83-0</p>	<p><b>T2409</b> 1g</p>  <p>2,4,6-Trifluorobenzoic Acid CAS RN: 28314-80-9</p>	<p><b>T2733</b> 5g 25g</p>  <p>2',4',6'-Trifluoroacetophenone CAS RN: 51788-77-3</p>	<p><b>T2804</b> 1g 5g</p>  <p>2,4,6-Trifluorophenylboronic Acid CAS RN: 182482-25-3</p>
<p><b>多氟芳烃</b> Polyfluoro Aromatic Hydrocarbons</p>		<p><b>四氟苯</b> Tetrafluorobenzenes</p>		<p><b>A0949</b> 1g 5g</p>  <p>4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide CAS RN: 1548-74-9</p>
<p><b>A2674</b> 1g</p>  <p>4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid CAS RN: 122590-77-6</p>	<p><b>B1706</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene CAS RN: 1559-88-2</p>	<p><b>C1727</b> 25g</p>  <p>3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride CAS RN: 4284-09-7</p>	<p><b>D1492</b> 1g 5g</p>  <p>1,3-Dibromotetrafluorobenzene CAS RN: 1559-87-1</p>	<p><b>D1493</b> 5g 25g</p>  <p>1,4-Dibromotetrafluorobenzene CAS RN: 344-03-6</p>
<p><b>D1519</b> 5g</p>  <p>Octafluoro-4,4'-biphenol CAS RN: 2200-70-6</p>	<p><b>D1632</b> 1g 5g</p>  <p>Octafluorobenzidine CAS RN: 1038-66-0</p>	<p><b>D1696</b> 1g 5g</p>  <p>4,4'-Dibromo-octafluorobiphenyl CAS RN: 10386-84-2</p>	<p><b>D2330</b> 1g 5g</p>  <p>4,4'-Dimethoxy-octafluorobiphenyl CAS RN: 2200-71-7</p>	<p><b>O0182</b> 1g 5g</p>  <p>4H,4'H-Octafluorobiphenyl CAS RN: 3883-86-1</p>
<p><b>S0510</b> 1g</p>  <p>4-Sulfo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid CAS RN: 125662-60-4</p>	<p><b>S0836</b> 1g 5g</p>  <p>Sodium 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulfonate CAS RN: 221908-17-4</p>	<p><b>S0952</b> 200mg 1g</p>  <p>N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate CAS RN: 126695-58-7</p>	<p><b>T0790</b> 1g 5g</p>  <p>Fluoranil CAS RN: 527-21-9</p>	<p><b>T0930</b> 1g 5g</p>  <p>Tetrafluoroterephthalic Acid CAS RN: 652-36-8</p>

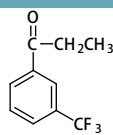
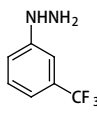
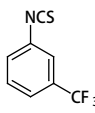
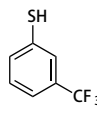
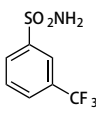
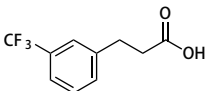
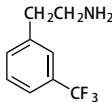
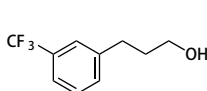
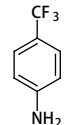
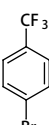
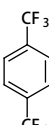
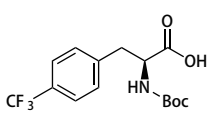
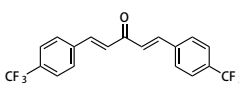
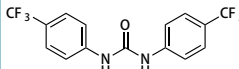
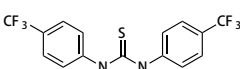
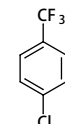
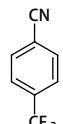
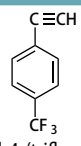
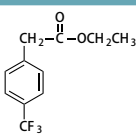
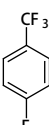
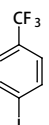
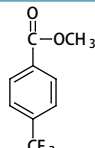
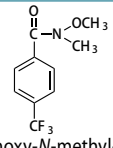
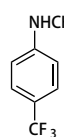
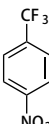
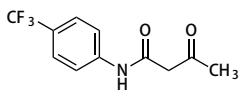
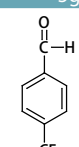
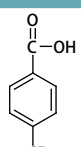
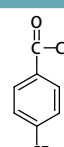
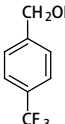
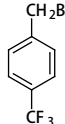
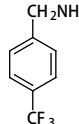
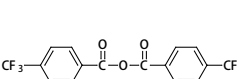
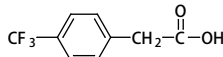
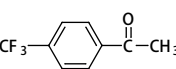
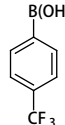
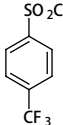
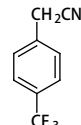
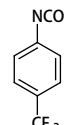
<b>T0986</b> 5g 25g  Tetrafluorophthalic Acid CAS RN: 652-03-9	<b>T1028</b> 5g 25g  2,3,5,6-Tetrafluoroaniline CAS RN: 700-17-4	<b>T1029</b> 5g 25g  1,2,4,5-Tetrafluorobenzene CAS RN: 327-54-8	<b>T1030</b> 5g 25g  2,3,5,6-Tetrafluorophenol CAS RN: 769-39-1	<b>T1041</b> 5g 25g  2,3,5,6-Tetrafluoroanisole CAS RN: 2324-98-3
<b>T1044</b> 5g  2,3,5,6-Tetrafluorobenzenethiol CAS RN: 769-40-4	<b>T1050</b> 1g 5g 25g  Tetrafluoroterephthalonitrile CAS RN: 1835-49-0	<b>T1110</b> 1g  2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-phenylenediamine CAS RN: 1198-64-7	<b>T1374</b> 1g 5g  Tetrafluoroisophthalic Acid CAS RN: 1551-39-9	<b>T1395</b> 5g 25g  2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic Acid CAS RN: 1201-31-6
<b>T1402</b> 5g 25g  Tetrafluorophthalonitrile CAS RN: 1835-65-0	<b>T1529</b> 1g 5g  2,3,5,6-Tetrafluoro-4-aminobenzotrifluoride CAS RN: 651-83-2	<b>T1541</b> 10g  4-Trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene CAS RN: 17823-46-0	<b>T1542</b> 1g 5g  2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzenethiol CAS RN: 651-84-3	<b>T1728</b> 5g 25g  Tetrafluoroisophthalonitrile CAS RN: 2377-81-3
<b>T1802</b> 5g  1,2,3,5-Tetrafluorobenzene CAS RN: 2367-82-0	<b>T1851</b> 1g 5g  Tetrafluoroisophthalamide CAS RN: 153279-27-7	<b>T1853</b> 5g  2,3,4,5-Tetrafluorobenzotrifluoride CAS RN: 654-53-5	<b>T1855</b> 5g 25g  2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl Chloride CAS RN: 94695-48-4	<b>T1857</b> 5g  2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile CAS RN: 5216-17-1
<b>T1862</b> 5g  2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic Acid CAS RN: 16583-08-7	<b>T1881</b> 1g 5g  2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic Acid CAS RN: 652-18-6	<b>T1882</b> 1g 5g  2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile CAS RN: 16582-93-7	<b>T1883</b> 1g 5g  2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl Alcohol CAS RN: 53072-18-7	<b>T1884</b> 1g 5g  2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl Alcohol CAS RN: 4084-38-2
<b>T1885</b> 1g  2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl Bromide CAS RN: 53001-71-1	<b>T1897</b> 1g 5g  2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde CAS RN: 16583-06-5	<b>T1942</b> 1g 5g  2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl Alcohol CAS RN: 53001-70-0	<b>T1947</b> 1g 5g  2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene CAS RN: 703-87-7	<b>T1983</b> 5g  2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol CAS RN: 2787-79-3
<b>T1988</b> 1g  3,4,5,6-Tetrafluorosalicicylic Acid CAS RN: 14742-36-0	<b>T2003</b> 5g  Tetrafluorohydroquinone CAS RN: 771-63-1	<b>T2019</b> 1g 5g  2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine CAS RN: 1198-63-6	<b>T2094</b> 25g 100g  Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoate CAS RN: 122894-73-9	<b>T2323</b> 1g  2,3,5,6-Tetrafluoro-p-toluic Acid CAS RN: 652-32-4
<b>T2410</b> 5g 25g  1,2,3,4-Tetrafluorobenzene CAS RN: 551-62-2	<b>T2542</b> 1g 5g  2,3,5,6-Tetrafluoro-4-mercapto-benzoic Acid CAS RN: 5211-44-9	<b>T2732</b> 5g 25g  2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzene-dimethanol CAS RN: 92339-07-6	<b>T2782</b> 1g 5g  2,3,4,5-Tetrafluoroaniline CAS RN: 5580-80-3	<p style="text-align: center;"><b>五氟苯</b> Pentafluoro-benzenes</p>

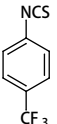
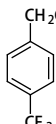
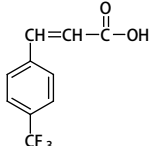
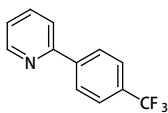
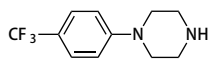
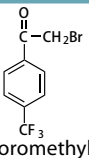
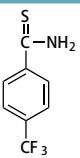
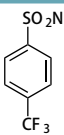
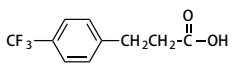
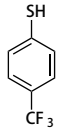
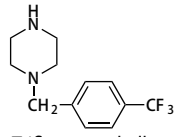
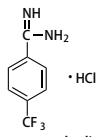
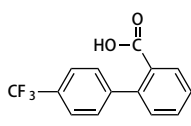
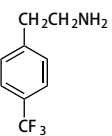
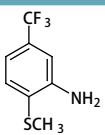
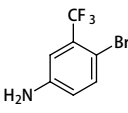
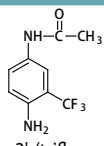
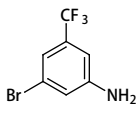
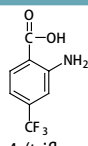
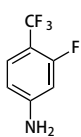
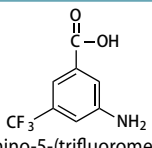
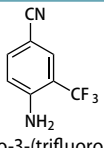
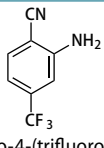
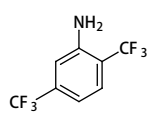
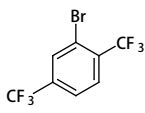
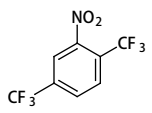
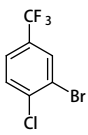
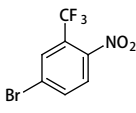
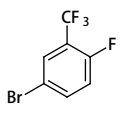
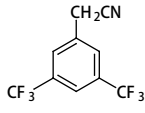
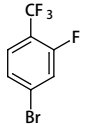
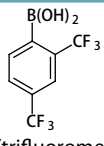
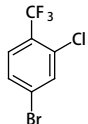
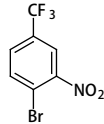
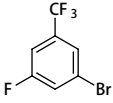
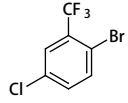
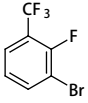
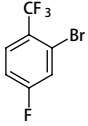
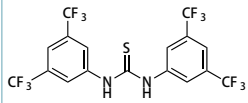
<p><b>A1346</b> 1g 5g</p>  <p>4-Aminononafluorobiphenyl CAS RN: 969-25-5</p>	<p><b>A1611</b> 5g 25g</p>  <p>Allylpentafluorobenzene CAS RN: 1736-60-3</p>	<p><b>A5305</b> 1g</p>  <p>Bis(pentafluorophenyl) Oxalate CAS RN: 16536-48-4</p>	<p><b>B1116</b> 5g 25g</p>  <p>Bromopentafluorobenzene CAS RN: 344-04-7</p>	<p><b>B2277</b> 1g</p>  <p>Bis(pentafluorophenyl)-dimethylsilane CAS RN: 10536-62-6</p>
<p><b>B2291</b> 100mg 1g</p>  <p><math>\alpha,\alpha'</math>-Bis(trifluoromethanesulfonyl)-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene CAS RN: 405074-81-9</p>	<p><b>B3604</b> 5g</p>  <p>Bis(pentafluorophenyl) Carbonate CAS RN: 59483-84-0</p>	<p><b>D1631</b> 1g 5g</p>  <p>Decafluorobenzophenone CAS RN: 853-39-4</p>	<p><b>F0900</b> 200mg 1g</p>  <p>N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)-carbonyl]-pentafluoro-L-phenylalanine CAS RN: 205526-32-5</p>	<p><b>F0936</b> 1g 5g</p>  <p>9-Fluorenylmethyl Pentafluorophenyl Carbonate CAS RN: 88744-04-1</p>
<p><b>M2594</b> 1g</p>  <p>Methyl Pentafluorophenyl Carbonate CAS RN: 36919-03-6</p>	<p><b>P0746</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluorobenzaldehyde CAS RN: 653-37-2</p>	<p><b>P0806</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluorobenzoic Acid CAS RN: 602-94-8</p>	<p><b>P0807</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluorobenzoyl Chloride CAS RN: 2251-50-5</p>	<p><b>P0808</b> 5g 25g</p>  <p>Decafluorobiphenyl CAS RN: 434-90-2</p>
<p><b>P0809</b> 1g 5g 25g</p>  <p>Pentafluorobenzyl Bromide CAS RN: 1765-40-8</p>	<p><b>P0822</b> 1g 5g</p>  <p>O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)-hydroxylamine Hydrochloride CAS RN: 57981-02-9</p>	<p><b>P0849</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluorobenzyl Alcohol CAS RN: 440-60-8</p>	<p><b>P0850</b> 25g</p>  <p>Chloropentafluorobenzene CAS RN: 344-07-0</p>	<p><b>P0852</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluorophenylhydrazine CAS RN: 828-73-9</p>
<p><b>P0854</b> 1mL 5mL</p>  <p>Flophemesyl Chloride CAS RN: 20082-71-7</p>	<p><b>P0856</b> 5g 25g</p>  <p>Octafluorotoluene CAS RN: 434-64-0</p>	<p><b>P0861</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluorobenzenethiol CAS RN: 771-62-0</p>	<p><b>P0862</b> 5g 25g</p>  <p>2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene CAS RN: 653-34-9</p>	<p><b>P0918</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluoroanisole CAS RN: 389-40-2</p>
<p><b>P0919</b> 10g 25g</p>  <p>Pentafluorophenol CAS RN: 771-61-9</p>	<p><b>P0921</b> 5g 25g</p>  <p>2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone CAS RN: 652-29-9</p>	<p><b>P0922</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluoroaniline CAS RN: 771-60-8</p>	<p><b>P0923</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluorobenzene CAS RN: 363-72-4</p>	<p><b>P0924</b> 5g</p>  <p>2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone CAS RN: 1536-23-8</p>
<p><b>P0925</b> 5g</p>  <p>1-(Pentafluorophenyl)ethanol CAS RN: 830-50-2</p>	<p><b>P0929</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluorobenzamide CAS RN: 652-31-3</p>	<p><b>P0934</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluorobenzenesulfonyl Chloride CAS RN: 832-53-1</p>	<p><b>P0935</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluorobenzonitrile CAS RN: 773-82-0</p>	<p><b>P1004</b> 1g</p>  <p>Pentafluorophenylacetic Acid CAS RN: 653-21-4</p>
<p><b>P1188</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluoriodobenzene CAS RN: 827-15-6</p>	<p><b>P1190</b> 100mg 1g 5g</p>  <p>O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)-formaldoxime CAS RN: 86356-73-2</p>	<p><b>P1225</b> 5g</p>  <p>2-(Pentafluorophenoxy)ethanol CAS RN: 2192-55-4</p>	<p><b>P1228</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluoronitrobenzene CAS RN: 880-78-4</p>	<p><b>P1267</b> 1g 5g</p>  <p>Pentafluorophenyl Chlorothionoformate CAS RN: 135192-53-9</p>

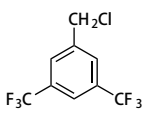
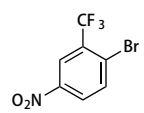
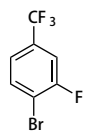
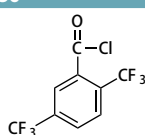
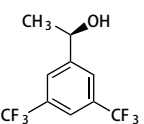
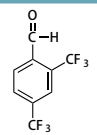
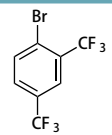
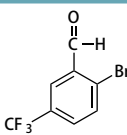
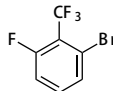
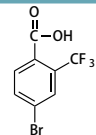
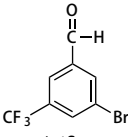
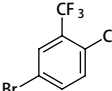
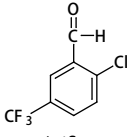
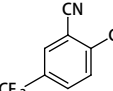
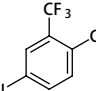
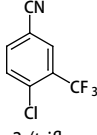
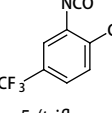
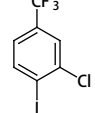
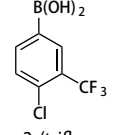
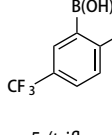
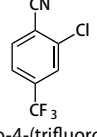
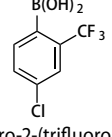
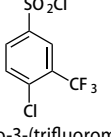
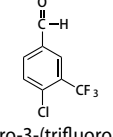
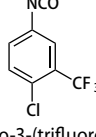
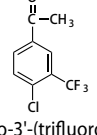
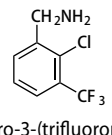
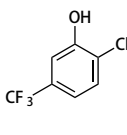
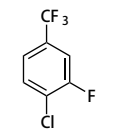
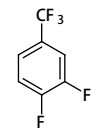
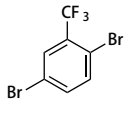
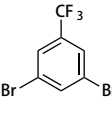
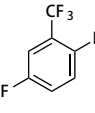
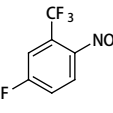
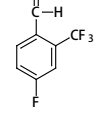
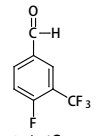
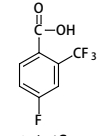
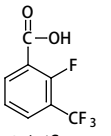
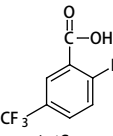
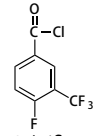
<b>P1343</b> 5g  3-(Pentafluorophenyl)-pentafluoro-1-propene CAS RN: 67899-41-6	<b>P1408</b> 5g 25g  2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene CAS RN: 771-56-2	<b>P1418</b> 5g 25g  Methyl Pentafluorobenzoate CAS RN: 36629-42-2	<b>P1419</b> 5g 25g  Ethyl Pentafluorobenzoate CAS RN: 4522-93-4	<b>P1894</b> 5g 25g  Pentafluorophenyl Trifluoroacetate CAS RN: 14533-84-7	
<b>P1904</b> 1g 5g  Pentafluorophenylboronic Acid CAS RN: 1582-24-7	<b>P2085</b> 200mg 1g  Pentafluoro-L-phenylalanine CAS RN: 34702-59-5	<b>P2179</b> 1g 5g  Pentafluorophenyl Acrylate CAS RN: 71195-85-2	<b>P2188</b> 200mg 1g  Pentafluorophenyl Triflate CAS RN: 60129-85-3	<b>P2192</b> 1g 5g  Pentafluorophenyl Acetate CAS RN: 19220-93-0	
<b>P2229</b> 1g 5g  Pentafluorophenyl Benzoate CAS RN: 1548-84-1	<b>P2231</b> 1g 5g  Pentafluorophenyl 4-Nitrobenzenesulfonate CAS RN: 244633-31-6	<b>P2289</b> 1g 5g  Pentafluorophenyl Methacrylate CAS RN: 13642-97-2	<b>T1204</b> 5g  PFB - Tosylate CAS RN: 32974-36-0	<b>T3012</b> 1g 5g  Trimethyl(pentafluorophenyl)silane CAS RN: 1206-46-8	
<b>T3352</b> 1g 5g  Trimethoxy-(pentafluorophenyl)silane CAS RN: 223668-64-2	<b>其它多氟芳烃</b> Other Polyfluoro Aromatic Hydrocarbons		<b>A1422</b> 1g 5g  9-Trifluoroacetylanthracene CAS RN: 53531-31-0	<b>C1738</b> 1g 5g  4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone CAS RN: 321-37-9	<b>C3139</b> 1g 5g  1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione CAS RN: 18931-60-7
<b>H0085</b> 5g 25g 250g  Hexafluorobenzene CAS RN: 392-56-3	<b>O0158</b> 1g 5g  Octafluoronaphthalene CAS RN: 313-72-4	<b>T0437</b> 25g  4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione CAS RN: 326-06-7	<b>T0741</b> 25g  Phenyl Trifluoroacetate CAS RN: 500-73-2	<b>T0848</b> 5g 25g  2,2,2-Trifluoroacetophenone CAS RN: 434-45-7	
<b>T1520</b> 100mg  (R)-(-)-1-(9-Anthryl)-2,2,2-trifluoroethanol CAS RN: 53531-34-3	<b>T1521</b> 100mg 1g  (S)-(+)-1-(9-Anthryl)-2,2,2-trifluoroethanol CAS RN: 60646-30-2	<b>T1522</b> 1g  2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol CAS RN: 65487-67-4	<b>T1583</b> 5g 25g  4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione CAS RN: 893-33-4	<b>T1973</b> 1g 5g  4-(Trifluoroacetyl)toluene CAS RN: 394-59-2	
<b>T1986</b> 5g 25g  4-(Trifluoroacetyl)anisole CAS RN: 711-38-6	<b>T2547</b> 5g 25g  2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl Chloride CAS RN: 61881-19-4	<b>T2638</b> 5g  2,2,2-Trifluoro-N-(4-methoxyphenyl)acetimidoyl Chloride CAS RN: 75999-66-5	<b>T2997</b> 5g 25g  4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)-1,3-butanedione CAS RN: 720-94-5	<b>T3027</b> 5g 25g  4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic Acid CAS RN: 10009-25-3	
<b>T3283</b> 1g 5g  4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione CAS RN: 15191-68-1	<b>二氟甲基/二氟甲氧基芳烃</b> Difluoromethyl/ Difluoromethoxy Aromatic Hydrocarbons		<b>B4189</b> 1g  1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene CAS RN: 262587-05-3	<b>D4837</b> 1g 5g  2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde CAS RN: 71653-64-0	<b>D5164</b> 1g 5g  3-(Difluoromethoxy)benzylamine CAS RN: 244022-71-7

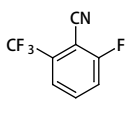
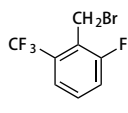
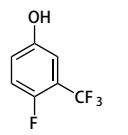
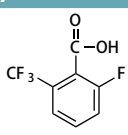
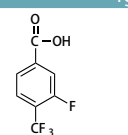
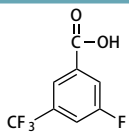
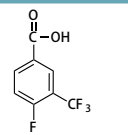
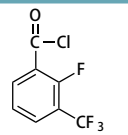
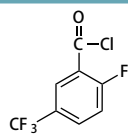
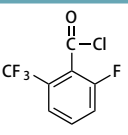
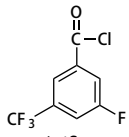
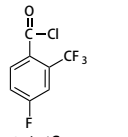
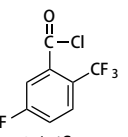
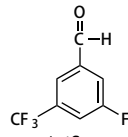
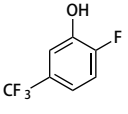
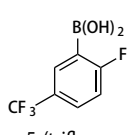
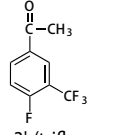
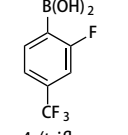
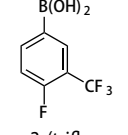
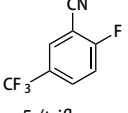
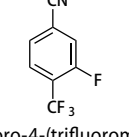
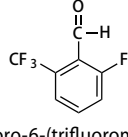
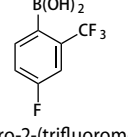
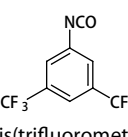
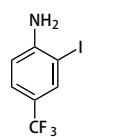
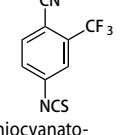
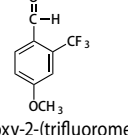
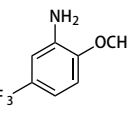
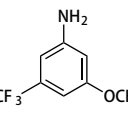
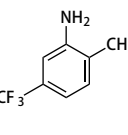
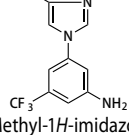
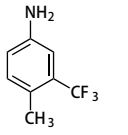
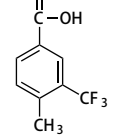
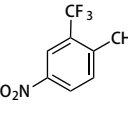
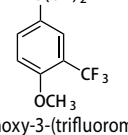
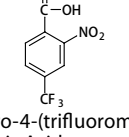
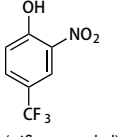
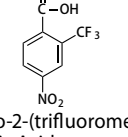
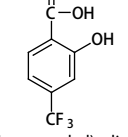
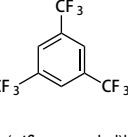
<p><b>D2601</b> 5g</p>  <p>4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene CAS RN: 1544-86-1</p>	<p><b>D3456</b> 5g</p>  <p>3-(Difluoromethoxy)aniline CAS RN: 22236-08-4</p>	<p><b>D3457</b> 5g</p>  <p>4-(Difluoromethoxy)aniline CAS RN: 22236-10-8</p>	<p><b>D4334</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde CAS RN: 73960-07-3</p>	<p><b>D4760</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Difluoromethoxy)acetophenone CAS RN: 83882-67-1</p>		
<p><b>D4955</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Difluoromethoxy)benzotrile CAS RN: 90446-25-6</p>	<p><b>D4956</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Difluoromethoxy)benzyl Bromide CAS RN: 3447-53-8</p>	<p><b>D4778</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonamide CAS RN: 874781-09-6</p>	<p><b>D4915</b> 1g 5g</p>  <p>(Difluoromethyl)benzene CAS RN: 455-31-2</p>	<p><b>T1774</b> 5g 25g</p>  <p><math>\alpha,\alpha,\alpha',\alpha'</math>-Tetrafluoro-<i>p</i>-xylene CAS RN: 369-54-0</p>		
<p><b>三氟甲基芳烃</b> Trifluoromethyl Aromatic Hydrocarbons</p>		<p><b>单取代(o-)三氟甲基苯</b> Monosubstituted (<i>ortho</i>-) Trifluoromethylbenzene</p>		<p><b>A0433</b> 25mL 500mL</p>  <p>2-Aminobenzotrifluoride CAS RN: 88-17-5</p>	<p><b>B0663</b> 25g 250g</p>  <p>2-Bromobenzotrifluoride CAS RN: 392-83-6</p>	<p><b>B3110</b> 5g 25g</p>  <p>1,2-Bis(trifluoromethyl)benzene CAS RN: 433-95-4</p>
<p><b>B4797</b> 1g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)phenacyl Bromide CAS RN: 54109-16-9</p>	<p><b>C0303</b> 25g 500g</p>  <p>2-Chlorobenzotrifluoride CAS RN: 88-16-4</p>	<p><b>C1004</b> 5g 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)benzotrile CAS RN: 447-60-9</p>	<p><b>F0389</b> 5g 25g</p>  <p>2-Fluorobenzotrifluoride CAS RN: 392-85-8</p>	<p><b>H0647</b> 25g</p>  <p>2-Hydroxybenzotrifluoride CAS RN: 444-30-4</p>		
<p><b>I0383</b> 25g</p>  <p>2-Iodobenzotrifluoride CAS RN: 444-29-1</p>	<p><b>I0412</b> 10g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)phenyl Isocyanate CAS RN: 2285-12-3</p>	<p><b>M1215</b> 1g 5g</p>  <p>2-Methylbenzotrifluoride CAS RN: 13630-19-8</p>	<p><b>M2475</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl 2-(Trifluoromethyl)benzoate CAS RN: 344-96-7</p>	<p><b>T1280</b> 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride CAS RN: 312-94-7</p>		
<p><b>T1281</b> 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 447-61-0</p>	<p><b>T1302</b> 10g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 433-97-6</p>	<p><b>T1305</b> 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)benzal Chloride CAS RN: 707-72-2</p>	<p><b>T1311</b> 5g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)benzyl Alcohol CAS RN: 346-06-5</p>	<p><b>T1661</b> 1g 5g 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)phenylacetic Acid CAS RN: 3038-48-0</p>		
<p><b>T1800</b> 1g 5g 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)phenyl-boric Acid CAS RN: 1423-27-4</p>	<p><b>T1892</b> 1g 5g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl Chloride CAS RN: 776-04-5</p>	<p><b>T1899</b> 5g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)acetophenone CAS RN: 17408-14-9</p>	<p><b>T2315</b> 5g 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)benzylamine CAS RN: 3048-01-9</p>	<p><b>T2366</b> 5g 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile CAS RN: 3038-47-9</p>		
<p><b>T2428</b> 5g</p>  <p>2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane CAS RN: 1073339-21-5</p>	<p><b>T2459</b> 1g 5g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate CAS RN: 1743-86-8</p>	<p><b>T2519</b> 1g 5g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)benzenethiol CAS RN: 13333-97-6</p>	<p><b>T2608</b> 5g 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid CAS RN: 2062-25-1</p>	<p><b>T2731</b> 5g 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)benzyl Chloride CAS RN: 21742-00-7</p>		

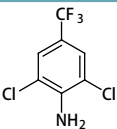
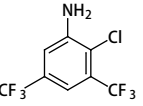
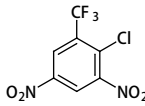
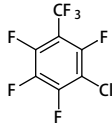
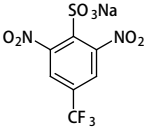
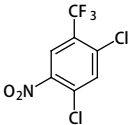
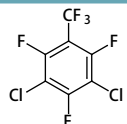
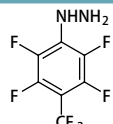
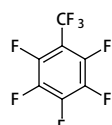
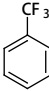
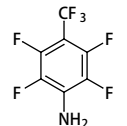
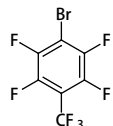
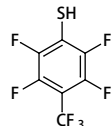
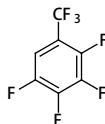
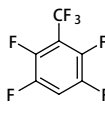
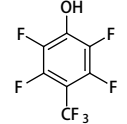
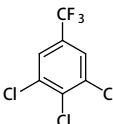
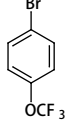
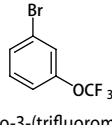
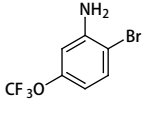
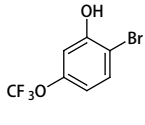
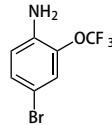
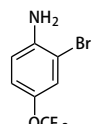
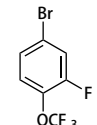
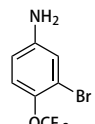
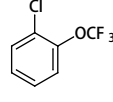
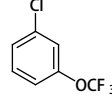
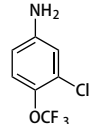
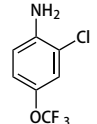
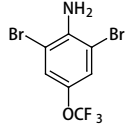
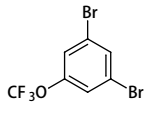
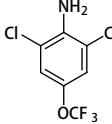
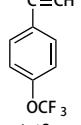
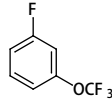
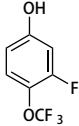
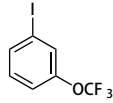
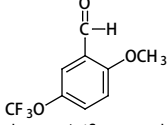
<b>T2739</b> 1g 5g  1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-piperazine CAS RN: 63854-31-9	<b>T2766</b> 5g 25g  2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine Hydrochloride CAS RN: 3107-34-4	<b>T2768</b> 5g 25g  2-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide CAS RN: 395-44-8	<b>T2982</b> 200mg 1g  1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-imidazole CAS RN: 25371-96-4	单取代( <i>m</i> -) 三氟甲基苯 Monosubstituted ( <i>meta</i> -) Trifluoromethyl- benzene
<b>A0434</b> 25g 100g 500g  3-Aminobenzotrifluoride CAS RN: 98-16-8	<b>B0664</b> 25g 250g  3-Bromobenzotrifluoride CAS RN: 401-78-5	<b>B3217</b> 5g  3,3'-Bis(trifluoromethyl)-benzophenone CAS RN: 1868-00-4	<b>C0304</b> 25g 500g  3-Chlorobenzotrifluoride CAS RN: 98-15-7	
<b>D3773</b> 5g 25g  1,1-Dimethyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea CAS RN: 2164-17-2	<b>D4397</b> 1g  Dimethyl [2-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-phosphonate CAS RN: 54094-19-8	<b>E1004</b> 1g  Ethyl 3-(Trifluoromethyl)-phenoxyacetate CAS RN: 22897-99-0	<b>F0390</b> 25g 250g  3-Fluorobenzotrifluoride CAS RN: 401-80-9	<b>H0585</b> 25g 100g 500g  1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene CAS RN: 402-31-3
<b>I0340</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)phenyl Isocyanate CAS RN: 329-01-1	<b>I0385</b> 25g  3-Iodobenzotrifluoride CAS RN: 401-81-0	<b>M1718</b> 5g 25g  Methyl 3-(Trifluoromethyl)benzoate CAS RN: 2557-13-3	<b>M2243</b> 5g 25g  3-Methoxybenzotrifluoride CAS RN: 454-90-0	<b>N0280</b> 25g 500g  3-Nitrobenzotrifluoride CAS RN: 98-46-4
<b>T0436</b> 25g 250g  3-Hydroxybenzotrifluoride CAS RN: 98-17-9	<b>T2367</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile CAS RN: 2338-76-3	<b>T1014</b> 25g  <i>m</i> -TFPTAI CAS RN: 27389-57-7	<b>T1034</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 454-92-2	<b>T1036</b> 25g  3-(Trifluoromethyl)-phenyltrimethylammonium Bromide CAS RN: 262608-95-7
<b>T1326</b> 1g 5g  <i>N</i> -(3-Trifluoromethylphenyl)- <i>p</i> -anisidine CAS RN: 1494-26-4	<b>T1335</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride CAS RN: 2251-65-2	<b>T1342</b> 10g 25g  3-(Trifluoromethyl)benzyl Alcohol CAS RN: 349-75-7	<b>T1399</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 454-89-7	<b>T1546</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)acetophenone CAS RN: 349-76-8
<b>T1547</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid CAS RN: 779-89-5	<b>T1662</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)phenylacetic Acid CAS RN: 351-35-9	<b>T1693</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)phenylacetone CAS RN: 21906-39-8	<b>T1782</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide CAS RN: 402-23-3	<b>T1793</b> 1g 5g  3-(Trifluoromethyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 1423-26-3
<b>T1910</b> 5g 25g  $\alpha,\alpha,\alpha$ -Trifluorotoluene-3-sulfonyl Chloride CAS RN: 777-44-6	<b>T2290</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethyl)benzyl Chloride CAS RN: 705-29-3	<b>T2353</b> 25g  Niflumic Acid CAS RN: 4394-00-7	<b>T2354</b> 25g  Flufenamic Acid CAS RN: 530-78-9	

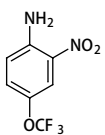
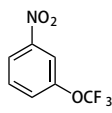
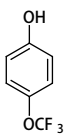
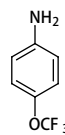
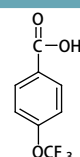
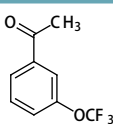
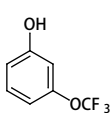
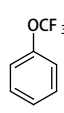
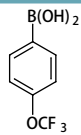
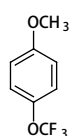
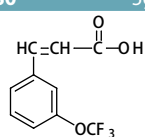
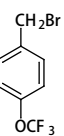
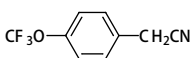
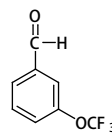
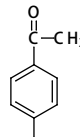
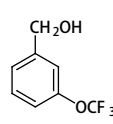
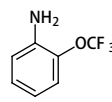
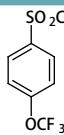
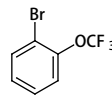
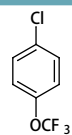
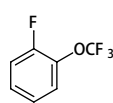
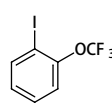
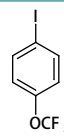
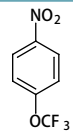
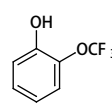
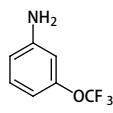
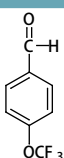
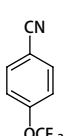
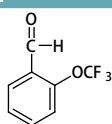
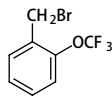
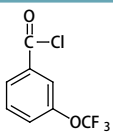
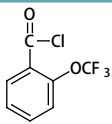
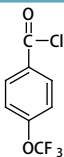
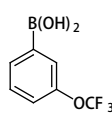
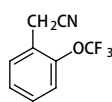
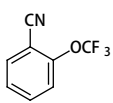
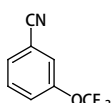
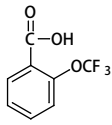
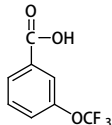
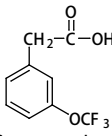
<p><b>T2404</b> 5g 25g</p>  <p>3-(Trifluoromethyl)propionophenone CAS RN: 1533-03-5</p>	<p><b>T2411</b> 1g 5g</p>  <p>3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine CAS RN: 368-78-5</p>	<p><b>T2460</b> 5g</p>  <p>3-(Trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate CAS RN: 1840-19-3</p>	<p><b>T2780</b> 5g 25g</p>  <p>3-(Trifluoromethyl)benzenethiol CAS RN: 937-00-8</p>	<p><b>T2925</b> 1g</p>  <p>3-(Trifluoromethyl)- benzenesulfonamide CAS RN: 672-58-2</p>	
<p><b>T2931</b> 1g 5g</p>  <p>3-(3-Trifluoromethylphenyl)- propionic Acid CAS RN: 585-50-2</p>	<p><b>T3086</b> 1g 5g</p>  <p>3-(Trifluoromethyl)phenethylamine CAS RN: 52516-30-0</p>	<p><b>T3095</b> 1g 5g</p>  <p>3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-propanol CAS RN: 78573-45-2</p>	<p>单取代(<i>p</i>-) 三氟甲基苯 Monosubstituted (<i>para</i>-) Trifluoromethyl- benzene</p>		<p><b>A0662</b> 25mL 100mL</p>  <p>4-Aminobenzotrifluoride CAS RN: 455-14-1</p>
<p><b>B1252</b> 25g 250g</p>  <p>4-Bromobenzotrifluoride CAS RN: 402-43-7</p>	<p><b>B1408</b> 25g 500g</p>  <p>1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene CAS RN: 433-19-2</p>	<p><b>B4369</b> 1g</p>  <p>Boc-Phe(4-CF<sub>3</sub>)-OH CAS RN: 114873-07-3</p>	<p><b>B4468</b> 200mg 1g</p>  <p><i>trans,trans</i>-Bis[4-(trifluoromethyl)- benzal]acetone CAS RN: 103836-71-1</p>	<p><b>B4518</b> 200mg 1g</p>  <p>1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)- phenyl]urea CAS RN: 1960-88-9</p>	
<p><b>B4611</b> 1g 5g</p>  <p>1,3-Bis[4-(trifluoromethyl)- phenyl]thiourea CAS RN: 1744-07-6</p>	<p><b>C0305</b> 25g 500g</p>  <p>4-Chlorobenzotrifluoride CAS RN: 98-56-6</p>	<p><b>C1005</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)benzonitrile CAS RN: 455-18-5</p>	<p><b>E0626</b> 1g 5g</p>  <p>1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)- benzene CAS RN: 705-31-7</p>	<p><b>E1152</b> 1g 5g</p>  <p>Ethyl 4-(Trifluoromethyl)- phenylacetate CAS RN: 721-63-1</p>	
<p><b>F0357</b> 5g 25g</p>  <p>4-Fluorobenzotrifluoride CAS RN: 402-44-8</p>	<p><b>I0550</b> 5g 25g</p>  <p>4-Iodobenzotrifluoride CAS RN: 455-13-0</p>	<p><b>M1498</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzoate CAS RN: 2967-66-0</p>	<p><b>M2762</b> 1g 5g</p>  <p><i>N</i>-Methoxy-<i>N</i>-methyl- 4-(trifluoromethyl)benzamide CAS RN: 116332-61-7</p>	<p><b>M2774</b> 1g 5g</p>  <p><i>N</i>-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline CAS RN: 22864-65-9</p>	
<p><b>N0902</b> 5g 25g</p>  <p>4-Nitrobenzotrifluoride CAS RN: 402-54-0</p>	<p><b>O0444</b> 200mg 1g</p>  <p>3-Oxo-<i>N</i>-(4-trifluoromethyl- phenyl)butyramide CAS RN: 351-87-1</p>	<p><b>T1091</b> 5g 25g 250g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 455-19-6</p>	<p><b>T1145</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 455-24-3</p>	<p><b>T1301</b> 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride CAS RN: 329-15-7</p>	
<p><b>T1312</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)benzyl Alcohol CAS RN: 349-95-1</p>	<p><b>T1313</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide CAS RN: 402-49-3</p>	<p><b>T1508</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)benzylamine CAS RN: 3300-51-4</p>	<p><b>T1593</b> 10g</p>  <p>4-Trifluoromethylbenzoic Anhydride CAS RN: 25753-16-6</p>	<p><b>T1783</b> 1g 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)phenylacetic Acid CAS RN: 32857-62-8</p>	
<p><b>T1784</b> 1g 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)acetophenone CAS RN: 709-63-7</p>	<p><b>T1788</b> 1g 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)- phenylboronic Acid CAS RN: 128796-39-4</p>	<p><b>T1795</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)- benzenesulfonyl Chloride CAS RN: 2991-42-6</p>	<p><b>T2368</b> 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)- phenylacetonitrile CAS RN: 2338-75-2</p>	<p><b>T2403</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)phenyl Isocyanate CAS RN: 1548-13-6</p>	

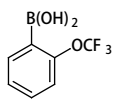
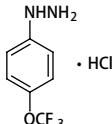
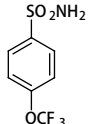
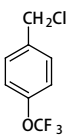
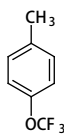
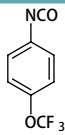
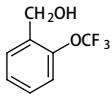
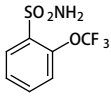
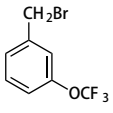
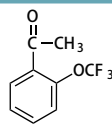
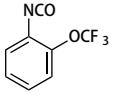
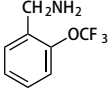
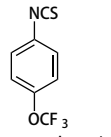
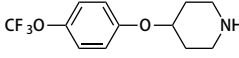
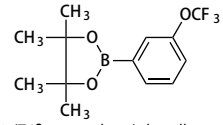
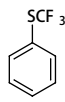
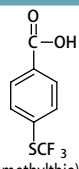
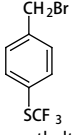
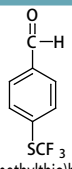
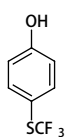
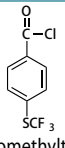
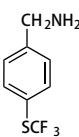
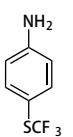
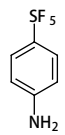
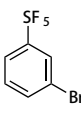
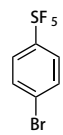
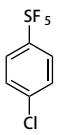
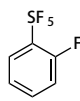
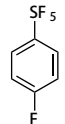
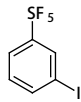
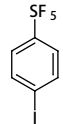
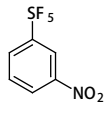
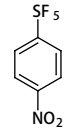
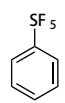
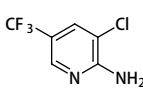
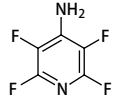
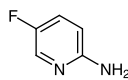
<b>T2461</b> 1g 5g  4-(Trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate CAS RN: 1645-65-4	<b>T2488</b> 5g 25g  4-(Trifluoromethyl)benzyl Chloride CAS RN: 939-99-1	<b>T2499</b> 1g 5g 25g  4-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid CAS RN: 16642-92-5	<b>T2688</b> 1g 5g  2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]- pyridine CAS RN: 203065-88-7	<b>T2741</b> 5g 25g  1-(4-Trifluoromethylphenyl)- piperazine CAS RN: 30459-17-7
<b>T2747</b> 5g 25g  4-(Trifluoromethyl)- phenacyl Bromide CAS RN: 383-53-9	<b>T2771</b> 5g 25g  4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide CAS RN: 72505-21-6	<b>T2847</b> 1g 5g 25g  4-(Trifluoromethyl)- benzenesulfonamide CAS RN: 830-43-3	<b>T2927</b> 1g 5g  3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]- propionic Acid CAS RN: 53473-36-2	<b>T2972</b> 1g 5g  4-(Trifluoromethyl)benzenethiol CAS RN: 825-83-2
<b>T3075</b> 1g 5g  1-(4-Trifluoromethylbenzyl)- piperazine CAS RN: 107890-32-4	<b>T3115</b> 200mg 1g  4-(Trifluoromethyl)- benzamide Hydrochloride CAS RN: 38980-96-0	<b>T3231</b> 1g 5g  4'-(Trifluoromethyl)biphenyl- 2-carboxylic Acid CAS RN: 84392-17-6	<b>T3278</b> 1g 5g  4-(Trifluoromethyl)phenethylamine CAS RN: 775-00-8	二取代 三氟甲基苯 Disubstituted Trifluoromethyl- benzenes
<b>A1666</b> 1g  3-Amino-4-(methylthio)- benzotrifluoride CAS RN: 207974-07-0	<b>A1847</b> 5g 25g  5-Amino-2-bromobenzotrifluoride CAS RN: 393-36-2	<b>A1895</b> 5g  4'-Amino-3'-(trifluoromethyl)- acetanilide CAS RN: 1579-89-1	<b>A1914</b> 5g 25g  3-Amino-5-bromobenzotrifluoride CAS RN: 54962-75-3	<b>A2175</b> 5g 25g  2-Amino-4-(trifluoromethyl)- benzoic Acid CAS RN: 402-13-1
<b>A2469</b> 1g 5g  4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 69411-68-3	<b>A2481</b> 1g  3-Amino-5-(trifluoromethyl)- benzoic Acid CAS RN: 328-68-7	<b>A2644</b> 1g 5g  4-Amino-3-(trifluoromethyl)- benzonitrile CAS RN: 327-74-2	<b>A2648</b> 1g 5g  2-Amino-4-(trifluoromethyl)- benzonitrile CAS RN: 1483-54-1	<b>B2544</b> 5g 25g  2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline CAS RN: 328-93-8
<b>B2545</b> 5g 25g  1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)- benzene CAS RN: 7617-93-8	<b>B2546</b> 5g 25g  1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)- benzene CAS RN: 320-88-7	<b>B2743</b> 25g  3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride CAS RN: 454-78-4	<b>B2853</b> 5g 25g  5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride CAS RN: 344-38-7	<b>B2872</b> 5g 25g  5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 393-37-3
<b>B2911</b> 5g  3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl Cyanide CAS RN: 85068-32-2	<b>B2946</b> 5g 25g  4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 142808-15-9	<b>B3022</b> 1g 5g  2,4-Bis(trifluoromethyl)- phenylboronic Acid CAS RN: 153254-09-2	<b>B3057</b> 5g 25g  4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride CAS RN: 467435-07-0	<b>B3074</b> 5g 25g  4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride CAS RN: 349-03-1
<b>B3106</b> 5g 25g  3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 130723-13-6	<b>B3366</b> 5g 25g  2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride CAS RN: 344-65-0	<b>B3389</b> 1g  3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 144584-67-8	<b>B3397</b> 5g 25g  2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 351003-21-9	<b>B3452</b> 200mg 1g  1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)- phenyl]thiourea CAS RN: 1060-92-0

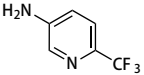
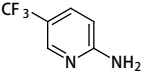
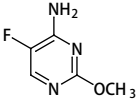
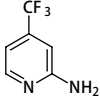
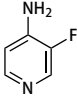
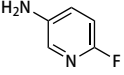
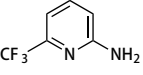
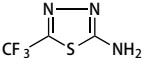
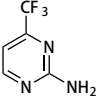
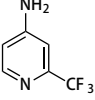
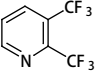
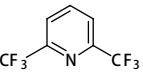
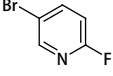
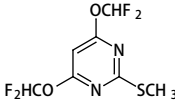
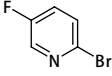
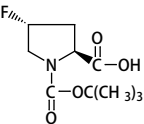
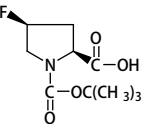
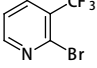
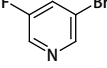
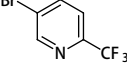
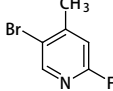
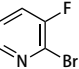
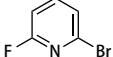
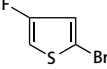
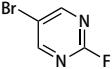
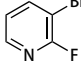
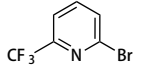
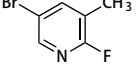
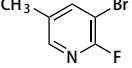
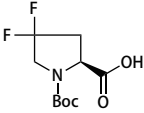
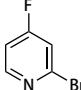
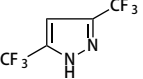
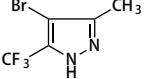
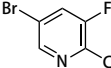
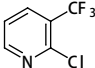
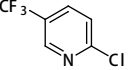
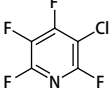
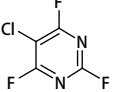
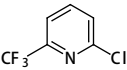
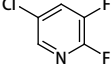
<p><b>B3641</b> 5g 25g</p>  <p>3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl Chloride CAS RN: 75462-59-8</p>	<p><b>B3686</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride CAS RN: 367-67-9</p>	<p><b>B3783</b> 5g 25g</p>  <p>4-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 40161-54-4</p>	<p><b>B3980</b> 1g 5g</p>  <p>2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl Chloride CAS RN: 393-82-8</p>	<p><b>B4131</b> 5g 25g</p>  <p>(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol CAS RN: 127852-28-2</p>
<p><b>B4206</b> 1g 5g</p>  <p>2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 59664-42-5</p>	<p><b>B4207</b> 1g 5g</p>  <p>1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene CAS RN: 327-75-3</p>	<p><b>B4508</b> 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 102684-91-3</p>	<p><b>B4833</b> 1g 5g</p>  <p>2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 261951-85-3</p>	<p><b>B4843</b> 1g 5g</p>  <p>4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 320-31-0</p>
<p><b>B4974</b> 1g 5g</p>  <p>3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 477535-41-4</p>	<p><b>C1846</b> 5g 25g</p>  <p>5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride CAS RN: 445-01-2</p>	<p><b>C2047</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 82386-89-8</p>	<p><b>C2050</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile CAS RN: 328-87-0</p>	<p><b>C2196</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-5-iodobenzotrifluoride CAS RN: 260355-20-2</p>
<p><b>C2246</b> 5g</p>  <p>4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile CAS RN: 1735-54-2</p>	<p><b>C2258</b> 5g</p>  <p>2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate CAS RN: 50528-86-4</p>	<p><b>C2336</b> 1g 5g</p>  <p>3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride CAS RN: 141738-80-9</p>	<p><b>C2571</b> 1g 5g</p>  <p>4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid CAS RN: 176976-42-4</p>	<p><b>C2591</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid CAS RN: 182344-18-9</p>
<p><b>C2599</b> 5g</p>  <p>2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile CAS RN: 1813-33-8</p>	<p><b>C2601</b> 1g 5g</p>  <p>4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid CAS RN: 313545-41-4</p>	<p><b>C2705</b> 1g 5g</p>  <p>4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl Chloride CAS RN: 32333-53-2</p>	<p><b>C2760</b> 1g 5g</p>  <p>4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 34328-46-6</p>	<p><b>C2778</b> 5g 25g</p>  <p>4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate CAS RN: 327-78-6</p>
<p><b>C2821</b> 5g</p>  <p>4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone CAS RN: 129825-11-2</p>	<p><b>C2935</b> 1g</p>  <p>2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine CAS RN: 39226-96-5</p>	<p><b>C2947</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol CAS RN: 40889-91-6</p>	<p><b>C3216</b> 1g 5g</p>  <p>4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride CAS RN: 32137-20-5</p>	<p><b>D3370</b> 5g</p>  <p>3,4-Difluorobenzotrifluoride CAS RN: 32137-19-2</p>
<p><b>D4769</b> 5g 25g</p>  <p>2,5-Dibromobenzotrifluoride CAS RN: 7657-09-2</p>	<p><b>D4807</b> 5g 25g</p>  <p>3,5-Dibromobenzotrifluoride CAS RN: 401-84-3</p>	<p><b>D4933</b> 1g 5g</p>  <p>2,5-Difluorobenzotrifluoride CAS RN: 393-38-4</p>	<p><b>F0497</b> 5g 25g</p>  <p>5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride CAS RN: 393-09-9</p>	<p><b>F0544</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 90176-80-0</p>
<p><b>F0545</b> 1g 5g 25g</p>  <p>4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde CAS RN: 67515-60-0</p>	<p><b>F0577</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 141179-72-8</p>	<p><b>F0619</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 115029-22-6</p>	<p><b>F0620</b> 1g 5g</p>  <p>2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic Acid CAS RN: 115029-23-7</p>	<p><b>F0659</b> 1g 5g</p>  <p>4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl Chloride CAS RN: 67515-56-4</p>

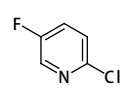
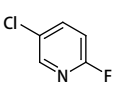
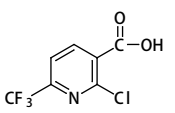
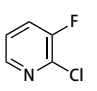
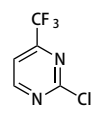
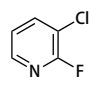
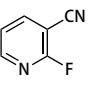
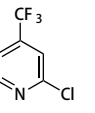
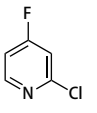
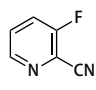
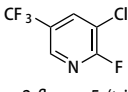
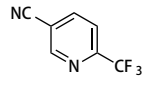
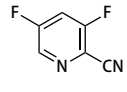
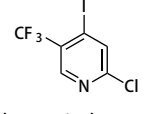
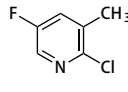
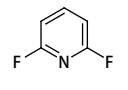
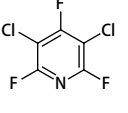
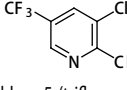
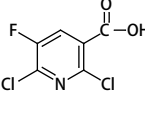
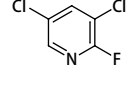
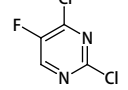
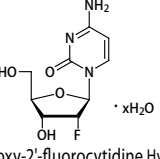
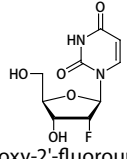
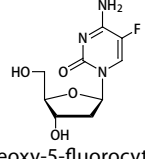
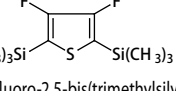
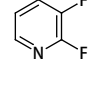
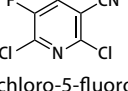
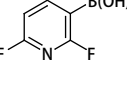
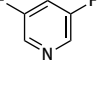
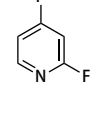
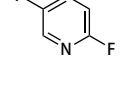
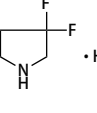
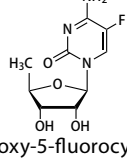
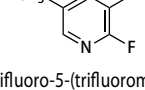
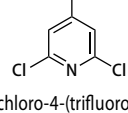
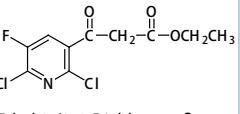
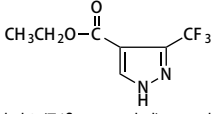
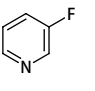
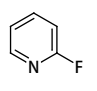
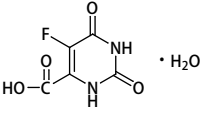
<b>F0701</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-benzonitrile CAS RN: 133116-83-3	<b>F0732</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-benzyl Bromide CAS RN: 239087-08-2	<b>F0754</b> 5g 25g  4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol CAS RN: 61721-07-1	<b>F0757</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-benzoic Acid CAS RN: 32890-94-1	<b>F0758</b> 1g 5g  3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-benzoic Acid CAS RN: 115754-21-7
<b>F0759</b> 1g 5g  3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-benzoic Acid CAS RN: 161622-05-5	<b>F0760</b> 1g 5g  4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-benzoic Acid CAS RN: 67515-55-3	<b>F0762</b> 1g 5g  2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-benzoyl Chloride CAS RN: 208173-19-7	<b>F0764</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-benzoyl Chloride CAS RN: 207981-46-2	<b>F0765</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-benzoyl Chloride CAS RN: 109227-12-5
<b>F0767</b> 1g 5g  3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-benzoyl Chloride CAS RN: 171243-30-4	<b>F0768</b> 1g  4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-benzoyl Chloride CAS RN: 189807-21-4	<b>F0769</b> 1g 5g  5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-benzoyl Chloride CAS RN: 216144-70-6	<b>F0774</b> 1g 5g  3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-benzaldehyde CAS RN: 188815-30-7	<b>F0780</b> 5g 25g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol CAS RN: 141483-15-0
<b>F0788</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 352535-96-7	<b>F0808</b> 1g 5g  4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)-acetophenone CAS RN: 208173-24-4	<b>F0816</b> 1g 5g  2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 503309-11-3	<b>F0830</b> 1g 5g  4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 182344-23-6	<b>F0860</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-benzonitrile CAS RN: 4088-84-0
<b>F1019</b> 1g 5g  3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-benzonitrile CAS RN: 231953-38-1	<b>F1033</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-benzaldehyde CAS RN: 60611-24-7	<b>F1052</b> 1g 5g  4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 182344-16-7	<b>I0766</b> 5g 25g  3,5-Bis(trifluoromethyl)-phenyl Isocyanate CAS RN: 16588-74-2	<b>I0794</b> 5g 25g  2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline CAS RN: 163444-17-5
<b>I0987</b> 1g 5g  4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)-benzonitrile CAS RN: 143782-23-4	<b>M2162</b> 1g 5g  4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-benzaldehyde CAS RN: 106312-36-1	<b>M2212</b> 5g 25g  2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline CAS RN: 349-65-5	<b>M2262</b> 1g 5g  3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline CAS RN: 349-55-3	<b>M2301</b> 1g 5g  2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline CAS RN: 25449-96-1
<b>M2634</b> 1g 5g  3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline CAS RN: 641571-11-1	<b>M2659</b> 1g 5g  4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline CAS RN: 65934-74-9	<b>M2708</b> 1g 5g  3-(Trifluoromethyl)-p-toluic Acid CAS RN: 261952-01-6	<b>M2798</b> 1g 5g  2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride CAS RN: 89976-12-5	<b>M2839</b> 200mg 1g  4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)-phenylboronic Acid CAS RN: 149507-36-8
<b>N0720</b> 5g 25g  2-Nitro-4-(trifluoromethyl)-benzoic Acid CAS RN: 320-94-5	<b>N0779</b> 1g 5g  2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol CAS RN: 400-99-7	<b>N1037</b> 1g 5g  4-Nitro-2-(trifluoromethyl)-benzoic Acid CAS RN: 320-37-6	<b>T2064</b> 5g 25g  4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid CAS RN: 328-90-5	<b>T2830</b> 5g 25g  1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene CAS RN: 729-81-7

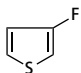
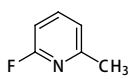
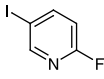
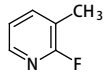
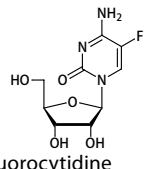
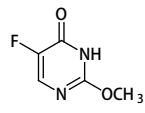
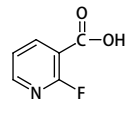
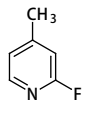
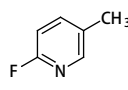
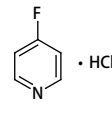
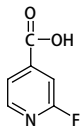
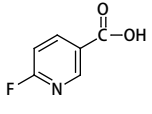
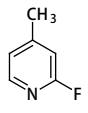
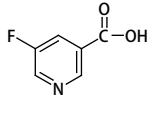
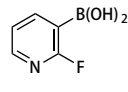
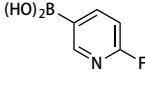
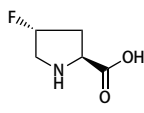
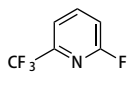
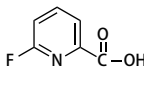
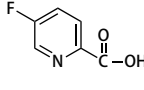
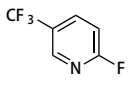
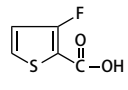
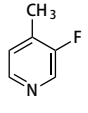
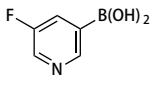
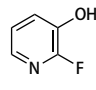
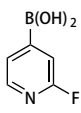
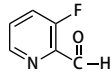
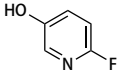
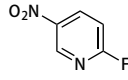
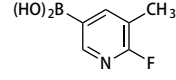
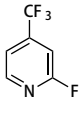
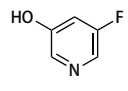
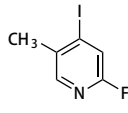
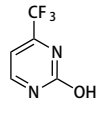
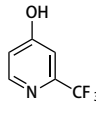
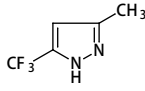
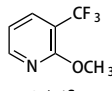
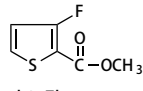
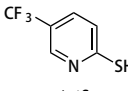
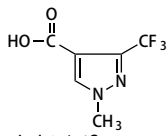
<p>其它 三氟甲基芳烃 Other Trifluoromethyl Aromatic Hydrocarbons</p>	<p><b>A1900</b> 5g 25g  4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride CAS RN: 24279-39-8</p>	<p><b>B2777</b> 25g  3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroaniline CAS RN: 201593-90-0</p>	<p><b>C1036</b> 5g  2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride CAS RN: 392-95-0</p>	<p><b>C1727</b> 25g  3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride CAS RN: 4284-09-7</p>
<p><b>D2011</b> 5g 25g  Sodium 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonate CAS RN: 54495-25-9</p>	<p><b>D2213</b> 25g  2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride CAS RN: 400-70-4</p>	<p><b>D2869</b> 5g 25g  3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoro-benzotrifluoride CAS RN: 4284-10-0</p>	<p><b>H1034</b> 5g  (<math>\alpha,\alpha,2,3,5,6</math>-Heptafluoro-p-tolyl)hydrazine CAS RN: 1868-85-5</p>	
<p><b>P0856</b> 5g 25g  Octafluorotoluene CAS RN: 434-64-0</p>	<p><b>T0439</b> 25g 500g  Benzotrifluoride CAS RN: 98-08-8</p>	<p><b>T1529</b> 1g 5g  2,3,5,6-Tetrafluoro-4-aminobenzotrifluoride CAS RN: 651-83-2</p>	<p><b>T1541</b> 10g  4-Trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene CAS RN: 17823-46-0</p>	<p><b>T1542</b> 1g 5g  2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzenethiol CAS RN: 651-84-3</p>
<p><b>T1853</b> 5g  2,3,4,5-Tetrafluorobenzotrifluoride CAS RN: 654-53-5</p>	<p><b>T1854</b> 5g  2,3,5,6-Tetrafluorobenzotrifluoride CAS RN: 651-80-9</p>	<p><b>T1983</b> 5g  2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol CAS RN: 2787-79-3</p>	<p><b>T2281</b> 5g 25g  3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride CAS RN: 50594-82-6</p>	<p>三氟 甲氧基芳烃 Trifluoromethoxy Aromatic Hydrocarbons</p>
<p><b>B1772</b> 5g 25g  1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 407-14-7</p>	<p><b>B2007</b> 5g 25g  1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 2252-44-0</p>	<p><b>B3107</b> 5g 25g  2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 887267-47-2</p>	<p><b>B3108</b> 5g 25g  2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol CAS RN: 205371-26-2</p>	<p><b>B3786</b> 5g 25g  4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 175278-09-8</p>
<p><b>B3799</b> 5g 25g  2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 175278-17-8</p>	<p><b>B3808</b> 1g 5g  1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 105529-58-6</p>	<p><b>B4190</b> 1g 5g  3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 191602-54-7</p>	<p><b>C2091</b> 25g  1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 450-96-4</p>	<p><b>C2092</b> 25g  1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 772-49-6</p>
<p><b>C2528</b> 5g 25g  3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 64628-73-5</p>	<p><b>C3142</b> 1g 5g  2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 69695-61-0</p>	<p><b>D3038</b> 5g 25g  2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 88149-49-9</p>	<p><b>D3322</b> 5g 25g  1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 207226-31-1</p>	<p><b>D3802</b> 5g 25g  2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 99479-66-0</p>
<p><b>E1170</b> 1g 5g  1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 160542-02-9</p>	<p><b>F0569</b> 5g 25g  1-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 1077-01-6</p>	<p><b>F1009</b> 1g  3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol CAS RN: 177596-38-2</p>	<p><b>I0813</b> 5g  1-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 198206-33-6</p>	<p><b>M1945</b> 5g  2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde CAS RN: 145742-65-0</p>

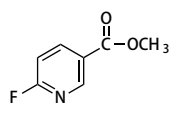
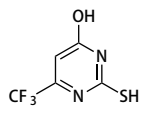

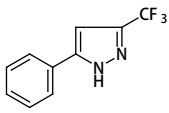
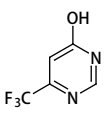
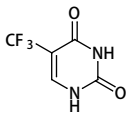
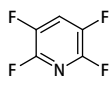
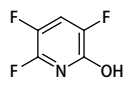
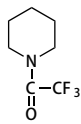
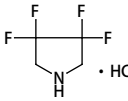
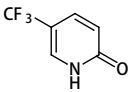
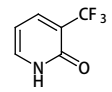
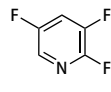
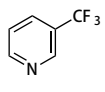
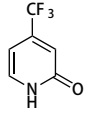
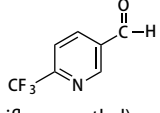
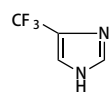
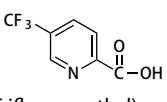
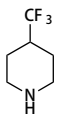
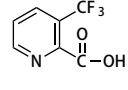
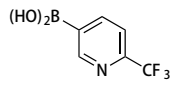
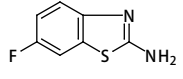
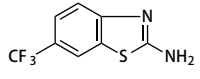
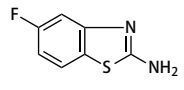
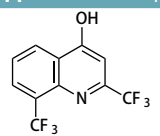
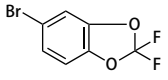
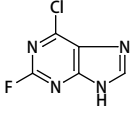
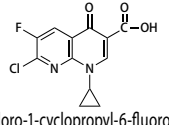
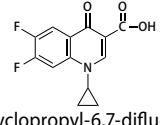
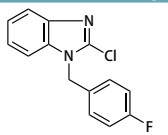
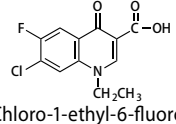
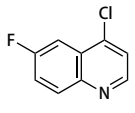
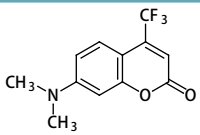
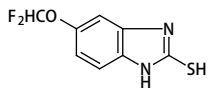
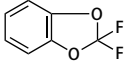
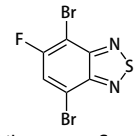
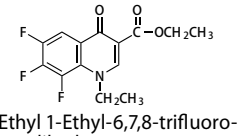
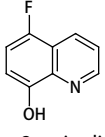
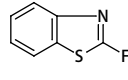
<b>N0841</b> 5g 25g  2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 2267-23-4	<b>N0884</b> 5g 25g  1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 2995-45-1	<b>T1341</b> 5g 25g  4-(Trifluoromethoxy)phenol CAS RN: 828-27-3	<b>T1345</b> 5g 25g  4-(Trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 461-82-5	<b>T1400</b> 1g 5g  4-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid CAS RN: 330-12-1
<b>T1587</b> 1g 5g  3-(Trifluoromethoxy)acetophenone CAS RN: 170141-63-6	<b>T1615</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethoxy)phenol CAS RN: 827-99-6	<b>T1617</b> 25g  (Trifluoromethoxy)benzene CAS RN: 456-55-3	<b>T1773</b> 5g 25g  4-(Trifluoromethoxy)-phenylboronic Acid CAS RN: 139301-27-2	<b>T1779</b> 5g  4-(Trifluoromethoxy)anisole CAS RN: 710-18-9
<b>T1780</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethoxy)cinnamic Acid CAS RN: 168833-80-5	<b>T1781</b> 1g 5g  4-(Trifluoromethoxy)benzyl Bromide CAS RN: 50824-05-0	<b>T1804</b> 1g 5g  4-(Trifluoromethoxy)-phenylacetonitrile CAS RN: 49561-96-8	<b>T1824</b> 5g 25g  3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde CAS RN: 52771-21-8	<b>T1940</b> 5g  4-(Trifluoromethoxy)acetophenone CAS RN: 85013-98-5
<b>T1955</b> 1g 5g  3-(Trifluoromethoxy)benzyl Alcohol CAS RN: 50823-90-0	<b>T2145</b> 5g 25g  2-(Trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 1535-75-7	<b>T2146</b> 5g 25g  4-(Trifluoromethoxy)-benzenesulfonyl Chloride CAS RN: 94108-56-2	<b>T2147</b> 5g 25g  1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)-benzene CAS RN: 64115-88-4	<b>T2149</b> 5g  1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)-benzene CAS RN: 461-81-4
<b>T2150</b> 5g 25g  1-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-benzene CAS RN: 2106-18-5	<b>T2152</b> 5g  1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)-benzene CAS RN: 175278-00-9	<b>T2153</b> 5g 25g  1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)-benzene CAS RN: 103962-05-6	<b>T2155</b> 5g 25g  1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)-benzene CAS RN: 713-65-5	<b>T2156</b> 5g 25g  2-(Trifluoromethoxy)phenol CAS RN: 32858-93-8
<b>T2255</b> 1g 5g  3-(Trifluoromethoxy)aniline CAS RN: 1535-73-5	<b>T2256</b> 5g 25g  4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde CAS RN: 659-28-9	<b>T2292</b> 1g 5g  4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile CAS RN: 332-25-2	<b>T2302</b> 5g  2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde CAS RN: 94651-33-9	<b>T2311</b> 1g 5g  2-(Trifluoromethoxy)benzyl Bromide CAS RN: 198649-68-2
<b>T2334</b> 1g 5g  3-(Trifluoromethoxy)benzoyl Chloride CAS RN: 86270-03-3	<b>T2340</b> 1g 5g  2-(Trifluoromethoxy)benzoyl Chloride CAS RN: 162046-61-9	<b>T2341</b> 1g 5g  4-(Trifluoromethoxy)benzoyl Chloride CAS RN: 36823-88-8	<b>T2362</b> 5g  3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic Acid CAS RN: 179113-90-7	<b>T2365</b> 5g 25g  2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile CAS RN: 137218-25-8
<b>T2371</b> 5g  2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile CAS RN: 63968-85-4	<b>T2372</b> 1g 5g  3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile CAS RN: 52771-22-9	<b>T2382</b> 5g  2-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid CAS RN: 1979-29-9	<b>T2383</b> 1g 5g  3-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid CAS RN: 1014-81-9	<b>T2406</b> 5g  3-(Trifluoromethoxy)-phenylacetic Acid CAS RN: 203302-97-0

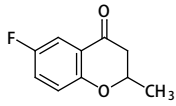
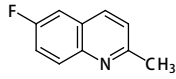
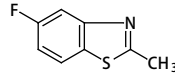
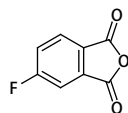
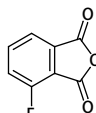
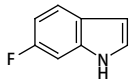
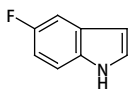
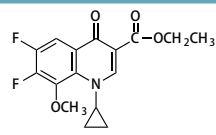
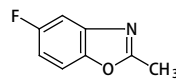
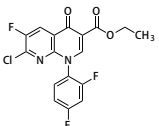
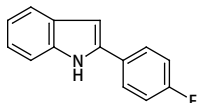
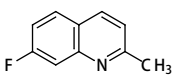
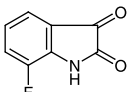
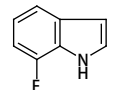
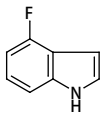
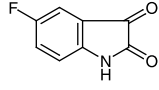
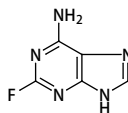
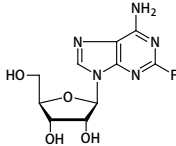
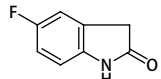
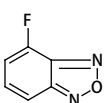
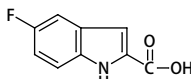
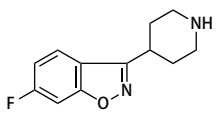
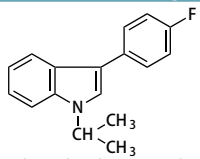
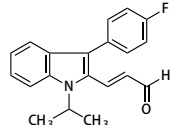
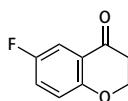
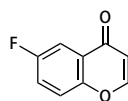
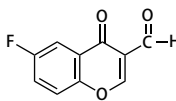
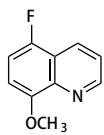
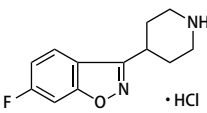
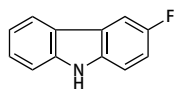
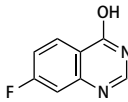
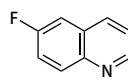
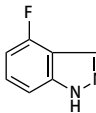
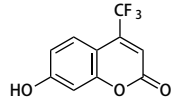
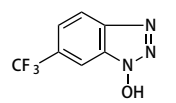
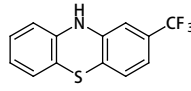
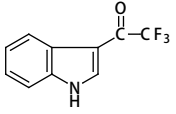
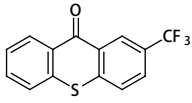
<p><b>T2413</b> 1g 5g</p>  <p>2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic Acid CAS RN: 175676-65-0</p>	<p><b>T2415</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine Hydrochloride CAS RN: 133115-72-7</p>	<p><b>T2427</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide CAS RN: 1513-45-7</p>	<p><b>T2453</b> 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethoxy)benzyl Chloride CAS RN: 65796-00-1</p>	<p><b>T2454</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethoxy)toluene CAS RN: 706-27-4</p>		
<p><b>T2487</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethoxy)phenyl Isocyanate CAS RN: 35037-73-1</p>	<p><b>T2593</b> 1g</p>  <p>2-(Trifluoromethoxy)benzyl Alcohol CAS RN: 175278-07-6</p>	<p><b>T2604</b> 5g 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide CAS RN: 37526-59-3</p>	<p><b>T2730</b> 1g 5g</p>  <p>3-(Trifluoromethoxy)benzyl Bromide CAS RN: 159689-88-0</p>	<p><b>T2794</b> 5g 25g</p>  <p>2-(Trifluoromethoxy)acetophenone CAS RN: 220227-93-0</p>		
<p><b>T2913</b> 1g 5g</p>  <p>2-(Trifluoromethoxy)phenyl Isocyanate CAS RN: 182500-26-1</p>	<p><b>T3092</b> 1g 5g</p>  <p>2-(Trifluoromethoxy)benzylamine CAS RN: 175205-64-8</p>	<p><b>T3341</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethoxy)phenyl Isothiocyanate CAS RN: 64285-95-6</p>	<p><b>T3349</b> 1g 5g</p>  <p>4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine CAS RN: 287952-67-4</p>	<p><b>T3377</b> 1g 5g</p>  <p>3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic Acid Pinacol Ester CAS RN: 262376-31-8</p>		
<p><b>三氟甲硫基芳烃</b> Trifluoromethylthio Aromatic Hydrocarbons</p>						
<p><b>P1693</b> 5g 25g</p>  <p>Phenyl Trifluoromethyl Sulfide CAS RN: 456-56-4</p>	<p><b>T2390</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethylthio)benzoic Acid CAS RN: 330-17-6</p>	<p><b>T2391</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethylthio)benzyl Bromide CAS RN: 21101-63-3</p>	<p><b>T2405</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde CAS RN: 4021-50-5</p>			
<p><b>T2458</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethylthio)phenol CAS RN: 461-84-7</p>	<p><b>T2745</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethylthio)benzoyl Chloride CAS RN: 330-14-3</p>	<p><b>T2763</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethylthio)benzylamine CAS RN: 128273-56-3</p>	<p><b>T2775</b> 5g 25g</p>  <p>4-(Trifluoromethylthio)aniline CAS RN: 372-16-7</p>	<p style="text-align: center;"><b>五氟硫代芳烃</b> Pentafluorosulfanyl Aromatic Hydrocarbons</p>		
<p><b>A2043</b> 1g 5g</p>  <p>4-Aminophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 2993-24-0</p>	<p><b>B3866</b> 1g</p>  <p>3-Bromophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 672-30-0</p>	<p><b>B3867</b> 1g</p>  <p>4-Bromophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 774-93-6</p>	<p><b>C2583</b> 1g</p>  <p>4-Chlorophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 5310-68-9</p>	<p><b>F0823</b> 1g</p>  <p>2-Fluorophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 864230-02-4</p>		
<p><b>F0824</b> 1g</p>  <p>4-Fluorophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 1063625-86-4</p>	<p><b>I0694</b> 1g</p>  <p>3-Iodophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 286947-67-9</p>	<p><b>I0695</b> 1g 5g</p>  <p>4-Iodophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 286947-68-0</p>	<p><b>N0742</b> 1g</p>  <p>3-Nitrophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 2613-26-5</p>	<p><b>N0743</b> 1g 5g</p>  <p>4-Nitrophenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 2613-27-6</p>		
<p><b>P1969</b> 1g</p>  <p>Phenylsulfur Pentafluoride CAS RN: 2557-81-5</p>	<p><b>杂单环化合物</b> Heteromonocyclic Compounds</p>			<p><b>A1157</b> 5g 25g</p>  <p>2-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine CAS RN: 79456-26-1</p>	<p><b>A1546</b> 1g</p>  <p>4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine CAS RN: 1682-20-8</p>	<p><b>A1664</b> 1g 5g</p>  <p>2-Amino-5-fluoropyridine CAS RN: 21717-96-4</p>

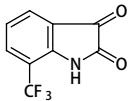
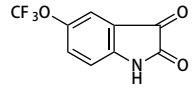
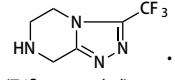
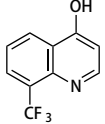
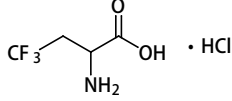
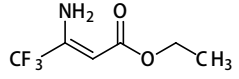
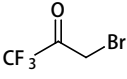
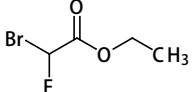
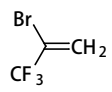
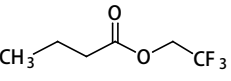
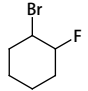
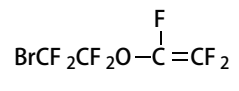
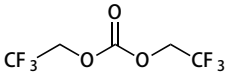
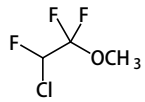
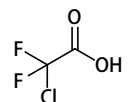
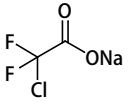
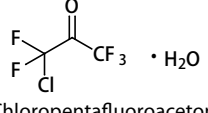
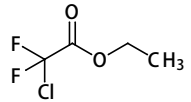
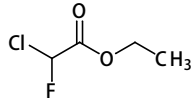
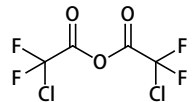
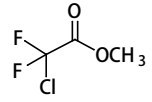
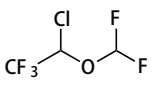
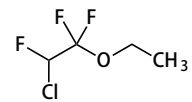
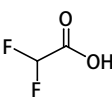
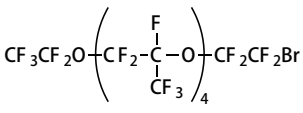
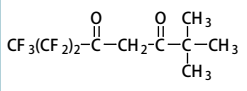
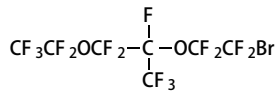
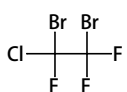
<b>A1816</b> 1g 5g  5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 106877-33-2	<b>A1968</b> 5g 25g  2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 74784-70-6	<b>A2125</b> 5g  4-Amino-5-fluoro-2-methoxy-pyrimidine CAS RN: 1993-63-1	<b>A2168</b> 200mg 1g 5g  2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 106447-97-6	<b>A2383</b> 1g 5g  4-Amino-3-fluoropyridine CAS RN: 2247-88-3
<b>A2384</b> 1g  5-Amino-2-fluoropyridine CAS RN: 1827-27-6	<b>A2435</b> 1g 5g  2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 34486-24-3	<b>A2462</b> 5g 25g  2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole CAS RN: 10444-89-0	<b>A2522</b> 1g 5g  2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine CAS RN: 16075-42-6	<b>A2861</b> 1g  4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 147149-98-2
<b>B2394</b> 1g  2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 1644-68-4	<b>B2395</b> 1g  2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 455-00-5	<b>B2705</b> 5g 25g  5-Bromo-2-fluoropyridine CAS RN: 766-11-0	<b>B2755</b> 5g 25g  4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine CAS RN: 100478-25-9	<b>B2799</b> 5g 25g  2-Bromo-5-fluoropyridine CAS RN: 41404-58-4
<b>B3177</b> 200mg 1g  (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid CAS RN: 203866-14-2	<b>B3178</b> 200mg 1g  (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid CAS RN: 203866-13-1	<b>B3179</b> 1g 5g  2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 175205-82-0	<b>B3244</b> 1g 5g  3-Bromo-5-fluoropyridine CAS RN: 407-20-5	<b>B3451</b> 1g 5g  5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 436799-32-5
<b>B3579</b> 1g 5g  5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine CAS RN: 864830-16-0	<b>B3666</b> 1g 5g  2-Bromo-3-fluoropyridine CAS RN: 40273-45-8	<b>B3667</b> 1g 5g  2-Bromo-6-fluoropyridine CAS RN: 144100-07-2	<b>B3680</b> 200mg 1g  2-Bromo-4-fluorothiophene CAS RN: 32431-65-5	<b>B3685</b> 1g  5-Bromo-2-fluoropyrimidine CAS RN: 62802-38-4
<b>B3721</b> 1g 5g  3-Bromo-2-fluoropyridine CAS RN: 36178-05-9	<b>B3759</b> 1g 5g  2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 189278-27-1	<b>B3775</b> 1g 5g  5-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine CAS RN: 29312-98-9	<b>B4122</b> 1g 5g  3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine CAS RN: 17282-01-8	<b>B4202</b> 200mg 1g  N-Boc-4,4-difluoro-L-proline CAS RN: 203866-15-3
<b>B4760</b> 1g 5g  2-Bromo-4-fluoropyridine CAS RN: 357927-50-5	<b>B4762</b> 1g 5g  3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazole CAS RN: 14704-41-7	<b>B4770</b> 1g  4-Bromo-3-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole CAS RN: 60061-68-9	<b>B5089</b> 5g 25g  5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine CAS RN: 831203-13-5	<b>C1193</b> 5g 25g  2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 65753-47-1
<b>C1194</b> 25g 100g  2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 52334-81-3	<b>C1549</b> 5g 25g  3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine CAS RN: 1735-84-8	<b>C1666</b> 5g 25g  5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine CAS RN: 697-83-6	<b>C1986</b> 1g 5g  2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 39890-95-4	<b>C2113</b> 5g 25g  5-Chloro-2,3-difluoropyridine CAS RN: 89402-43-7

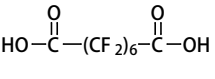
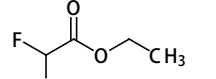
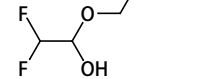
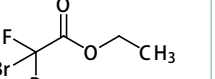
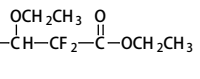
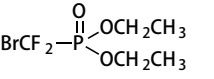
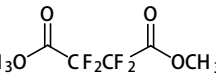
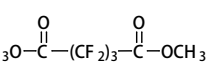
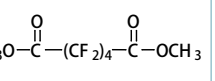
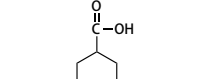
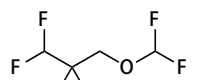
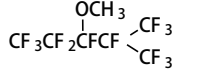
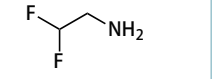
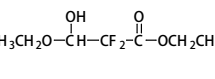
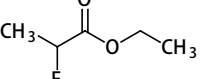
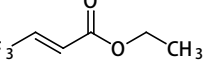
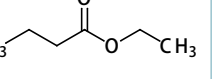
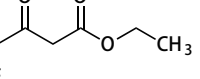
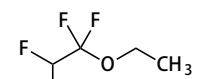
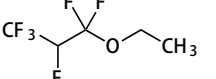
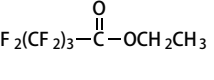
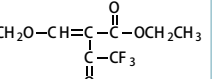
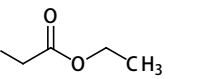
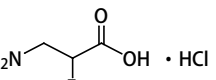
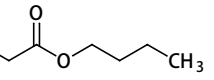
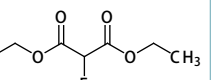
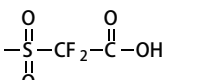
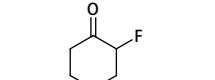
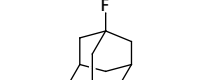
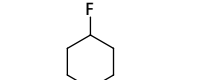
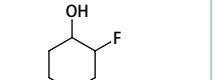
<p><b>C2270</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-5-fluoropyridine CAS RN: 31301-51-6</p>	<p><b>C2303</b> 5g 25g</p>  <p>5-Chloro-2-fluoropyridine CAS RN: 1480-65-5</p>	<p><b>C2425</b> 1g</p>  <p>2-Chloro-6-(trifluoromethyl)-nicotinic Acid CAS RN: 280566-45-2</p>	<p><b>C2447</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-3-fluoropyridine CAS RN: 17282-04-1</p>	<p><b>C2467</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine CAS RN: 33034-67-2</p>
<p><b>C2515</b> 5g 25g</p>  <p>3-Chloro-2-fluoropyridine CAS RN: 1480-64-4</p>	<p><b>C2538</b> 5g 25g</p>  <p>3-Cyano-2-fluoropyridine CAS RN: 3939-13-7</p>	<p><b>C2568</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 81565-18-6</p>	<p><b>C2627</b> 5g</p>  <p>2-Chloro-4-fluoropyridine CAS RN: 34941-91-8</p>	<p><b>C2655</b> 1g 5g</p>  <p>2-Cyano-3-fluoropyridine CAS RN: 97509-75-6</p>
<p><b>C2671</b> 5g</p>  <p>3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 72537-17-8</p>	<p><b>C2698</b> 1g 5g</p>  <p>5-Cyano-2-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 216431-85-5</p>	<p><b>C2753</b> 1g 5g</p>  <p>2-Cyano-3,5-difluoropyridine CAS RN: 298709-29-2</p>	<p><b>C2999</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 505084-55-9</p>	<p><b>C3144</b> 1g 5g</p>  <p>2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine CAS RN: 38186-84-4</p>
<p><b>D1741</b> 5g 25g</p>  <p>2,6-Difluoropyridine CAS RN: 1513-65-1</p>	<p><b>D2057</b> 5g 25g</p>  <p>3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine CAS RN: 1737-93-5</p>	<p><b>D2214</b> 25g</p>  <p>2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 69045-84-7</p>	<p><b>D2610</b> 5g 25g</p>  <p>2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic Acid CAS RN: 82671-06-5</p>	<p><b>D3317</b> 1g 5g</p>  <p>3,5-Dichloro-2-fluoropyridine CAS RN: 823-56-3</p>
<p><b>D3374</b> 5g 25g</p>  <p>2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine CAS RN: 2927-71-1</p>	<p><b>D3614</b> 1g</p>  <p>2'-Deoxy-2'-fluorocytidine Hydrate CAS RN: 10212-20-1</p>	<p><b>D3615</b> 1g 5g</p>  <p>2'-Deoxy-2'-fluorouridine CAS RN: 784-71-4</p>	<p><b>D3642</b> 1g</p>  <p>2'-Deoxy-5-fluorocytidine CAS RN: 10356-76-0</p>	<p><b>D3701</b> 1g</p>  <p>3,4-Difluoro-2,5-bis(trimethylsilyl)thiophene CAS RN: 347838-12-4</p>
<p><b>D3892</b> 1g 5g</p>  <p>2,3-Difluoropyridine CAS RN: 1513-66-2</p>	<p><b>D3972</b> 5g</p>  <p>2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile CAS RN: 82671-02-1</p>	<p><b>D4006</b> 1g 5g</p>  <p>2,6-Difluoro-3-pyridineboronic Acid CAS RN: 136466-94-9</p>	<p><b>D4038</b> 1g 5g</p>  <p>3,5-Difluoropyridine CAS RN: 71902-33-5</p>	<p><b>D4173</b> 1g 5g</p>  <p>2,4-Difluoropyridine CAS RN: 34941-90-7</p>
<p><b>D4174</b> 1g 5g</p>  <p>2,5-Difluoropyridine CAS RN: 84476-99-3</p>	<p><b>D4315</b> 200mg 1g</p>  <p>3,3-Difluoropyrrolidine Hydrochloride CAS RN: 163457-23-6</p>	<p><b>D4342</b> 1g 5g</p>  <p>5'-Deoxy-5-fluorocytidine CAS RN: 66335-38-4</p>	<p><b>D4623</b> 1g 5g</p>  <p>2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 89402-42-6</p>	<p><b>D4684</b> 1g 5g</p>  <p>2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 39890-98-7</p>
<p><b>E0811</b> 5g 25g</p>  <p>Ethyl 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate CAS RN: 96568-04-6</p>	<p><b>E1024</b> 1g 5g</p>  <p>Ethyl 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate CAS RN: 155377-19-8</p>	<p><b>F0207</b> 5g 25g</p>  <p>3-Fluoropyridine CAS RN: 372-47-4</p>	<p><b>F0217</b> 25g 100g</p>  <p>2-Fluoropyridine CAS RN: 372-48-5</p>	<p><b>F0382</b> 100mg 1g</p>  <p>5-Fluoroorotic Acid Monohydrate CAS RN: 703-95-7</p>

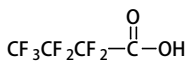
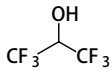
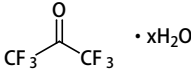
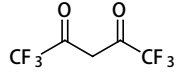
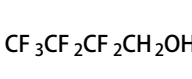
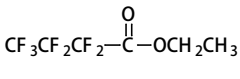
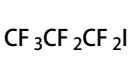
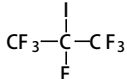
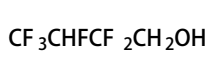
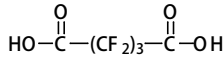
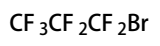
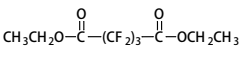
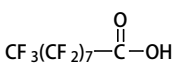
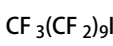
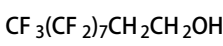
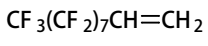
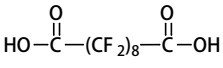
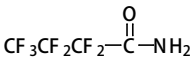
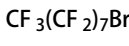
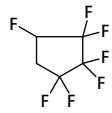
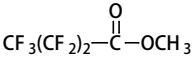
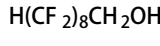
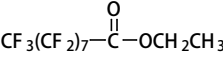
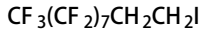
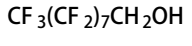
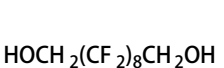
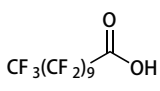
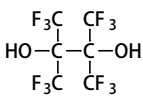
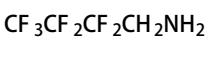
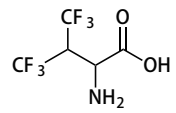
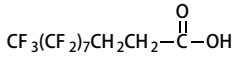
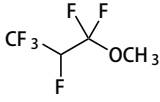
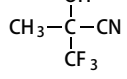
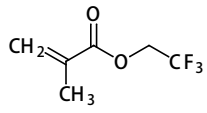
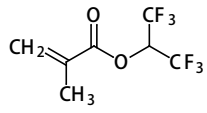
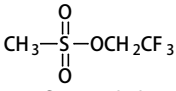
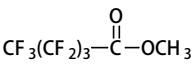
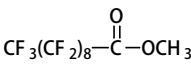
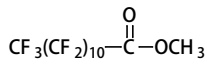
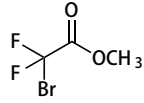
<b>F0512</b> 200mg 1g  3-Fluorothiophene CAS RN: 3093-88-7	<b>F0520</b> 1g 5g  2-Fluoro-6-methylpyridine CAS RN: 407-22-7	<b>F0523</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-iodopyridine CAS RN: 171197-80-1	<b>F0533</b> 1g 5g  2-Fluoro-3-methylpyridine CAS RN: 2369-18-8	<b>F0534</b> 1g  5-Fluorocytidine CAS RN: 2341-22-2
<b>F0547</b> 5g 25g  5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone CAS RN: 1480-96-2	<b>F0575</b> 1g 5g  2-Fluoronicotinic Acid CAS RN: 393-55-5	<b>F0579</b> 5g 25g  2-Fluoro-4-methylpyridine CAS RN: 461-87-0	<b>F0581</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-methylpyridine CAS RN: 2369-19-9	<b>F0628</b> 1g 5g  4-Fluoropyridine Hydrochloride CAS RN: 39160-31-1
<b>F0693</b> 1g 5g  2-Fluoroisonicotinic Acid CAS RN: 402-65-3	<b>F0695</b> 200mg 1g 5g  6-Fluoronicotinic Acid CAS RN: 403-45-2	<b>F0733</b> 1g 5g  2-Fluoro-3-iodopyridine CAS RN: 113975-22-7	<b>F0738</b> 1g 5g  5-Fluoronicotinic Acid CAS RN: 402-66-4	<b>F0739</b> 5g 25g  2-Fluoropyridine-3-boronic Acid CAS RN: 174669-73-9
<b>F0770</b> 1g 5g  2-Fluoropyridine-5-boronic Acid CAS RN: 351019-18-6	<b>F0818</b> 50mg  <i>trans</i> -4-Fluoro-L-proline CAS RN: 2507-61-1	<b>F0826</b> 5g 25g  2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 94239-04-0	<b>F0837</b> 1g 5g  6-Fluoro-2-pyridinecarboxylic Acid CAS RN: 402-69-7	<b>F0838</b> 1g 5g  5-Fluoro-2-pyridinecarboxylic Acid CAS RN: 107504-08-5
<b>F0846</b> 1g 5g  2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 69045-82-5	<b>F0850</b> 1g  3-Fluoro-2-thiophenecarboxylic Acid CAS RN: 32431-84-8	<b>F0852</b> 1g  3-Fluoro-4-methylpyridine CAS RN: 399-88-2	<b>F0859</b> 1g 5g  5-Fluoropyridine-3-boronic Acid CAS RN: 872041-86-6	<b>F0886</b> 1g 5g  2-Fluoro-3-hydroxypyridine CAS RN: 174669-74-0
<b>F0935</b> 1g 5g  2-Fluoropyridine-4-boronic Acid CAS RN: 401815-98-3	<b>F0975</b> 200mg 1g  3-Fluoropicinaldehyde CAS RN: 31224-43-8	<b>F0980</b> 1g 5g  6-Fluoro-3-pyridinol CAS RN: 55758-32-2	<b>F0983</b> 5g 25g  2-Fluoro-5-nitropyridine CAS RN: 456-24-6	<b>F0984</b> 1g  6-Fluoro-5-methyl-3-pyridylboronic Acid CAS RN: 904326-92-7
<b>F0995</b> 1g 5g  2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 118078-66-3	<b>F1020</b> 200mg 1g  5-Fluoro-3-pyridinol CAS RN: 209328-55-2	<b>F1035</b> 1g 5g  6-Fluoro-4-iodo-3-picoline CAS RN: 153034-94-7	<b>H1328</b> 1g 5g  2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-pyrimidine CAS RN: 104048-92-2	<b>H1528</b> 1g 5g  2-(Trifluoromethyl)-4-pyridinol CAS RN: 170886-13-2
<b>M2032</b> 1g 5g  3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole CAS RN: 10010-93-2	<b>M2191</b> 1g 5g  2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)-pyridine CAS RN: 121643-44-5	<b>M2295</b> 1g  Methyl 3-Fluoro-2-thiophenecarboxylate CAS RN: 100421-52-1	<b>M2299</b> 5g 25g  2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)-pyridine CAS RN: 76041-72-0	<b>M2628</b> 1g  1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-pyrazole-4-carboxylic Acid CAS RN: 113100-53-1

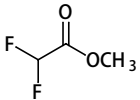
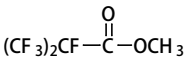
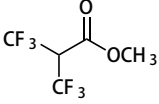
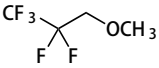
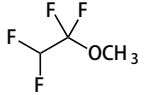
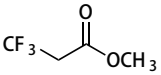
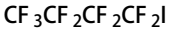
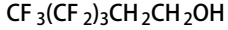
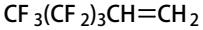
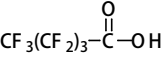
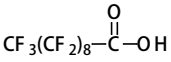
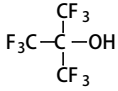
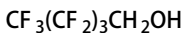
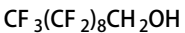
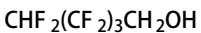
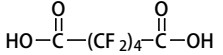
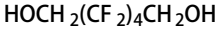
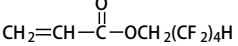
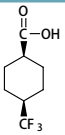
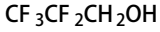
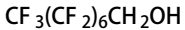
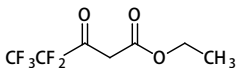
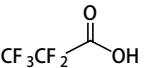
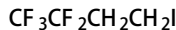
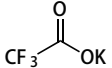
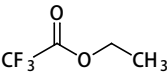
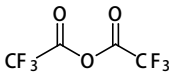

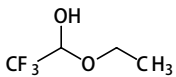
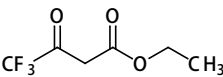
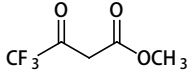
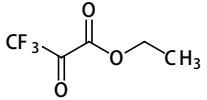
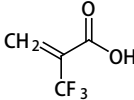
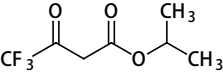
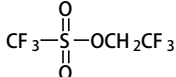
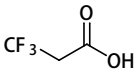
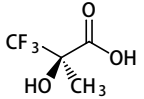
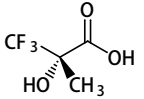
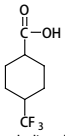
<p><b>M2724</b> 1g 5g</p>  <p>Methyl 6-Fluoronicotinate CAS RN: 1427-06-1</p>	<p><b>M2739</b> 1g 5g</p>  <p>2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol CAS RN: 368-54-7</p>	<p><b>P0926</b> 5g 25g</p>  <p>Pentafluoropyridine CAS RN: 700-16-3</p>	<p><b>P1756</b> 1g 5g</p>  <p>5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole CAS RN: 4027-54-7</p>	<p><b>T1601</b> 5g 25g</p>  <p>6-Trifluoromethyl-4-pyrimidinol CAS RN: 1546-78-7</p>	
<p><b>T1622</b> 1g 5g</p>  <p>5-(Trifluoromethyl)uracil CAS RN: 54-20-6</p>	<p><b>T1778</b> 1g 5g</p>  <p>2,3,5,6-Tetrafluoropyridine CAS RN: 2875-18-5</p>	<p><b>T2061</b> 1g 5g</p>  <p>3,5,6-Trifluoro-2-hydroxypyridine CAS RN: 75777-49-0</p>	<p><b>T2087</b> 5g 25g</p>  <p>1-(Trifluoroacetyl)piperidine CAS RN: 340-07-8</p>	<p><b>T2342</b> 100mg 1g 5g</p>  <p>3,3,4,4-Tetrafluoropyrrolidine Hydrochloride CAS RN: 1810-13-5</p>	
<p><b>T2539</b> 5g 25g</p>  <p>5-(Trifluoromethyl)-2-pyridone CAS RN: 33252-63-0</p>	<p><b>T2600</b> 1g 5g</p>  <p>3-(Trifluoromethyl)-2-pyridone CAS RN: 22245-83-6</p>	<p><b>T2778</b> 5g 25g</p>  <p>2,3,5-Trifluoropyridine CAS RN: 76469-41-5</p>	<p><b>T2786</b> 5g 25g</p>  <p>3-(Trifluoromethyl)pyridine CAS RN: 3796-23-4</p>	<p><b>T2790</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)-2-pyridone CAS RN: 50650-59-4</p>	
<p><b>T2838</b> 1g 5g</p>  <p>6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxaldehyde CAS RN: 386704-12-7</p>	<p><b>T2928</b> 1g</p>  <p>4(5)-(Trifluoromethyl)imidazole CAS RN: 33468-69-8</p>	<p><b>T2975</b> 1g 5g</p>  <p>5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid CAS RN: 80194-69-0</p>	<p><b>T3081</b> 1g 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)piperidine CAS RN: 657-36-3</p>	<p><b>T3155</b> 100mg 500mg</p>  <p>3-(Trifluoromethyl)picolinic Acid CAS RN: 87407-12-3</p>	
<p><b>T3188</b> 1g</p>  <p>2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic Acid CAS RN: 868662-36-6</p>	<p><b>稠杂环化合物</b> Condensed Heterocyclic Compounds</p>		<p><b>A1993</b> 5g</p>  <p>2-Amino-6-fluorobenzothiazole CAS RN: 348-40-3</p>	<p><b>A2461</b> 1g 5g</p>  <p>2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole CAS RN: 777-12-8</p>	<p><b>A2682</b> 1g 5g</p>  <p>2-Amino-5-fluorobenzothiazole CAS RN: 20358-07-0</p>
<p><b>B3714</b> 1g 5g</p>  <p>2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline CAS RN: 35853-41-9</p>	<p><b>B3781</b> 5g 25g</p>  <p>5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole CAS RN: 33070-32-5</p>	<p><b>C2221</b> 1g</p>  <p>6-Chloro-2-fluoropurine CAS RN: 1651-29-2</p>	<p><b>C2650</b> 1g 5g</p>  <p>7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid CAS RN: 100361-18-0</p>	<p><b>C2779</b> 1g</p>  <p>1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid CAS RN: 93107-30-3</p>	
<p><b>C2850</b> 5g 25g</p>  <p>2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-benzimidazole CAS RN: 84946-20-3</p>	<p><b>C2897</b> 1g 5g</p>  <p>7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid CAS RN: 68077-26-9</p>	<p><b>C2989</b> 1g 5g</p>  <p>4-Chloro-6-fluoroquinoline CAS RN: 391-77-5</p>	<p><b>D3356</b> 5g</p>  <p>7-(Dimethylamino)-4-(trifluoro-methyl)coumarin CAS RN: 53518-14-2</p>	<p><b>D3438</b> 25g</p>  <p>5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole CAS RN: 97963-62-7</p>	
<p><b>D4051</b> 5g 25g</p>  <p>2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole CAS RN: 1583-59-1</p>	<p><b>D4750</b> 200mg 1g</p>  <p>4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole CAS RN: 1347736-74-6</p>	<p><b>E0888</b> 5g 25g</p>  <p>Ethyl 1-Ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate CAS RN: 100501-62-0</p>	<p><b>F0038</b> 1g 5g</p>  <p>5-Fluoro-8-quinolinol CAS RN: 387-97-3</p>	<p><b>F0180</b> 1g</p>  <p>2-Fluorobenzothiazole CAS RN: 1123-98-4</p>	

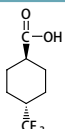
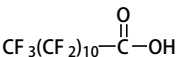
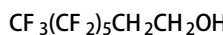
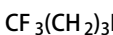

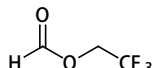
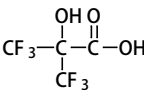
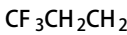
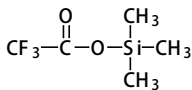
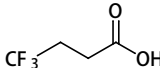
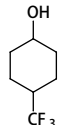
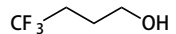
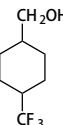
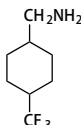
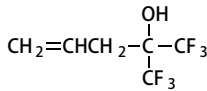
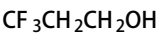
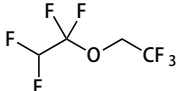
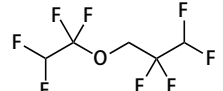
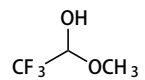
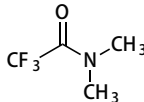
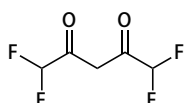

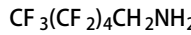
<b>F0271</b> 5g  6-Fluoro-2-methyl-4-chromanone CAS RN: 88754-96-5	<b>F0300</b> 5g  6-Fluoro-2-methylquinoline CAS RN: 1128-61-6	<b>F0316</b> 5g  5-Fluoro-2-methylbenzothiazole CAS RN: 399-75-7	<b>F0322</b> 5g  4-Fluorophthalic Anhydride CAS RN: 319-03-9	<b>F0349</b> 5g 25g  3-Fluorophthalic Anhydride CAS RN: 652-39-1
<b>F0352</b> 1g 5g  6-Fluoroindole CAS RN: 399-51-9	<b>F0369</b> 1g 5g  5-Fluoroindole CAS RN: 399-52-0	<b>E1147</b> 1g 5g  Ethyl 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylate CAS RN: 112811-71-9	<b>F0420</b> 1g 5g  5-Fluoro-2-methylbenzoxazole CAS RN: 701-16-6	
<b>E1180</b> 5g 25g  Ethyl 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate CAS RN: 100491-29-0	<b>F0427</b> 5g  2-(4-Fluorophenyl)indole CAS RN: 782-17-2	<b>F0519</b> 1g 5g  7-Fluoro-2-methylquinoline CAS RN: 1128-74-1	<b>F0551</b> 5g 25g  7-Fluoroisatin CAS RN: 317-20-4	
<b>F0555</b> 1g  7-Fluoroindole CAS RN: 387-44-0	<b>F0556</b> 1g  4-Fluoroindole CAS RN: 387-43-9	<b>F0589</b> 5g 25g  5-Fluoroisatin CAS RN: 443-69-6	<b>F0647</b> 200mg 1g  2-Fluoroadenine CAS RN: 700-49-2	<b>F0656</b> 200mg 1g  2-Fluoroadenosine CAS RN: 146-78-1
<b>F0699</b> 1g 5g  5-Fluorooxindole CAS RN: 56341-41-4	<b>F0702</b> 1g 5g  4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole CAS RN: 29270-55-1	<b>F0716</b> 1g 5g  5-Fluoroindole-2-carboxylic Acid CAS RN: 399-76-8	<b>F0735</b> 5g 25g  6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole CAS RN: 84163-77-9	<b>F0743</b> 5g 25g  3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole CAS RN: 93957-49-4
<b>F0819</b> 5g 25g  (E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein CAS RN: 93957-50-7	<b>F0831</b> 1g 5g  6-Fluoro-4-chromanone CAS RN: 66892-34-0	<b>F0904</b> 1g  6-Fluorochromone CAS RN: 105300-38-7	<b>F0905</b> 1g  6-Fluoro-3-formylchromone CAS RN: 69155-76-6	<b>F0909</b> 1g 5g  5-Fluoro-8-methoxyquinoline CAS RN: 439-88-3
<b>F0944</b> 1g 5g  6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride CAS RN: 84163-13-3	<b>F0965</b> 1g  3-Fluorocarbazole CAS RN: 391-45-7	<b>F1029</b> 1g 5g  7-Fluoro-4-quinazolinol CAS RN: 16499-57-3	<b>F1034</b> 1g 5g  6-Fluoroquinoline CAS RN: 396-30-5	<b>F1037</b> 1g  4-Fluoroindazole CAS RN: 341-23-1
<b>H1422</b> 1g 5g  4-(Trifluoromethyl)umbelliferone CAS RN: 575-03-1	<b>H1454</b> 1g 5g  1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)-benzotriazole CAS RN: 26198-21-0	<b>T1407</b> 25g  2-(Trifluoromethyl)phenothiazine CAS RN: 92-30-8	<b>T1809</b> 1g 5g  3-(Trifluoroacetyl)indole CAS RN: 14618-45-2	<b>T2384</b> 5g 25g  2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one CAS RN: 1693-28-3

<p><b>T2457</b> 1g 5g</p>  <p>7-(Trifluoromethyl)isatin CAS RN: 391-12-8</p>	<p><b>T2774</b> 1g 5g</p>  <p>5-(Trifluoromethoxy)isatin CAS RN: 169037-23-4</p>	<p><b>T2998</b> 1g 5g</p>  <p>3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine Hydrochloride CAS RN: 762240-92-6</p>	<p><b>T3160</b> 1g 5g</p>  <p>8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol CAS RN: 23779-96-6</p>	<p>脂肪族化合物 Aliphatic Compounds</p>
<p><b>A1367</b> 100mg 1g</p>  <p>2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric Acid Hydrochloride CAS RN: 15959-93-0</p>	<p><b>A1475</b> 5g 25g</p>  <p>Ethyl 3-Amino-4,4,4-trifluorocrotonate CAS RN: 372-29-2</p>	<p><b>B1240</b> 5g 25g</p>  <p>1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone CAS RN: 431-35-6</p>	<p><b>B1293</b> 1g 5g</p> <p><math>\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CF}_3</math></p> <p>Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ether CAS RN: 333-36-8</p>	
<p><b>B1673</b> 5g 25g</p>  <p>Ethyl Bromofluoroacetate CAS RN: 401-55-8</p>	<p><b>B1801</b> 5g 25g</p>  <p>2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene CAS RN: 1514-82-5</p>	<p><b>B2144</b> 5g 25g</p>  <p>2,2,2-Trifluoroethyl Butyrate CAS RN: 371-27-7</p>	<p><b>B2333</b> 1g 5g</p> <p><math>\text{BrCF}_2\text{CH}=\text{CH}_2</math></p> <p>3-Bromo-3,3-difluoropropene CAS RN: 420-90-6</p>	<p><b>B3053</b> 1g</p>  <p>1-Bromo-2-fluorocyclohexane CAS RN: 656-57-5</p>
<p><b>B3222</b> 5g 25g</p> <p><math>\text{BrCF}_2\text{CF}_2\text{CH}=\text{CH}_2</math></p> <p>4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene CAS RN: 18599-22-9</p>	<p><b>B4169</b> 5g</p>  <p>2-Bromotetrafluoroethyl Trifluorovinyl Ether CAS RN: 85737-06-0</p>	<p><b>B4703</b> 5g 25g</p>  <p>Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate CAS RN: 1513-87-7</p>	<p><b>C0853</b> 5g</p>  <p>2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl Methyl Ether CAS RN: 425-87-6</p>	<p><b>C0990</b> 25g 500g</p>  <p>Chlorodifluoroacetic Acid CAS RN: 76-04-0</p>
<p><b>C0991</b> 25g 100g 500g</p>  <p>Sodium Chlorodifluoroacetate CAS RN: 1895-39-2</p>	<p><b>C0993</b> 1g 5g</p>  <p>Chloropentafluoroacetone Monohydrate CAS RN: 6984-99-2</p>	<p><b>C1458</b> 25g 500g</p>  <p>Ethyl Chlorodifluoroacetate CAS RN: 383-62-0</p>	<p><b>C1467</b> 5g 25g</p>  <p>Ethyl Chlorofluoroacetate CAS RN: 401-56-9</p>	<p><b>C1503</b> 10g 25g</p>  <p>Chlorodifluoroacetic Anhydride CAS RN: 2834-23-3</p>
<p><b>C1586</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl Chlorodifluoroacetate CAS RN: 1514-87-0</p>	<p><b>C2355</b> 1g 5g</p> <p><math>\text{Cl}(\text{CF}_2)_8\text{C}(=\text{O})\text{OH}</math></p> <p>9-Chlorohexadecafluorononanoic Acid CAS RN: 865-79-2</p>	<p><b>C2356</b> 5g</p> <p><math>\text{ClCF}_2\text{CF}_2\text{C}(=\text{O})\text{OH}</math></p> <p>3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic Acid CAS RN: 661-82-5</p>	<p><b>C2485</b> 5g 25g</p>  <p>Isoflurane CAS RN: 26675-46-7</p>	<p><b>C2862</b> 5g</p>  <p>2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl Ethyl Ether CAS RN: 310-71-4</p>
<p><b>D1101</b> 25g 100g</p> <p><math>\text{H}(\text{CF}_2)_6\text{CH}_2\text{OH}</math></p> <p>1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol CAS RN: 335-99-9</p>	<p><b>D1423</b> 5g 25g</p>  <p>Difluoroacetic Acid CAS RN: 381-73-7</p>	<p><b>B4167</b> 1g 5g</p>  <p>1-Bromo-1,1,2,2,4,5,5,7,8,8,10,11,11,13,14,14,16,16,17,17,17-henicosafuoro-4,7,10,13-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaaxaheptadecane CAS RN: 1482416-52-3</p>	<p><b>D1729</b> 5g</p>  <p>2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8-heptafluoro-3,5-octanedione CAS RN: 17587-22-3</p>	
<p><b>B4168</b> 1g 5g</p>  <p>2-(2-Bromo-1,1,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(pentafluoroethoxy)propane CAS RN: 1482416-44-3</p>	<p><b>D2220</b> 25g</p>  <p>1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroethane CAS RN: 354-51-8</p>	<p><b>D2329</b> 5g 25g</p> <p><math>\text{I}(\text{CF}_2)_4\text{I}</math></p> <p>Octafluoro-1,4-diiodobutane CAS RN: 375-50-8</p>	<p><b>D2333</b> 10g</p> <p><math>\text{I}(\text{CF}_2)_6\text{I}</math></p> <p>Dodecafluoro-1,6-diiodohexane CAS RN: 375-80-4</p>	

<b>D2465</b> 5g 25g  Dodecafluorosuberic Acid CAS RN: 678-45-5	<b>D2498</b> 5g 25g  Ethyl Difluoroacetate CAS RN: 454-31-9	<b>D2523</b> 5g 25g  Difluoroacetaldehyde Ethyl Hemiacetal CAS RN: 148992-43-2	<b>D2530</b> 5g 25g  Ethyl Dibromofluoroacetate CAS RN: 565-53-7	<b>D2782</b> 1g 5g  Ethyl 3-(Dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate CAS RN: 141546-96-5
<b>D2804</b> 5g 25g Cl(CF <sub>2</sub> ) <sub>8</sub> Cl 1,8-Dichloroperfluorooctane CAS RN: 647-25-6	<b>D2891</b> 5g HOCH <sub>2</sub> (CF <sub>2</sub> ) <sub>6</sub> CH <sub>2</sub> OH 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1,8-octanediol CAS RN: 90177-96-1	<b>D3071</b> 5g 25g  Diethyl (Bromodifluoromethyl)-phosphonate CAS RN: 65094-22-6	<b>D3572</b> 1g 5g Br(CF <sub>2</sub> ) <sub>6</sub> Br 1,6-Dibromododecafluorohexane CAS RN: 918-22-9	<b>D3573</b> 5g Br(CF <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> Br 1,4-Dibromooctafluorobutane CAS RN: 335-48-8
<b>D3587</b> 1g 5g Br(CF <sub>2</sub> ) <sub>8</sub> Br 1,8-Dibromohexadecafluorooctane CAS RN: 812-58-8	<b>D3588</b> 1g 5g  Dimethyl Tetrafluorosuccinate CAS RN: 356-36-5	<b>D3589</b> 1g 5g  Dimethyl Hexafluoroglutarate CAS RN: 1513-62-8	<b>D3590</b> 1g 5g  Dimethyl Octafluoroadipate CAS RN: 3107-98-0	<b>D4128</b> 5g 25g CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH 2,2-Difluoroethanol CAS RN: 359-13-7
<b>D4330</b> 1g 5g  4,4-Difluorocyclohexane-carboxylic Acid CAS RN: 122665-97-8	<b>D4472</b> 1g 5g  Difluoromethyl 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ether CAS RN: 35042-99-0	<b>D4484</b> 25g 500g  1,1,1,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane CAS RN: 132182-92-4	<b>D4758</b> 1g 5g  2,2-Difluoroethylamine CAS RN: 430-67-1	<b>E0239</b> 10g H(CF <sub>2</sub> ) <sub>10</sub> CH <sub>2</sub> OH 1H,1H,11H-Eicosafuoro-1-undecanol CAS RN: 307-70-0
<b>E0547</b> 1g  Ethyl 3-Ethoxy-2,2-difluoro-3-hydroxypropionate CAS RN: 141546-97-6	<b>E0663</b> 5g 25g  Ethyl 2-Fluoropropionate CAS RN: 349-43-9	<b>E0772</b> 5g 25g  Ethyl 4,4,4-Trifluorocrotonate CAS RN: 25597-16-4	<b>E0830</b> 1g 5g  Ethyl 4,4,4-Trifluorobutyrate CAS RN: 371-26-6	<b>E1018</b> 5g 25g  Ethyl 4,4-Difluoroacetoacetate CAS RN: 352-24-9
<b>E1019</b> 5g 25g  Ethyl 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl Ether CAS RN: 512-51-6	<b>E1020</b> 5g 25g  Ethyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Ether CAS RN: 380-34-7	<b>E1022</b> 5g 25g  Ethyl 5H-Octafluorovalerate CAS RN: 2795-50-8	<b>E1087</b> 5g 25g  Ethyl 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylate CAS RN: 571-55-1	<b>F0030</b> 25mL 100mL 500mL  Ethyl Fluoroacetate CAS RN: 459-72-3
<b>F0665</b> 5g F-CH2-CN Fluoroacetonitrile CAS RN: 503-20-8	<b>F0185</b> 100mg 1g  2-Fluoro-β-alanine Hydrochloride CAS RN: 867-84-5	<b>F0215</b> 5mL 25mL  Butyl Fluoroacetate CAS RN: 371-49-3	<b>F0283</b> 1g 5g 25g  Diethyl Fluoromalonnate CAS RN: 685-88-1	<b>F0500</b> 5g  2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic Acid CAS RN: 1717-59-5
<b>F0510</b> 500mg  2-Fluorocyclohexanone CAS RN: 694-82-6	<b>F0511</b> 250mg 1g  1-Fluoroadamantane CAS RN: 768-92-3	<b>F0587</b> 5g  Fluorocyclohexane CAS RN: 372-46-3	<b>F0631</b> 1g 5g  2-Fluorocyclohexanol CAS RN: 656-60-0	

<p><b>H0024</b> 25g 100g</p>  <p>Heptafluorobutyric Acid CAS RN: 375-22-4</p>	<p><b>H0424</b> 25g 100g 500g</p>  <p>1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol CAS RN: 920-66-1</p>	<p><b>H0425</b> 5g 25g</p>  <p>Hexafluoroacetone Hydrate CAS RN: 34202-69-2</p>	<p><b>H0476</b> 5g 25g</p>  <p>Hexafluoroacetylacetone CAS RN: 1522-22-1</p>	<p><b>H0548</b> 5g 25g</p>  <p>1H,1H-Heptafluoro-1-butanol CAS RN: 375-01-9</p>
<p><b>H0594</b> 5g 25g</p>  <p>Ethyl Heptafluorobutyrate CAS RN: 356-27-4</p>	<p><b>H0596</b> 5g 25g</p>  <p>Heptafluoropropyl iodide CAS RN: 754-34-7</p>	<p><b>H0629</b> 25g 100g</p>  <p>Heptafluoroisopropyl iodide CAS RN: 677-69-0</p>	<p><b>H0649</b> 25g</p>  <p>2,2,3,4,4,4-Hexafluoro-1-butanol CAS RN: 382-31-0</p>	<p><b>H0658</b> 5g 25g</p>  <p>Hexafluoroglutaric Acid CAS RN: 376-73-8</p>
<p><b>H0689</b> 5g</p>  <p>Heptafluoropropyl Bromide CAS RN: 422-85-5</p>	<p><b>H0744</b> 1g</p>  <p>Diethyl Hexafluoroglutarate CAS RN: 424-40-8</p>	<p><b>H0843</b> 5g 25g</p>  <p>Heptadecafluorononanoic Acid CAS RN: 375-95-1</p>	<p><b>H0844</b> 5g 25g</p>  <p>Perfluorodecyl Iodide CAS RN: 423-62-1</p>	<p><b>H0845</b> 25g</p>  <p>2-(Perfluoro-<i>n</i>-octyl)ethanol CAS RN: 678-39-7</p>
<p><b>H0846</b> 5g 25g</p>  <p>(Perfluoro-<i>n</i>-octyl)ethylene CAS RN: 21652-58-4</p>	<p><b>H0892</b> 5g 25g</p>  <p>Perfluorosebacic Acid CAS RN: 307-78-8</p>	<p><b>H0926</b> 25g</p>  <p>Heptafluorobutyramide CAS RN: 662-50-0</p>	<p><b>H0946</b> 5g 25g</p>  <p>Perfluoro-<i>n</i>-octyl Bromide CAS RN: 423-55-2</p>	<p><b>H1013</b> 25g 500g</p>  <p>1,1,2,2,3,3,4-Heptafluoro- cyclopentane CAS RN: 15290-77-4</p>
<p><b>H1033</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl Perfluorobutyrate CAS RN: 356-24-1</p>	<p><b>H1035</b> 25g</p>  <p>1H,1H,9H-Perfluoro-1-nonanol CAS RN: 376-18-1</p>	<p><b>H1038</b> 5g</p>  <p>Ethyl Perfluorononanoate CAS RN: 30377-52-7</p>	<p><b>H1084</b> 5g 25g</p>  <p>1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl Iodide CAS RN: 2043-53-0</p>	<p><b>H1232</b> 5g</p>  <p>1H,1H-Heptadecafluoro-1-nonanol CAS RN: 423-56-3</p>
<p><b>H1233</b> 1g 5g</p>  <p>1H,1H,10H,10H-Hexadecafluoro- 1,10-decanediol CAS RN: 754-96-1</p>	<p><b>H1234</b> 1g</p>  <p>Heneicosfluoroundecanoic Acid CAS RN: 2058-94-8</p>	<p><b>H1279</b> 5g 25g</p>  <p>Hexafluoro-2,3-bis(trifluoro- methyl)-2,3-butanediol CAS RN: 918-21-8</p>	<p><b>H1300</b> 1g 5g</p>  <p>1H,1H-Heptafluorobutylamine CAS RN: 374-99-2</p>	<p><b>H1427</b> 200mg</p>  <p>4,4,4,4',4'-Hexafluoro-DL-valine CAS RN: 16063-80-2</p>
<p><b>H1502</b> 1g</p>  <p>2H,2H,3H,3H-Heptadecafluoro- undecanoic Acid CAS RN: 34598-33-9</p>	<p><b>H1507</b> 5g 25g</p>  <p>1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Methyl Ether CAS RN: 382-34-3</p>	<p><b>H1508</b> 1g 5g</p>  <p>1,1,1-Trifluoroacetone Cyanohydrin CAS RN: 335-08-0</p>	<p><b>M0738</b> 25mL 100mL 500mL</p>  <p>2,2,2-Trifluoroethyl Methacrylate CAS RN: 352-87-4</p>	<p><b>M0988</b> 25g</p>  <p>1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Methacrylate CAS RN: 3063-94-3</p>
<p><b>M1193</b> 5g 25g</p>  <p>2,2,2-Trifluoroethyl Methanesulfonate CAS RN: 25236-64-0</p>	<p><b>M1912</b> 5g</p>  <p>Methyl Nonafluorovalerate CAS RN: 13038-26-1</p>	<p><b>M1916</b> 5g</p>  <p>Methyl Nonadecafluorodecanoate CAS RN: 307-79-9</p>	<p><b>M1917</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl Tricosfluorododecanoate CAS RN: 56554-52-0</p>	<p><b>M2020</b> 5g 25g</p>  <p>Methyl Bromodifluoroacetate CAS RN: 683-98-7</p>

<b>M2021</b> 5g 25g  Methyl Difluoroacetate CAS RN: 433-53-4	<b>M2022</b> 5g 25g  Methyl Heptafluoroisobutyrate CAS RN: 680-05-7	<b>M2496</b> 1g 5g  Methyl 2,2-Bis(trifluoromethyl)-acetate CAS RN: 360-54-3	<b>M2500</b> 1g  Methyl 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Ether CAS RN: 378-16-5	<b>M2514</b> 25g  Methyl 1,1,2-Tetrafluoroethyl Ether CAS RN: 425-88-7
<b>M2783</b> 1g 5g  Methyl 3,3,3-Trifluoropropionate CAS RN: 18830-44-9	<b>N0499</b> 25g 100g 500g  Nonafluorobutyl Iodide CAS RN: 423-39-2	<b>N0600</b> 5g 25g  2-(Perfluorobutyl)ethanol CAS RN: 2043-47-2	<b>N0601</b> 5g 25g  (Perfluorobutyl)ethylene CAS RN: 19430-93-4	<b>N0605</b> 5g 25g  Nonafluorovaleric Acid CAS RN: 2706-90-3
<b>N0607</b> 5g  Perfluorodecanoic Acid CAS RN: 335-76-2	<b>N0692</b> 1g 5g 25g  Perfluoro- <i>tert</i> -butanol CAS RN: 2378-02-1	<b>N0810</b> 1g 5g 25g  1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol CAS RN: 355-28-2	<b>N0814</b> 5g  1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol CAS RN: 307-37-9	<b>O0114</b> 25g 100g 500g  2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol CAS RN: 355-80-6
<b>O0260</b> 5g 25g  Octafluoroadipic Acid CAS RN: 336-08-3	<b>O0294</b> 5g 25g  2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol CAS RN: 355-74-8	<b>O0318</b> 5g 25g  1H,1H,5H-Octafluoropentyl Acrylate CAS RN: 376-84-1	<b>T2423</b> 1g 5g  <i>cis</i> -4-(Trifluoromethyl)-cyclohexanecarboxylic Acid CAS RN: 1202578-27-5	<b>P0845</b> 25g  1H,1H-Pentafluoro-1-propanol CAS RN: 422-05-9
<b>P0904</b> 5g 25g  1H,1H-Perfluoro-1-octanol CAS RN: 307-30-2	<b>P1062</b> 5g  Ethyl Pentafluoropropionylacetate CAS RN: 663-35-4	<b>P1125</b> 25g 100g  Pentafluoropropionic Acid CAS RN: 422-64-0	<b>P1817</b> 5g 25g  1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane CAS RN: 40723-80-6	<b>P2114</b> 25g 100g  Potassium Trifluoroacetate CAS RN: 2923-16-2
<b>T0432</b> 25g 100g 500g  Ethyl Trifluoroacetate CAS RN: 383-63-1	<b>T0433</b> 20mL 100mL 400mL  Trifluoroacetic Anhydride CAS RN: 407-25-0	<b>T0435</b> 25g 100g 500g  2,2,2-Trifluoroethanol CAS RN: 75-89-8	<b>T0791</b> 10g  Trifluoroacetaldehyde Ethyl Hemiacetal (contains ca. 10% Ethanol) CAS RN: 433-27-2	<b>T0810</b> 25g 100g 500g  Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetoacetate CAS RN: 372-31-6
<b>T1245</b> 5g 25g  Methyl 4,4,4-Trifluoroacetoacetate CAS RN: 83643-84-9	<b>T1434</b> 5g 25g  Ethyl Trifluoropyruvate CAS RN: 13081-18-0	<b>T1512</b> 5g 25g  2-(Trifluoromethyl)acrylic Acid CAS RN: 381-98-6	<b>T1530</b> 25g  Isopropyl 4,4,4-Trifluoroacetoacetate CAS RN: 175230-50-9	<b>T1604</b> 5g 25g  2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoromethanesulfonate CAS RN: 6226-25-1
<b>T1713</b> 1g 5g  3,3,3-Trifluoropropionic Acid CAS RN: 2516-99-6	<b>T1900</b> 1g  ( <i>R</i> )-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic Acid CAS RN: 44864-47-3	<b>T1901</b> 1g  ( <i>S</i> )-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic Acid CAS RN: 24435-45-8	<b>T2417</b> 1g 5g 25g  4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic Acid ( <i>cis</i> - and <i>trans</i> -mixture) CAS RN: 95233-30-0	

<p><b>T2424</b> 1g 5g</p>  <p><i>trans</i>-4-(Trifluoromethyl)-cyclohexanecarboxylic Acid CAS RN: 133261-33-3</p>	<p><b>T2492</b> 1g 5g</p>  <p>Tricosafuorododecanoic Acid CAS RN: 307-55-1</p>	<p><b>T2528</b> 5g 25g</p>  <p>2-(Perfluorohexyl)ethanol CAS RN: 647-42-7</p>	<p><b>T2529</b> 5g 25g</p>  <p>1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane CAS RN: 461-17-6</p>	<p><b>T2583</b> 5g</p>  <p>1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane CAS RN: 99324-96-6</p>
<p><b>T2586</b> 1g 5g</p>  <p>TFEF CAS RN: 32042-38-9</p>	<p><b>T2587</b> 1g 5g</p>  <p>3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid CAS RN: 662-22-6</p>	<p><b>T2588</b> 5g 25g</p>  <p>1,1,1-Trifluoro-3-iodo-propane CAS RN: 460-37-7</p>	<p><b>T2629</b> 5g 25g</p>  <p>Trimethylsilyl Trifluoroacetate CAS RN: 400-53-3</p>	<p><b>T2670</b> 1g 5g</p>  <p>4,4,4-Trifluorobutyric Acid CAS RN: 406-93-9</p>
<p><b>T2706</b> 5g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (<i>cis</i>- and <i>trans</i>-mixture) CAS RN: 30129-18-1</p>	<p><b>T2781</b> 1g 5g</p>  <p>4,4,4-Trifluoro-1-butanol CAS RN: 461-18-7</p>	<p><b>T2885</b> 1g</p>  <p>4-(Trifluoromethyl)cyclohexanemethanol (<i>cis</i>- and <i>trans</i>-mixture) CAS RN: 883731-58-6</p>	<p><b>T2896</b> 1g</p>  <p>[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]-methyl]amine (<i>cis</i>- and <i>trans</i>-mixture) CAS RN: 361393-85-3</p>	<p><b>T2968</b> 5g 25g</p>  <p>1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol CAS RN: 646-97-9</p>
<p><b>T2986</b> 1g 5g</p>  <p>3,3,3-Trifluoro-1-propanol CAS RN: 2240-88-2</p>	<p><b>T3057</b> 5g 25g</p>  <p>1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Ether CAS RN: 406-78-0</p>	<p><b>T3069</b> 5g 25g</p>  <p>1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ether CAS RN: 16627-68-2</p>	<p><b>T3247</b> 5g 25g</p>  <p>Trifluoroacetaldehyde Methyl Hemiacetal (contains ca. 10% Methanol) CAS RN: 431-46-9</p>	<p><b>T3262</b> 5g 25g</p>  <p>2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide CAS RN: 1547-87-1</p>
<p><b>T3330</b> 1g 5g</p>  <p>1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione CAS RN: 70086-62-3</p>	<p><b>U0081</b> 5g 25g</p>  <p>Undecafluoropentyl Iodide CAS RN: 638-79-9</p>	<p><b>U0083</b> 1g 5g</p>  <p>1H,1H-Undecafluorohexylamine CAS RN: 355-34-0</p>		

## TCI 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司

试剂热线: 800-988-0390或021-67121386

大包装热线: 800-988-1865

传真: 021-67121385

邮箱: Sales-CN@TCIchemicals.com

地址: 上海化学工业区普工路96号

邮编: 201507

[www.TCIchemicals.com](http://www.TCIchemicals.com)